




USER GUIDE

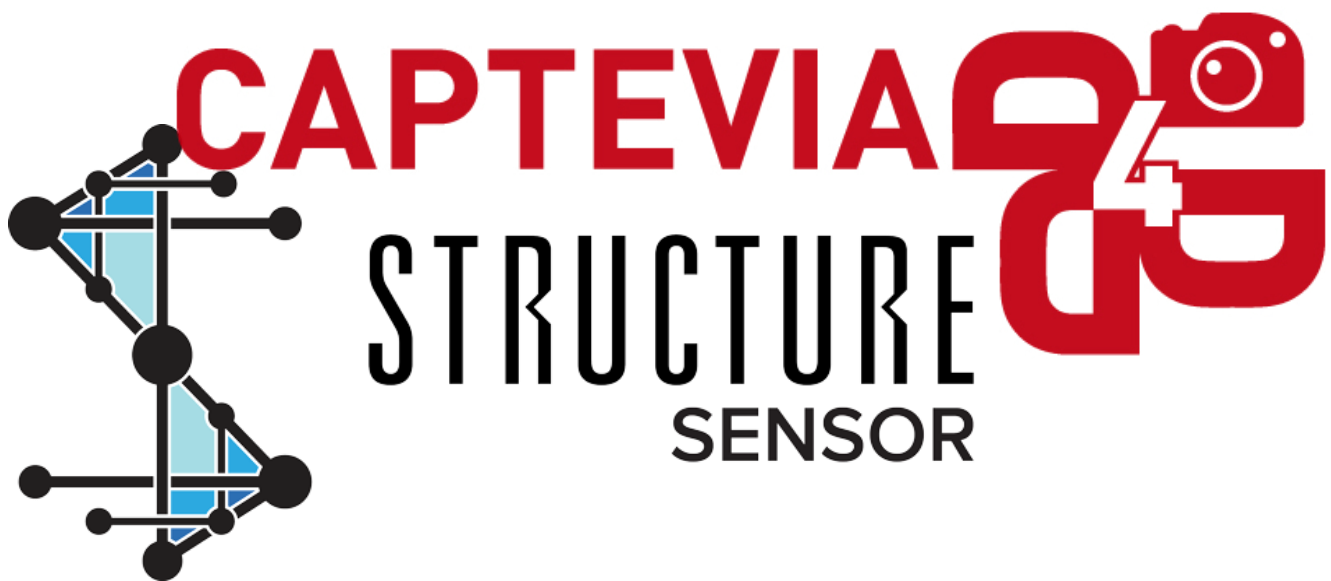

Version 3.2

GUIDE D'UTILISATION



Version 3. 2

MANUAL DEL USUARIO



Versión 3. 2

BENUTZERANLEITUNG



Version 3. 2




Summary

English	4
What is the structure sensor and Captevia ?	4
Subscribe to Captevia	4
Create a new patient	5
Scan your patient	6
Send you files	13
Open the file in Rodin Neo	14
Français.....	20
Qu'est-ce que le Structure Sensor et Captevia?.....	20
Souscrire à Captevia	20
Créez un patient	21
Scannez votre patient.....	22
Envoyez vos fichiers.....	29
Ouvrez le fichier dans Rodin Neo	30
Español	36
¿Qué son Structure Sensor y Captevia?	36
Suscribirse a Captevia.....	36
Crear un paciente	37
Escanear al paciente.....	38
Enviar los archivos	45
Abrir el archivo en Rodin Neo	46
Deutsch.....	52
Was sind der Structure-Sensor und Captevia?.....	52
Captevia abonnieren	52
Anlegen eines Patienten.....	53
Scannen des Patienten	54
Abschicken der Dateien.....	61
Öffnen der Datei bei odin Neo	62

English

What is the structure sensor and Captevia ?

Structure Sensor is a 3D scanner that provides you a portable solution for 3D acquisition.
To use it, you must download the application Captevia V3 (or later) from the Apple Store.

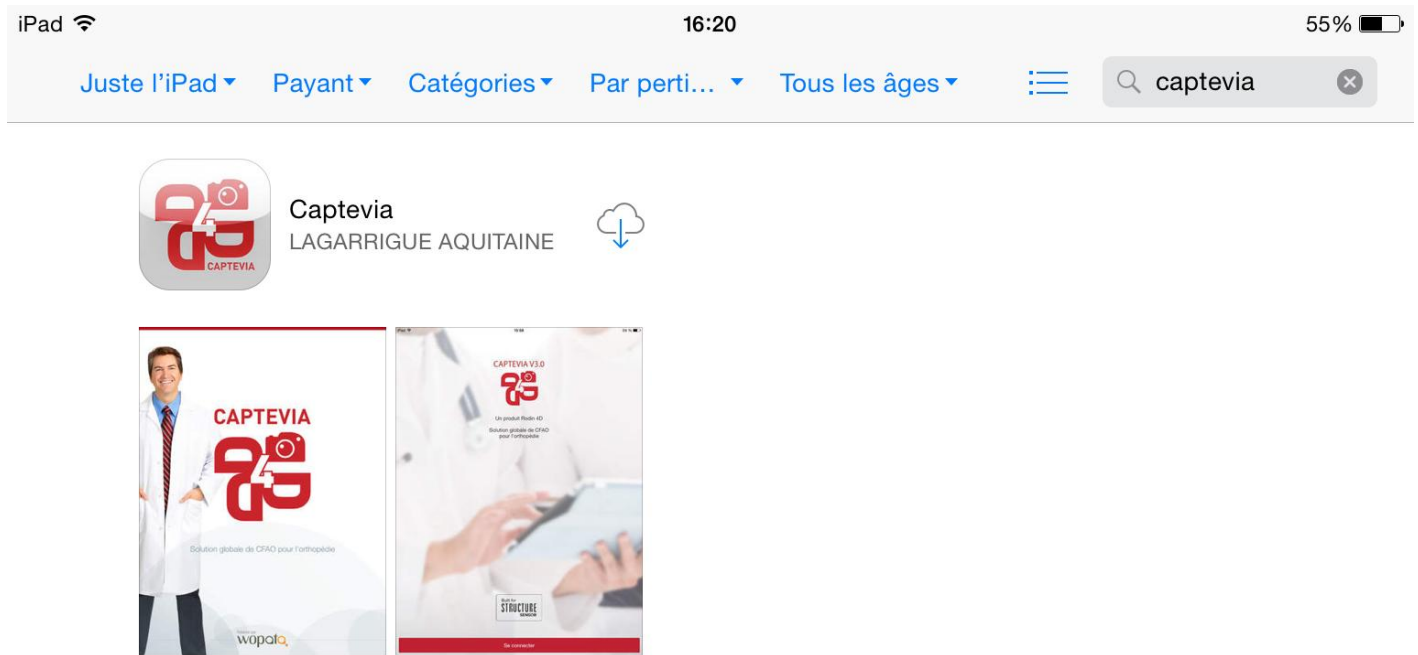

Download Captevia V3 on the Apple Store

Compatibility: Requires iOS 7.0 or later.

Subscribe to Captevia

First of all, you must create an account on Captevia. To do so, you must give a valid email address on the first screen of Captevia application.

Your iPad must have an email address configured. If you plan to use dropbox to exchange files, you must download dropbox application on the Apple Store and create an account.



Create a new patient

Create a patient with the “+” button. You must fill in the information and complete the creation.


The screenshot shows the 'Add a patient' form in the Captevia app. The form is overlaid on a 'Patients' list. The form fields include: SURNAME, FIRST NAME, DATE OF BIRTH, HEIGHT (cm), WEIGHT (kg), DOCTOR, APPLICATOR, AGENCY, EQUIPMENT TYPE, and COMMENTS. The 'Add a patient' header has 'Cancel', 'Add a patient', and 'Save' buttons. The background shows a list of patients with names like 'Doe Jane', 'Doe John', 'Kg bu Rage', and 'Rondin Pp'. A keyboard is visible at the bottom.

Create a patient.



Scan your patient


To scan your patient, you must use the “3D” button.

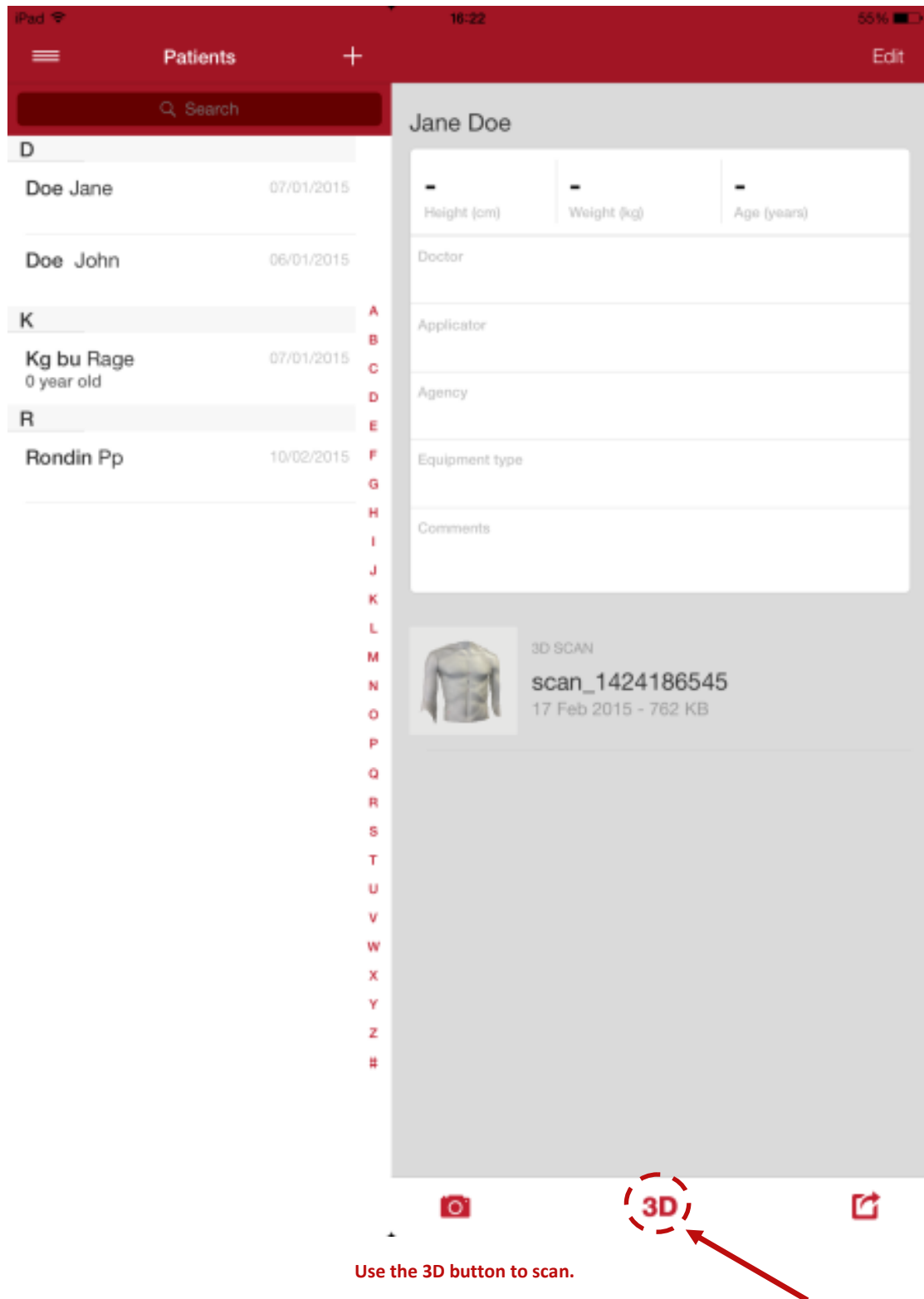


Select the part you want to scan by extending or shrinking the box. The area you will scan will appear in red.



To modify the size and the position of the box use the gesture:

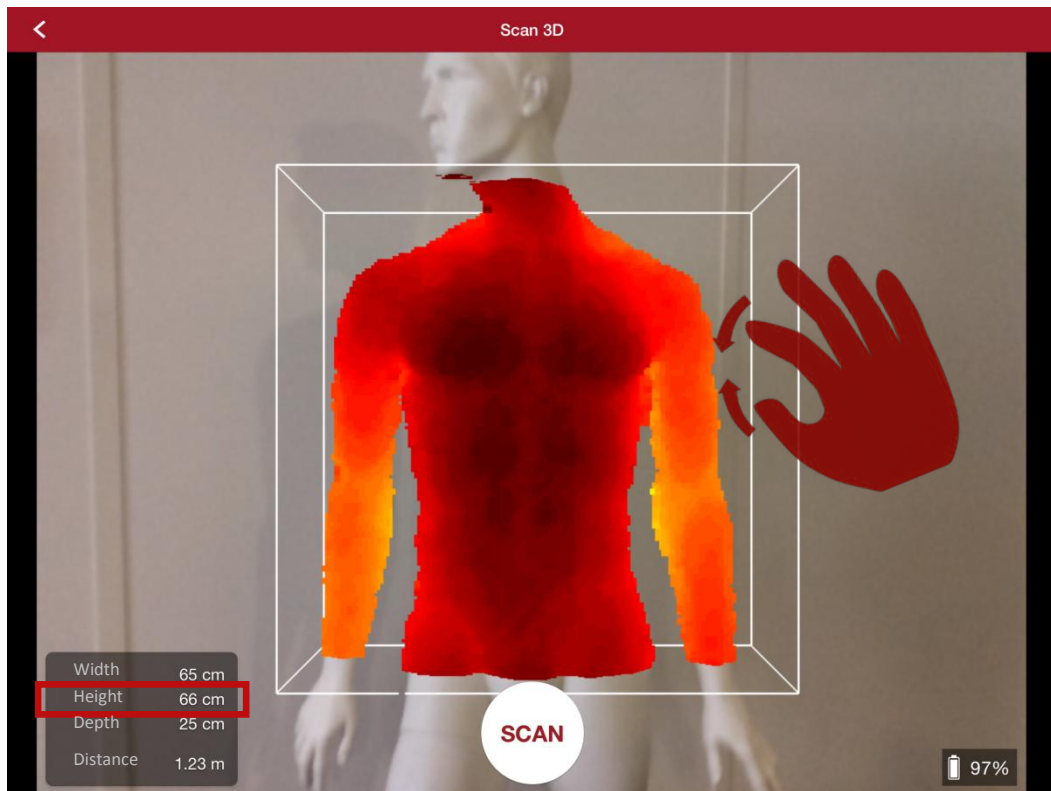


Zoom in-Zoom out vertically to modify the height of the box

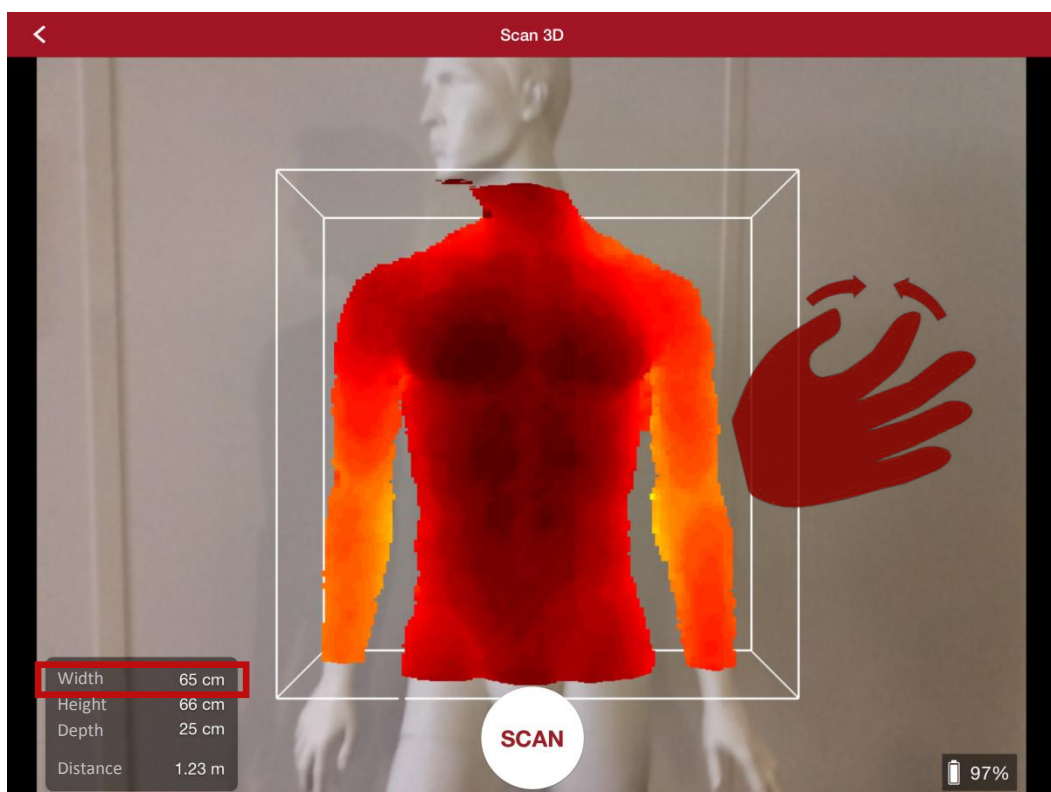


Zoom in-Zoom out horizontally to modify the width of the box



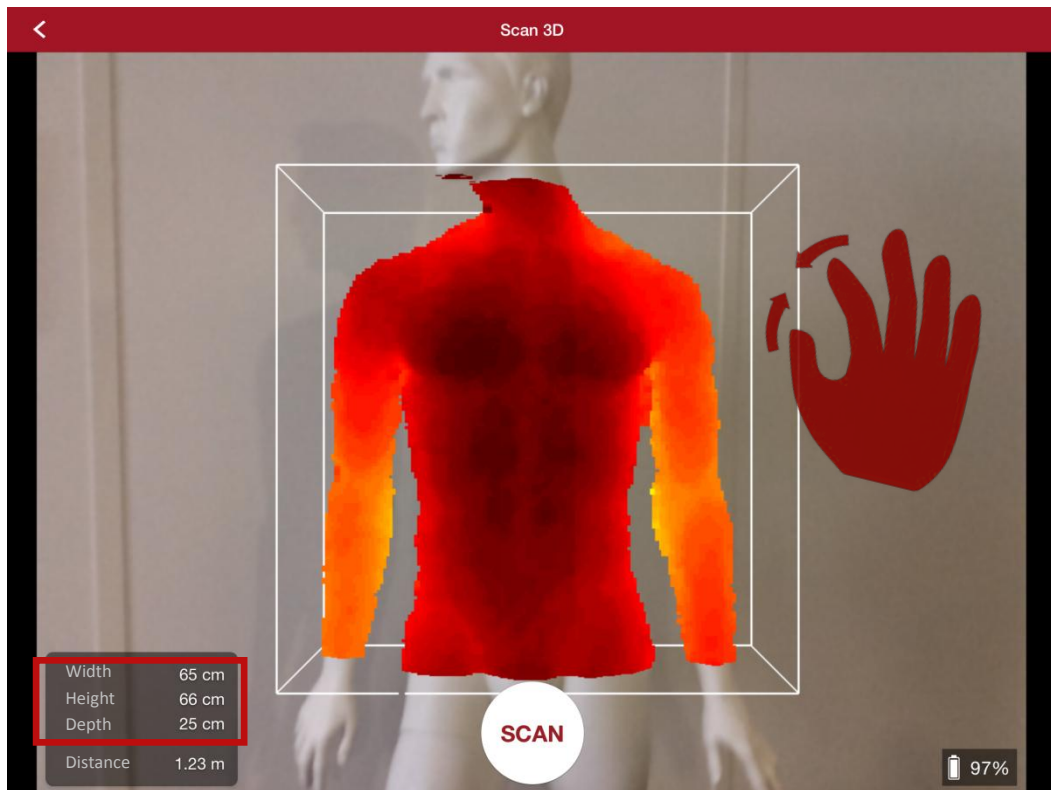


Zoom in-Zoom out diagonally to modify the three dimensions of the box

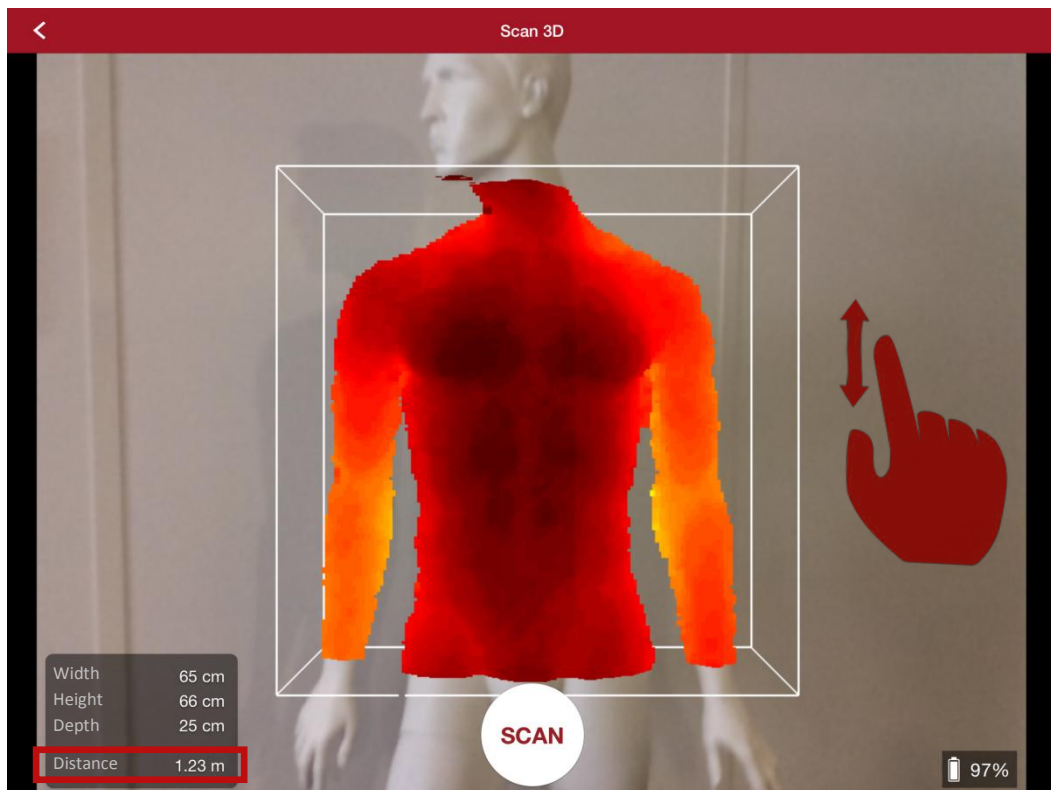


Swipe down-Swipe up on the right of your screen to modify the position of the box (distance between the sensor and the middle of the box)



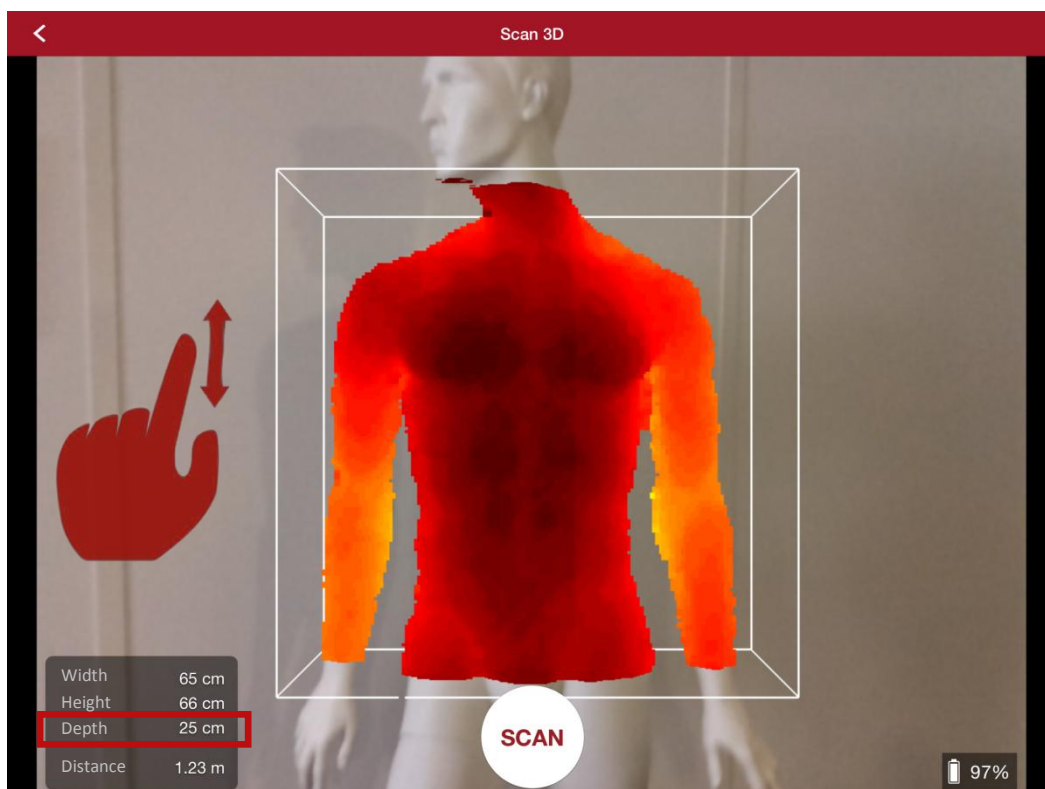

Swipe down-Swipe up on the left of your screen to modify the depth of the box (the distance is also modified as it changes the position of the center of the box)


Advise: Watch the box size and position on the bottom left corner of your screen.

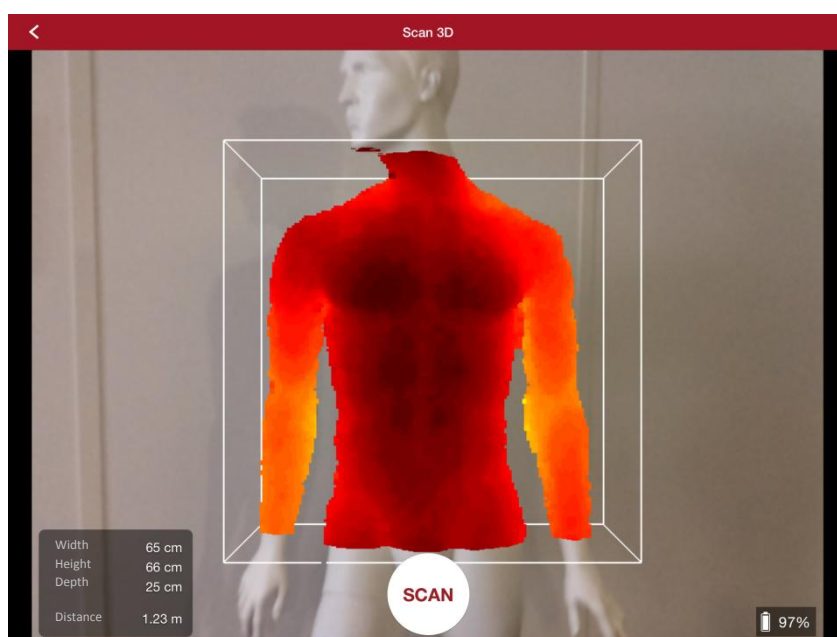

The red part will be scanned

Click on “scan” when the selected area suits, and begin scanning. Everything that was not in red before clicking on the “scan” button won’t be scanned.



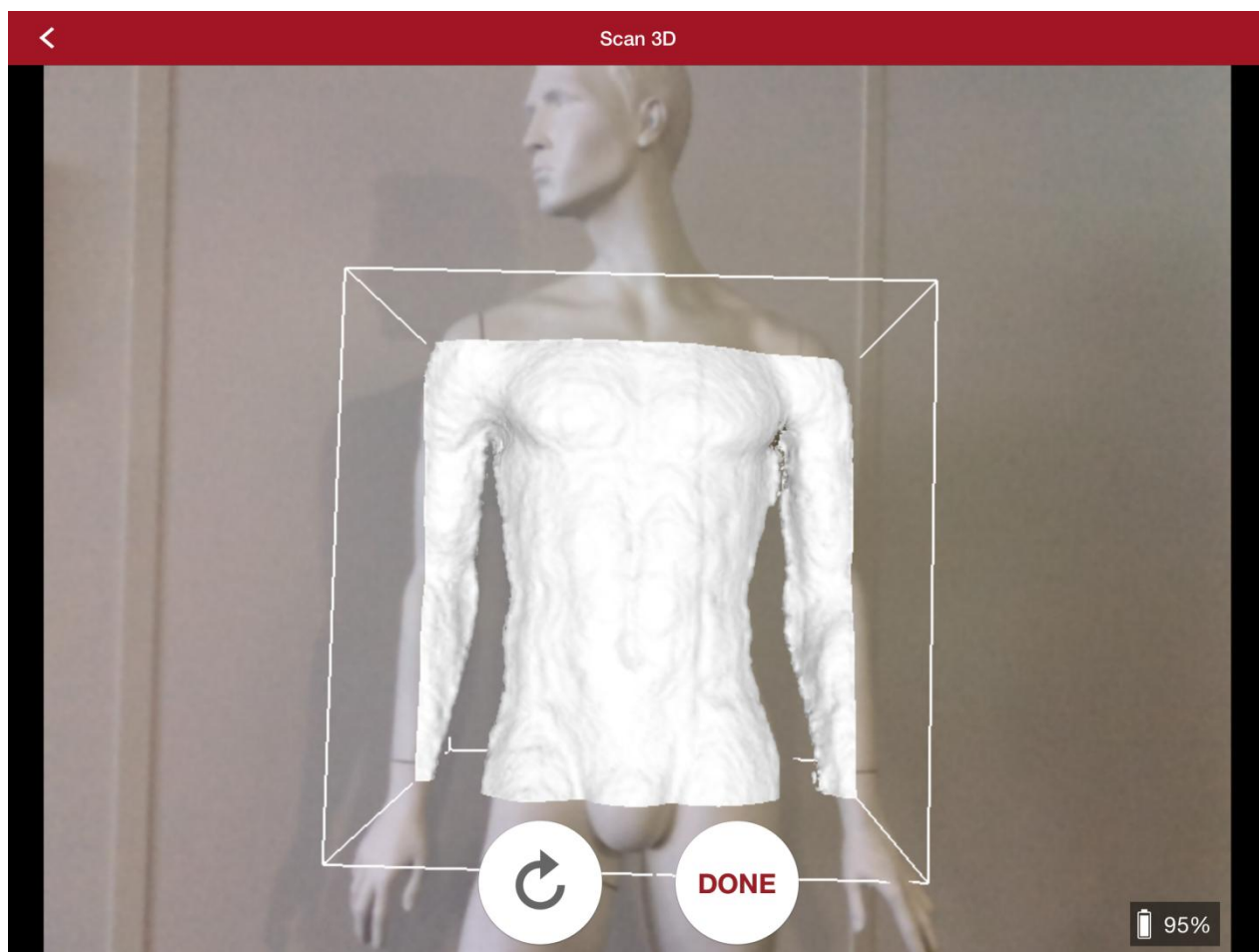

Begin the scan

Turn around your patient to scan him. Come closer to the patient for a better precision, without going nearer than 40cm, which is the structure sensor limit to scan.


Advise: The smaller the box, the better the precision.

The precision of your 3D model will depend on the size of the initial box. The smaller it is, the better the precision of your measurements. We advise you to make the box the smaller you can, depending on the orthopaedic device you want to make.



The structure sensor projects infrared light on the surface. To obtain better results:

- Position the structure sensor the more perpendicularly possible to the model
- Scan from short distance (40cm)

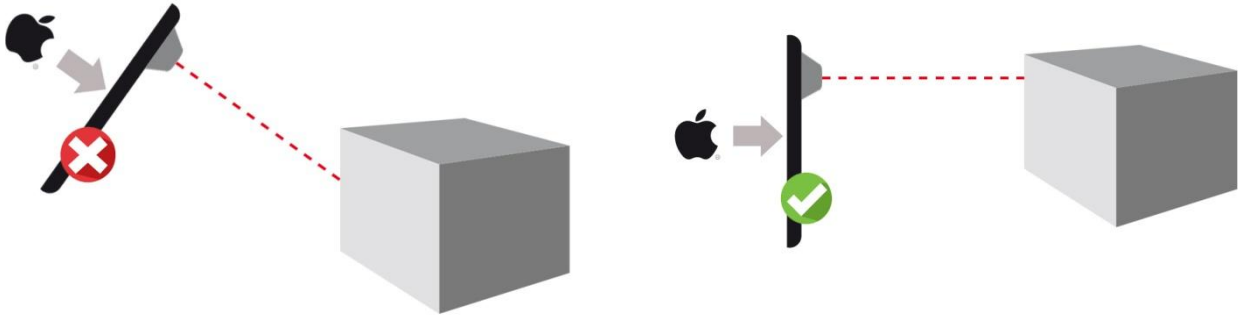

Advise: To optimize the result of the scan, position the Structure Sensor perpendicularly to the model.




Advise: To optimize the result of the scan, position the Structure Sensor at 40cm from the model.

Click on “Done” to end the scan.

The return button allows you to begin again your scan from the box setting step.



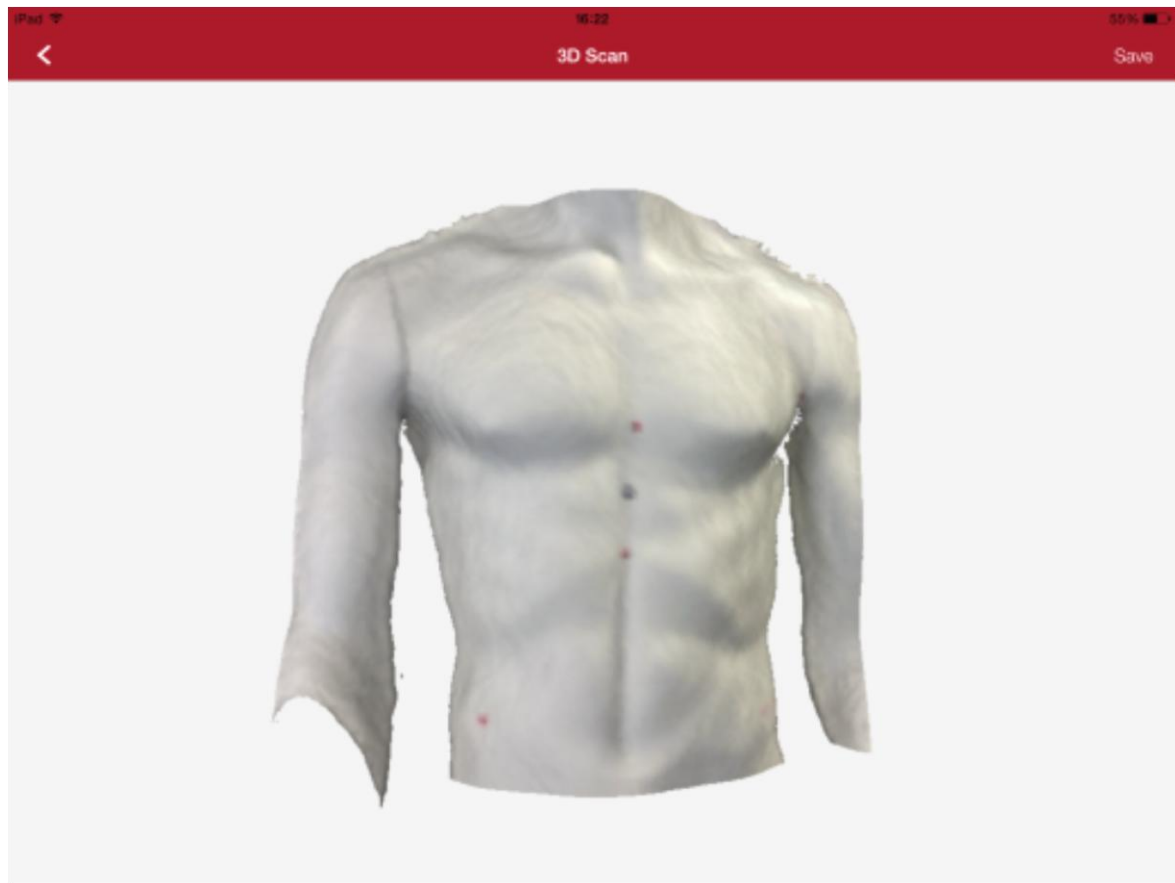


See the result of your scan



Send you files


Send your scan by email or dropbox if necessary.

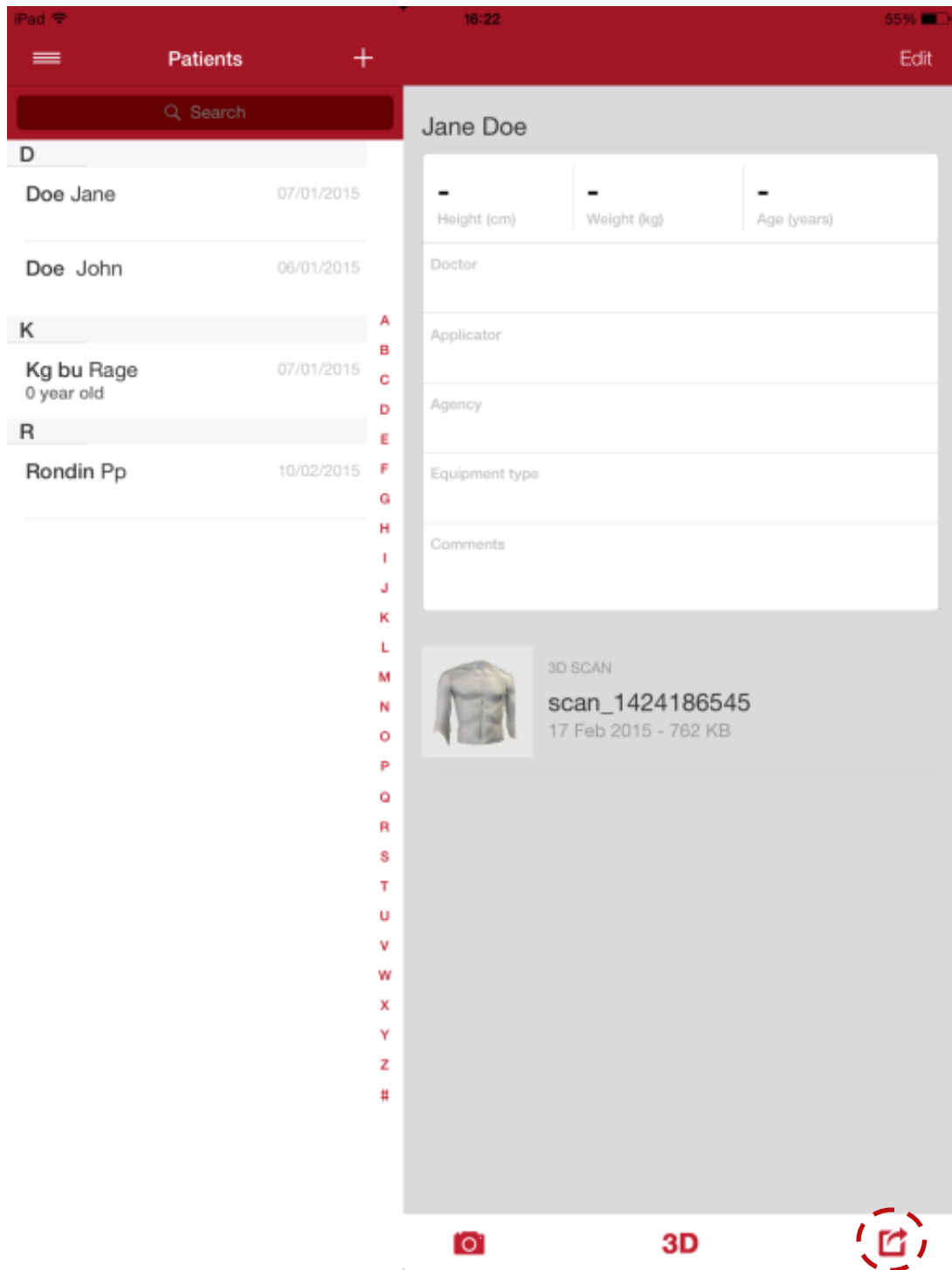

Send your scan

Select the files you want to include in your captevia file.



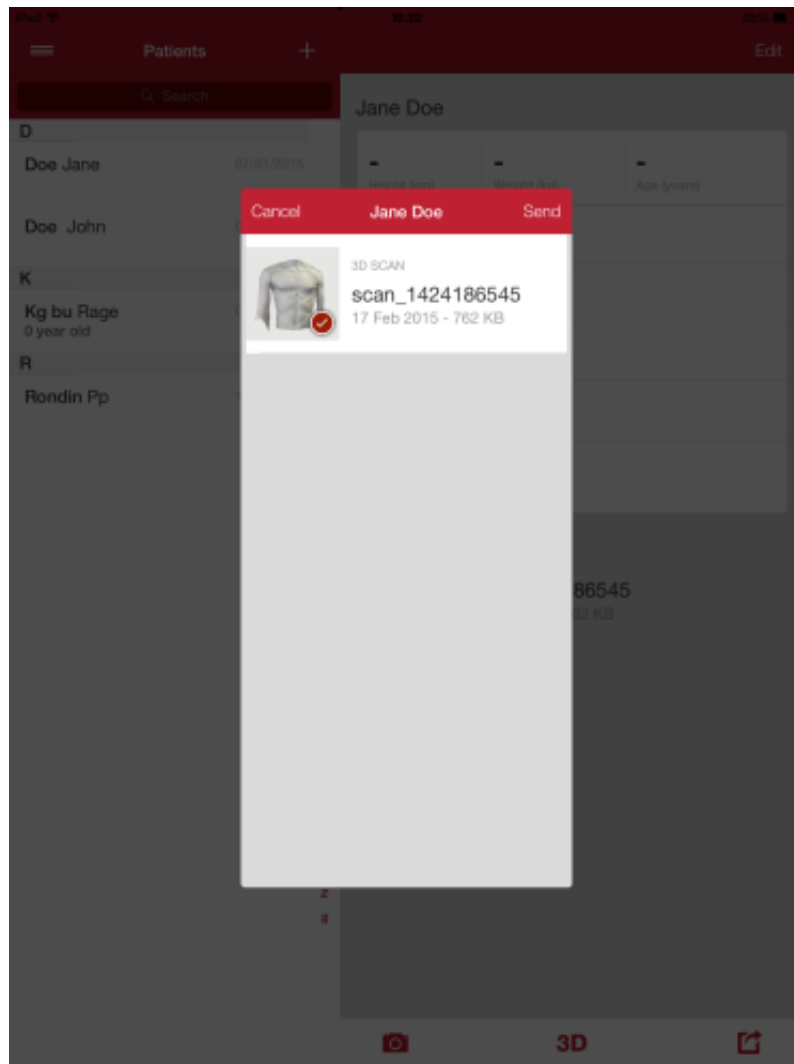

Select the files

Open the file in **RODIN4D neo**
GLOBAL CAD/CAM FOR P&O

Download the captevia file and double click on the icon.




Double click on the file



Rodin4D Neo opens up and shows you the content of your file.

You can also open the Captevia file from Rodin Neo interface (Files ->Open menu) since version 10.0.85.

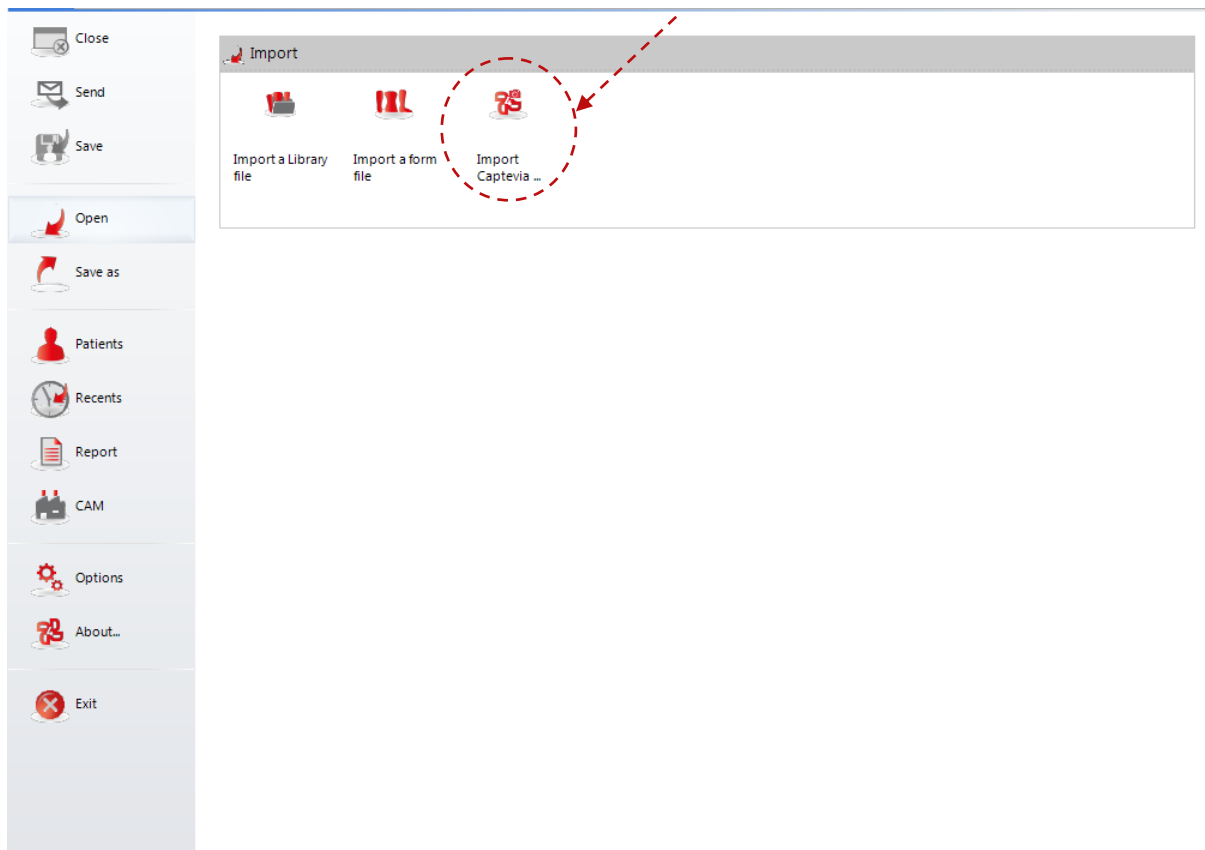

Open your Captevia file directly from Rodin Neo


You can either create a new patient or copy the captevia file in an existing patient folder. Once you have chosen, close the window and find your patient in the patient manager.





Display the content of your captevia file


From your patient manager, you can extract the data of your captevia file. Select the desired scan in the 3DView list, and use the button “Extract Scan”.

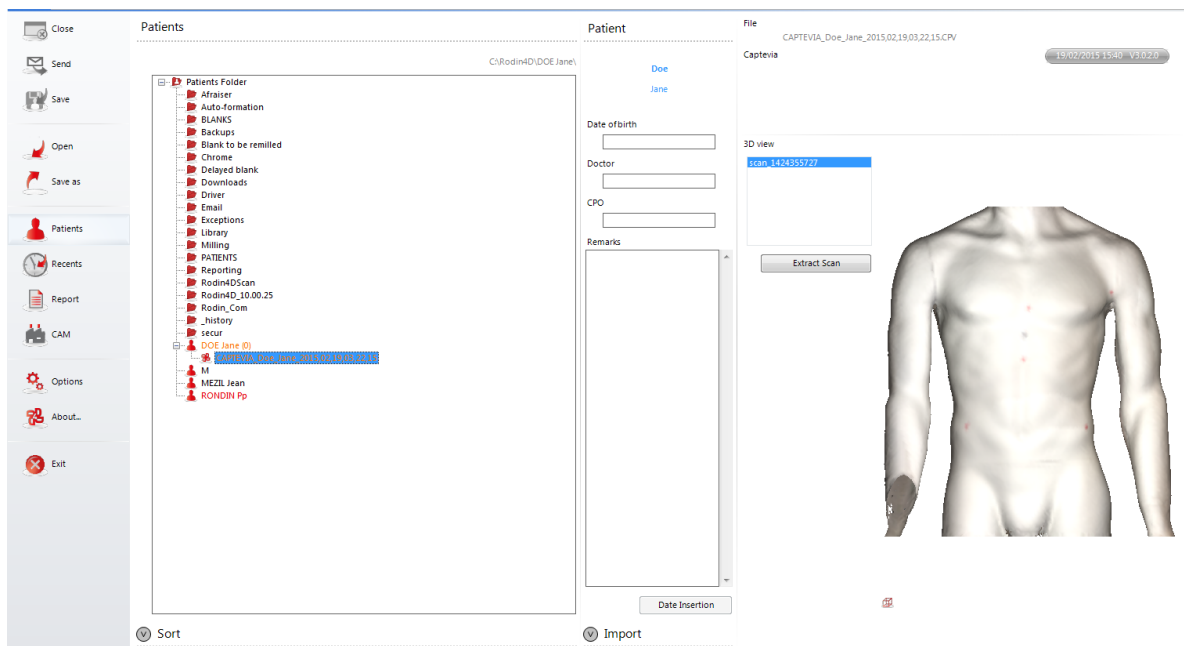

Visualize the file in your patient manager

The scan appears in the patient folder. You can either create the Rodin form directly with the “Create form” button or clean it up first. To do so, click on “clean scan file”.




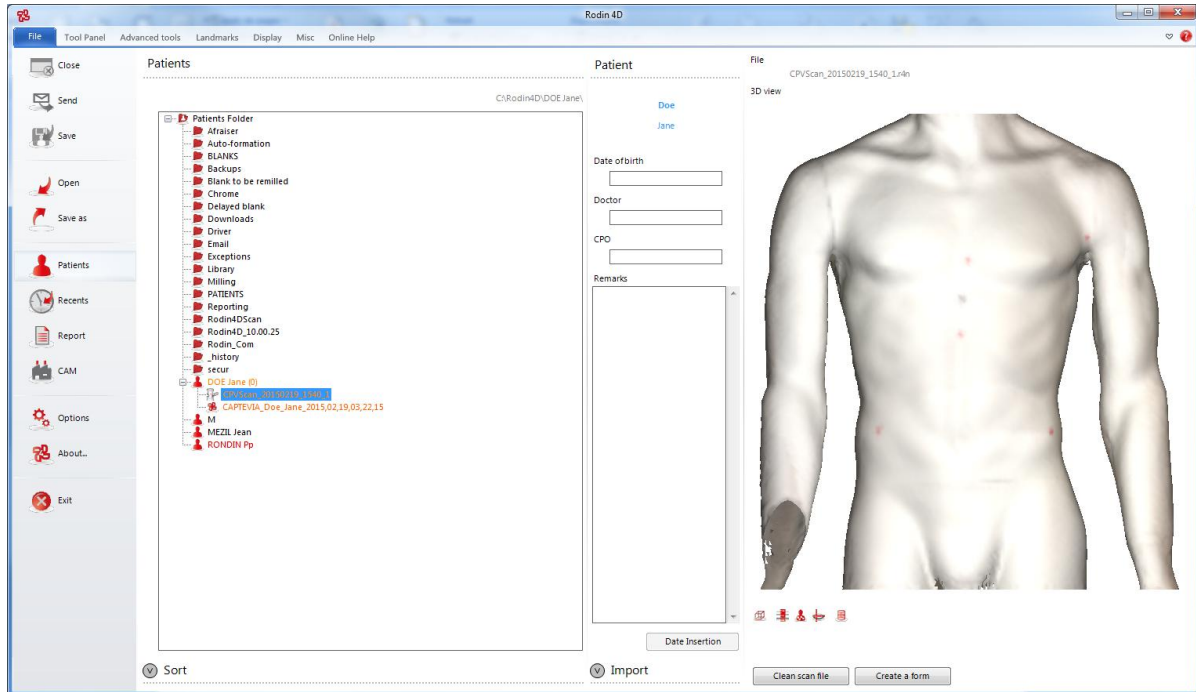

Extract the scan in your patient folder


A cleaning window appears. Follow the steps and click on validate when you are finished.



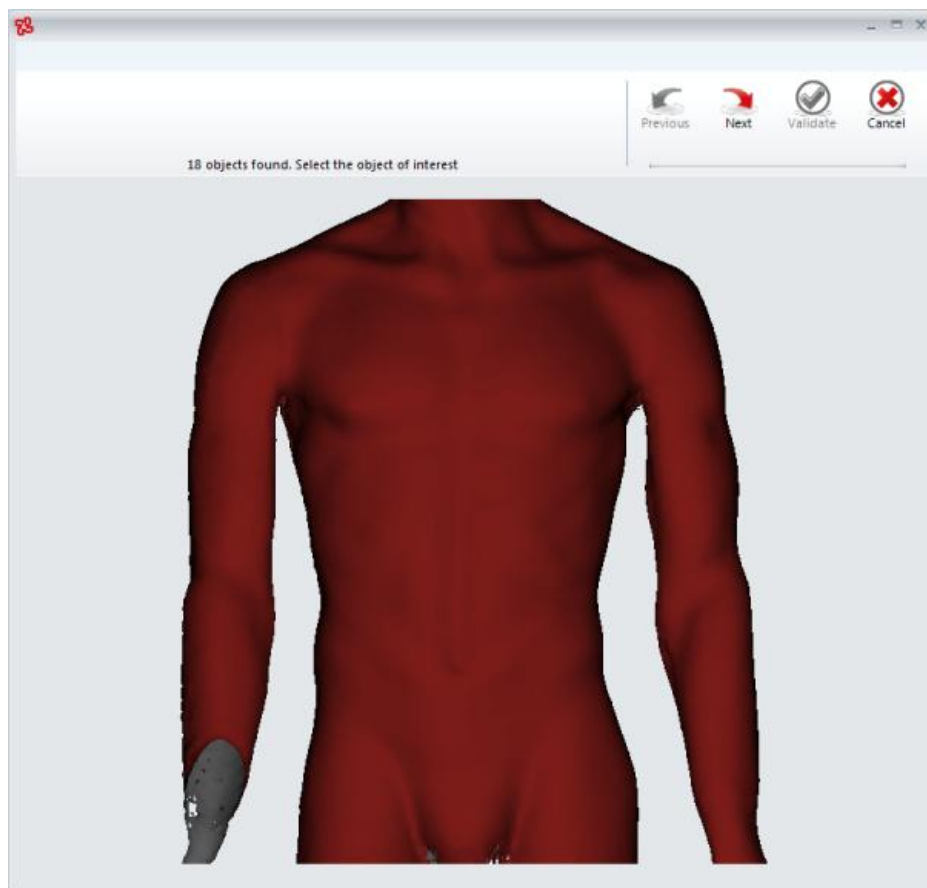

Follow the steps of the cleaning assistant.


You can either replace the current file or create a new file. To do so, you must choose the name of your new file.

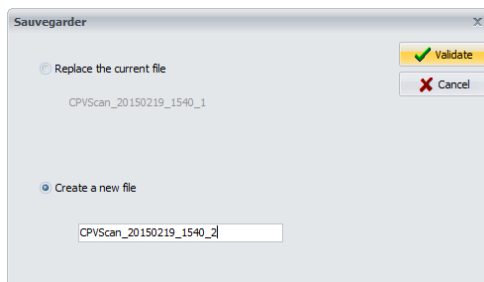

To create a new file, choose the name of your new file

Once you have cleaned your scan, you can create your Rodin form with the button “Create form”.



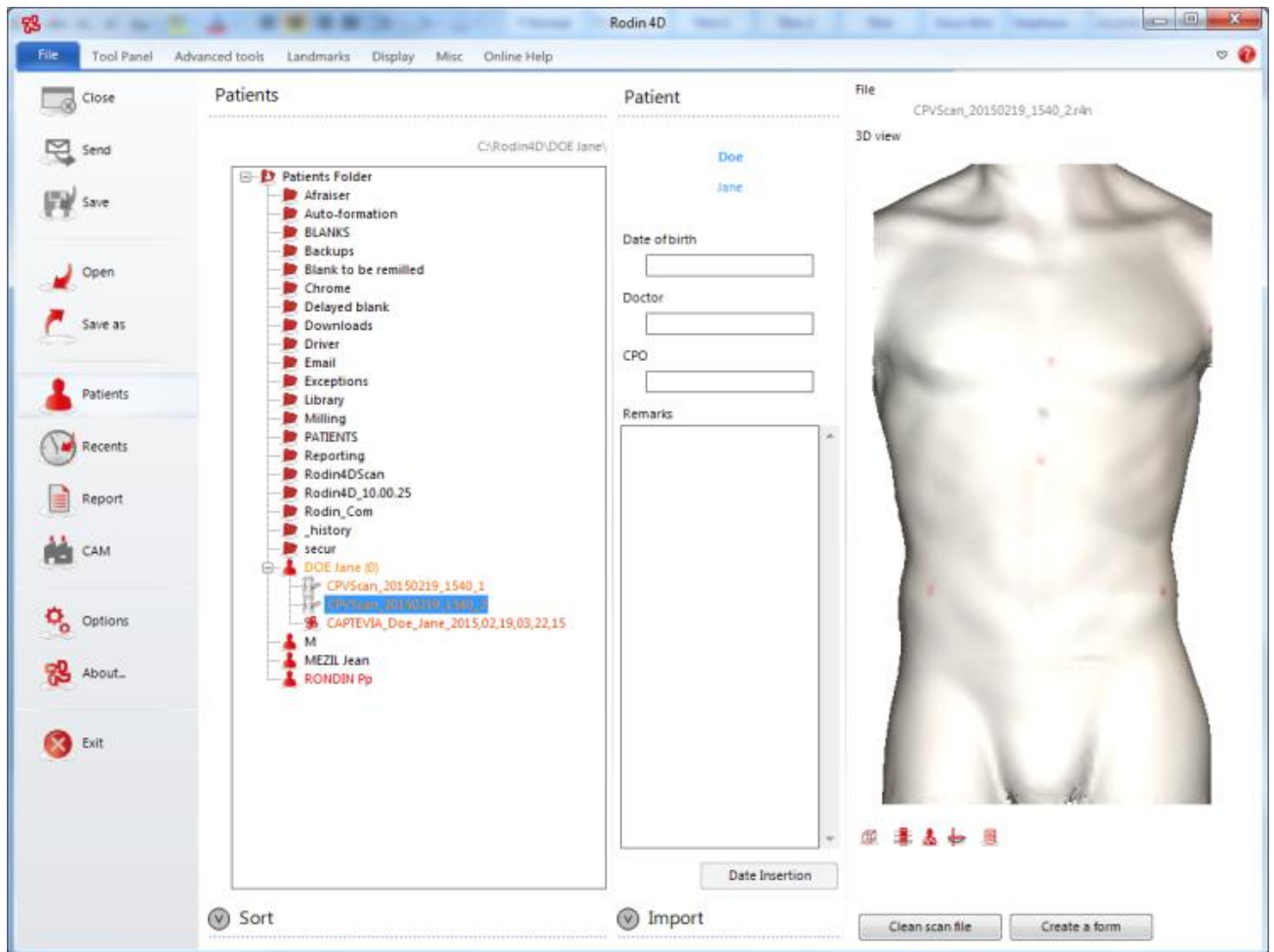

Create the Rodin form


You are now ready to design your orthopaedic device!



Français

Qu'est-ce que le Structure Sensor et Captevia?

Le Structure Sensor est un scanner 3D qui fournit une solution portable d'acquisition 3D.
Pour l'utiliser, vous devez télécharger l'application Captevia V3 (ou ultérieure) sur l'Apple Store.

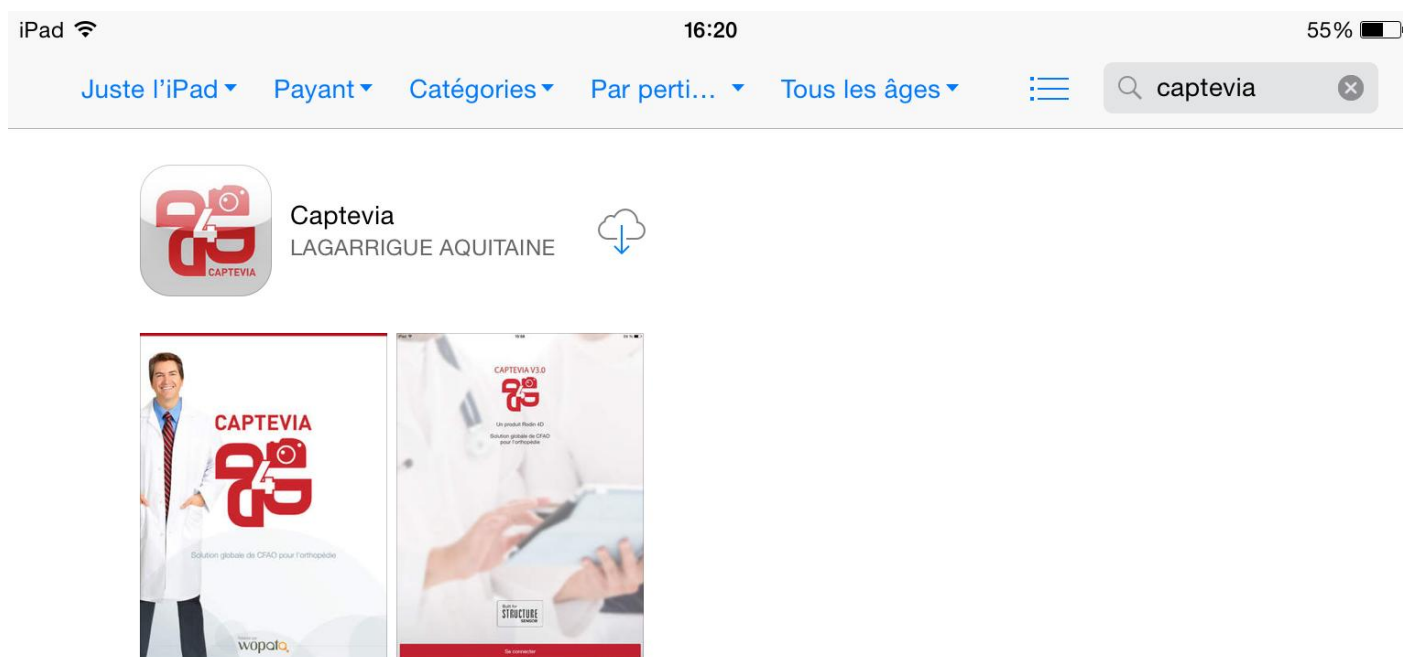

Téléchargez Captevia V3.1 sur l'Apple Store

Compatibilité: Nécessite iOS 7 ou ultérieur.

Souscrire à Captevia

Tout d'abord, vous devez créer un compte Captevia. Pour cela, ouvrez l'application et remplissez le formulaire en renseignant une adresse email valide.

Votre iPad doit être configuré pour envoyer des emails. Si vous souhaitez utiliser la fonctionnalité d'envoi par dropbox, il vous suffit de télécharger l'application dropbox et de créer un compte sur l'application.



Créez un patient

Créez un patient avec le bouton "+". Vous devez renseigner les informations puis finaliser la création.


The screenshot shows the 'Add a patient' form in the Captevia app. The form is overlaid on a 'Patients' list. The form fields include: SURNAME, FIRST NAME, DATE OF BIRTH, HEIGHT (cm), WEIGHT (kg), DOCTOR, APPLICATOR, AGENCY, EQUIPMENT TYPE, and COMMENTS. The 'Add a patient' button is highlighted in red. The background shows a list of patients with names like 'Doe Jane', 'Doe John', 'Kg bu Rage', and 'Rondin Pp'.

Créez un patient.



Scannez votre patient


Pour scanner votre patient, utilisez le bouton "3D".

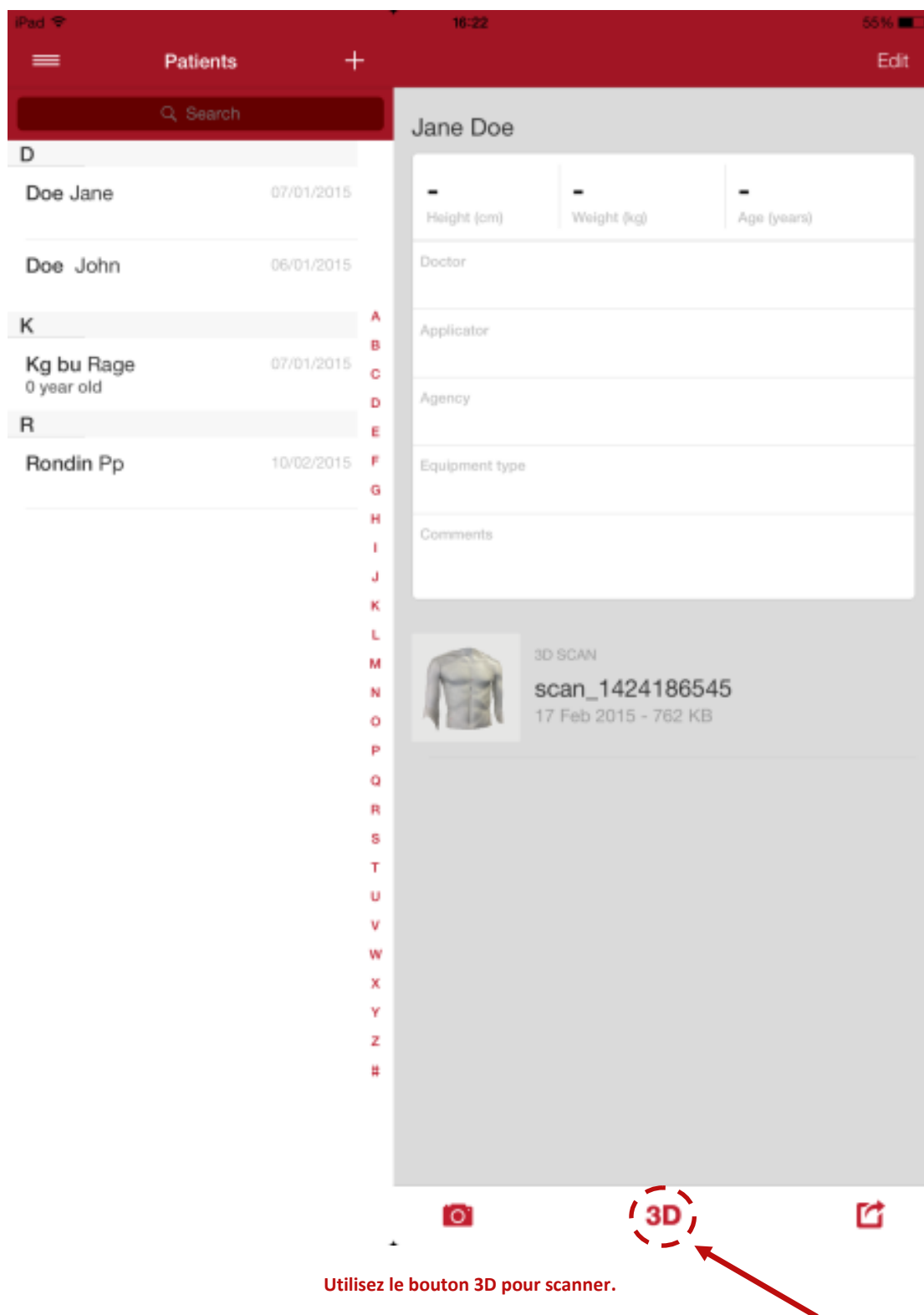


Sélectionnez la zone à scanner en agrandissant ou rapetissant la boîte. La partie sélectionnée apparaîtra en rouge.



Pour modifier la taille et la position de la boîte, utilisez les gestes suivants:

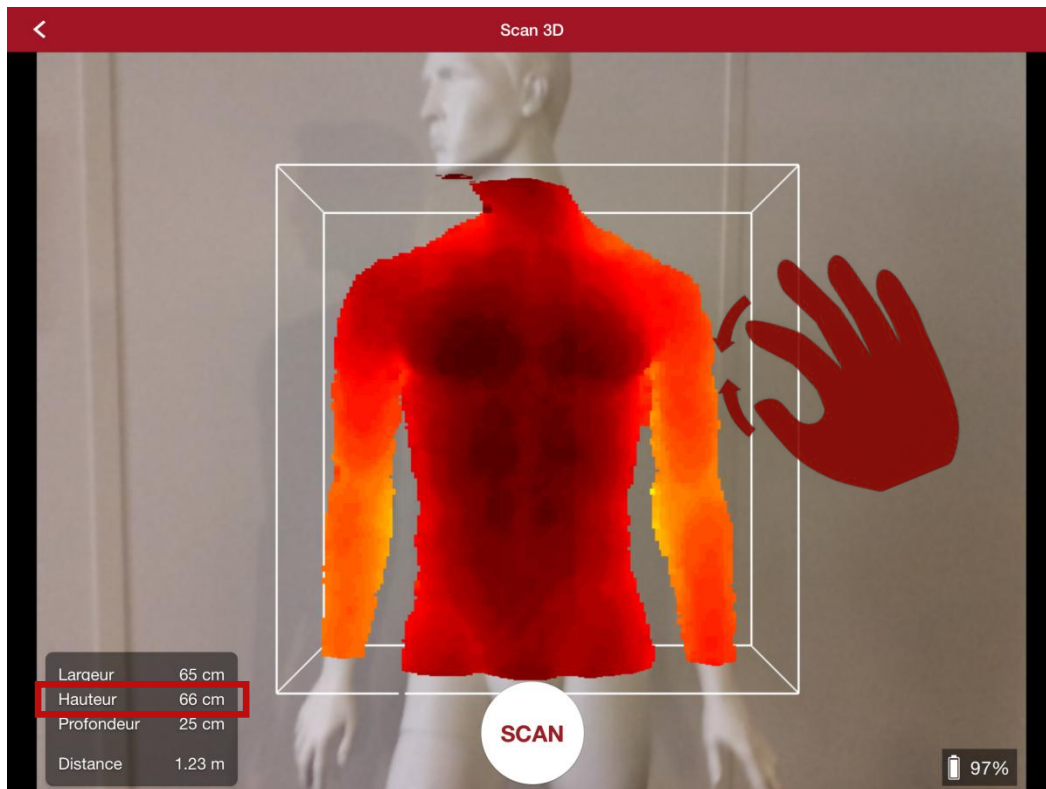


Zoom in-Zoom out verticalement pour modifier la hauteur de la boîte.

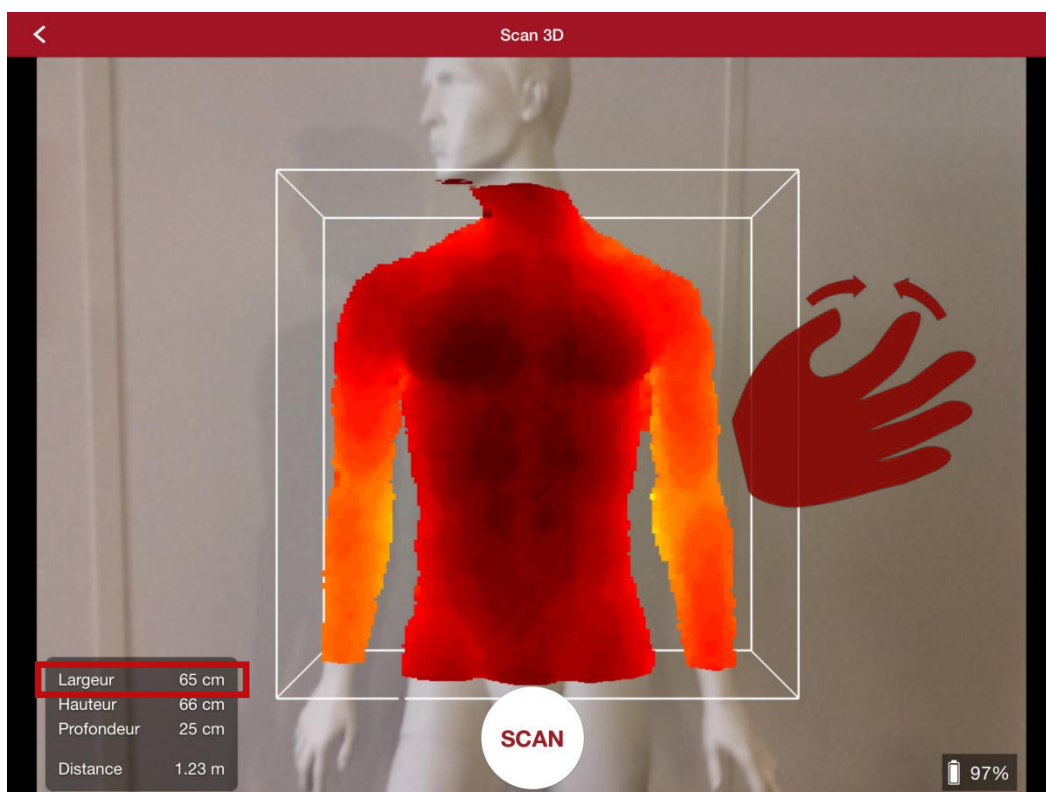


Zoom in-Zoom out horizontalement pour modifier la largeur de la boîte




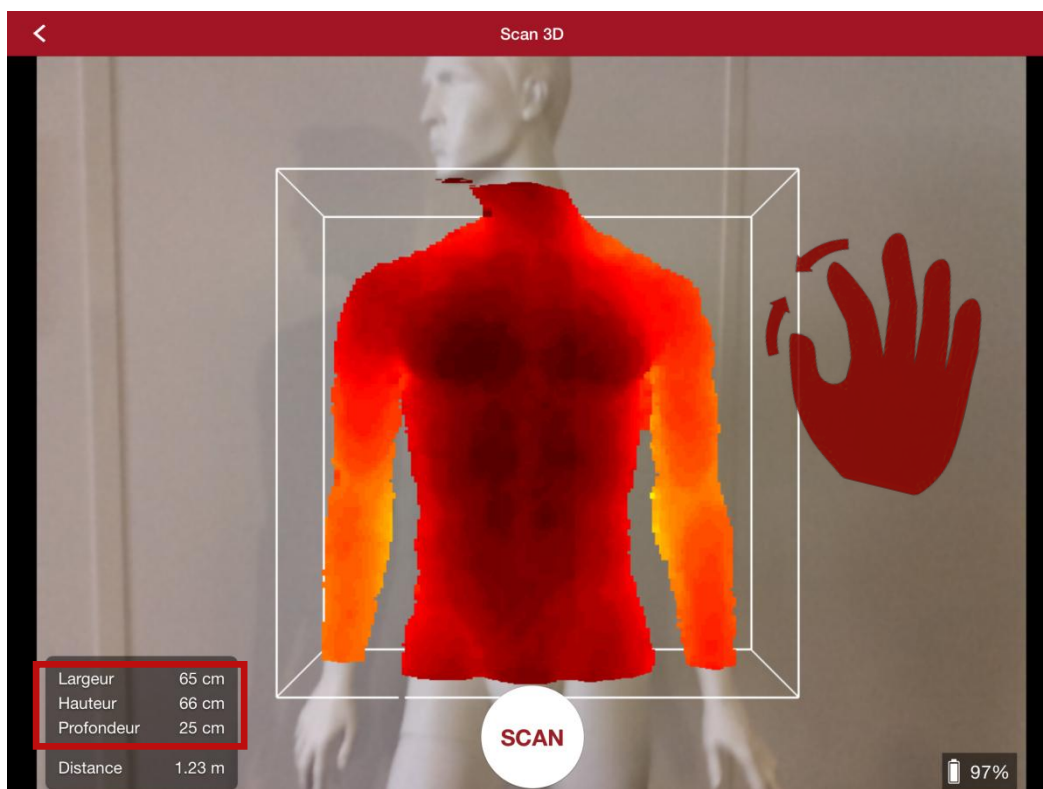

Zoom in-Zoom out en diagonale pour modifier les trois dimensions de la boîte

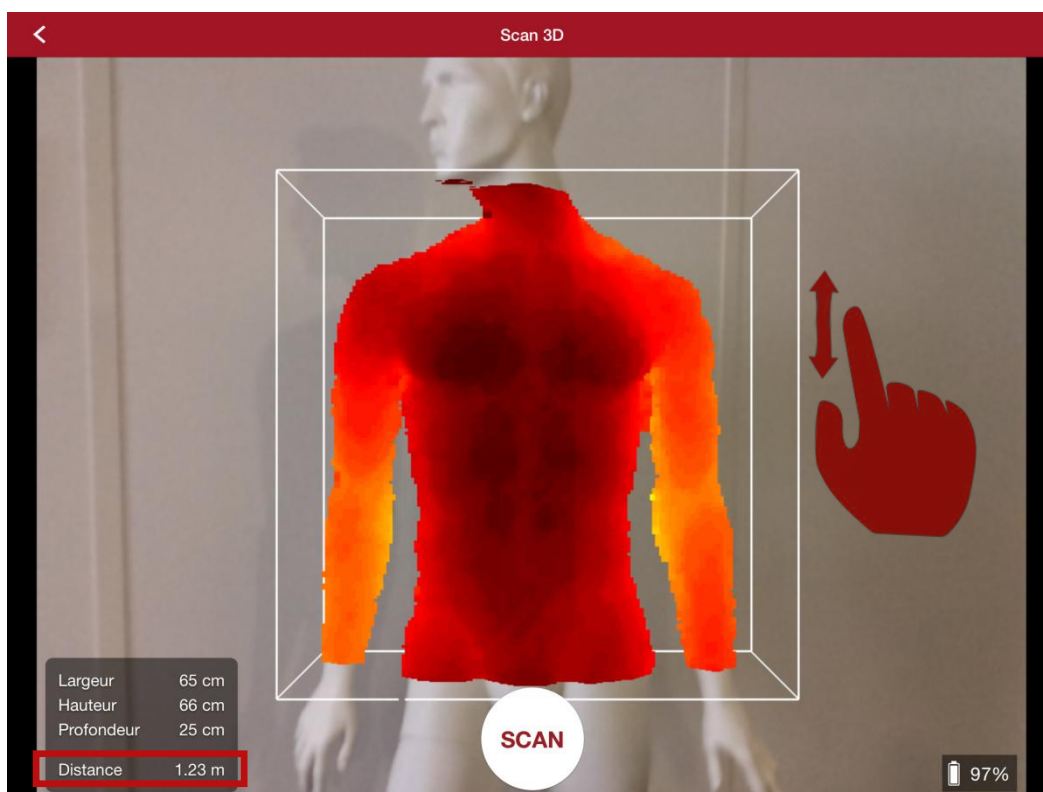


Glissez de haut en bas sur la droite de votre écran pour modifier la position de la boîte
(distance entre le capteur et le centre de la boîte)

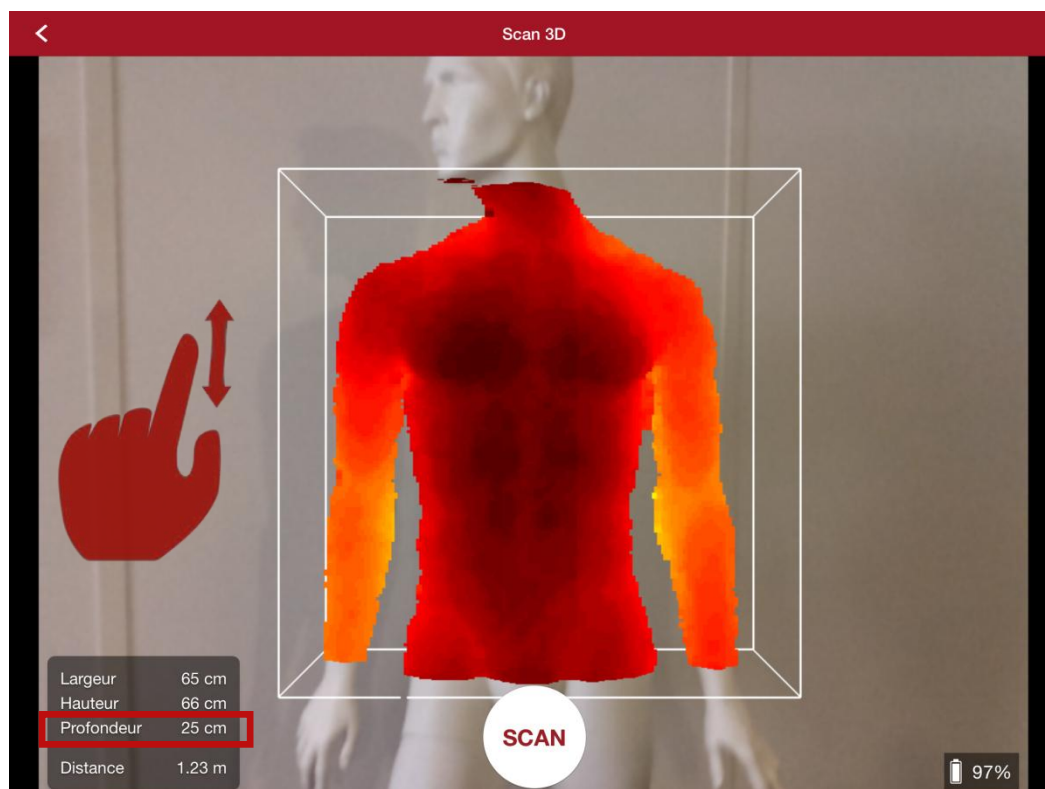

Glissez de haut en bas sur la gauche de votre écran pour modifier la profondeur de la boîte (la distance est aussi modifiée car la position du centre de la boîte est modifiée)


Conseil: La taille et la position de la boîte sont affichées en bas à gauche de l'écran.

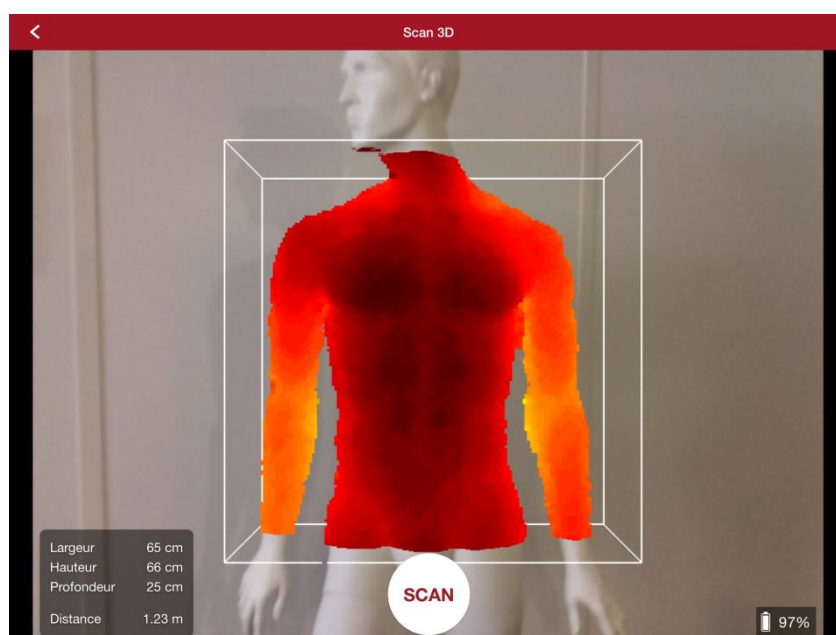

Seule la partie rouge sera scannée

Lorsque la zone sélectionnée convient, cliquez sur "scan" pour commencer à scanner. Tout ce qui n'était pas en rouge avant d'appuyer sur le bouton "scan" ne sera pas scanné.



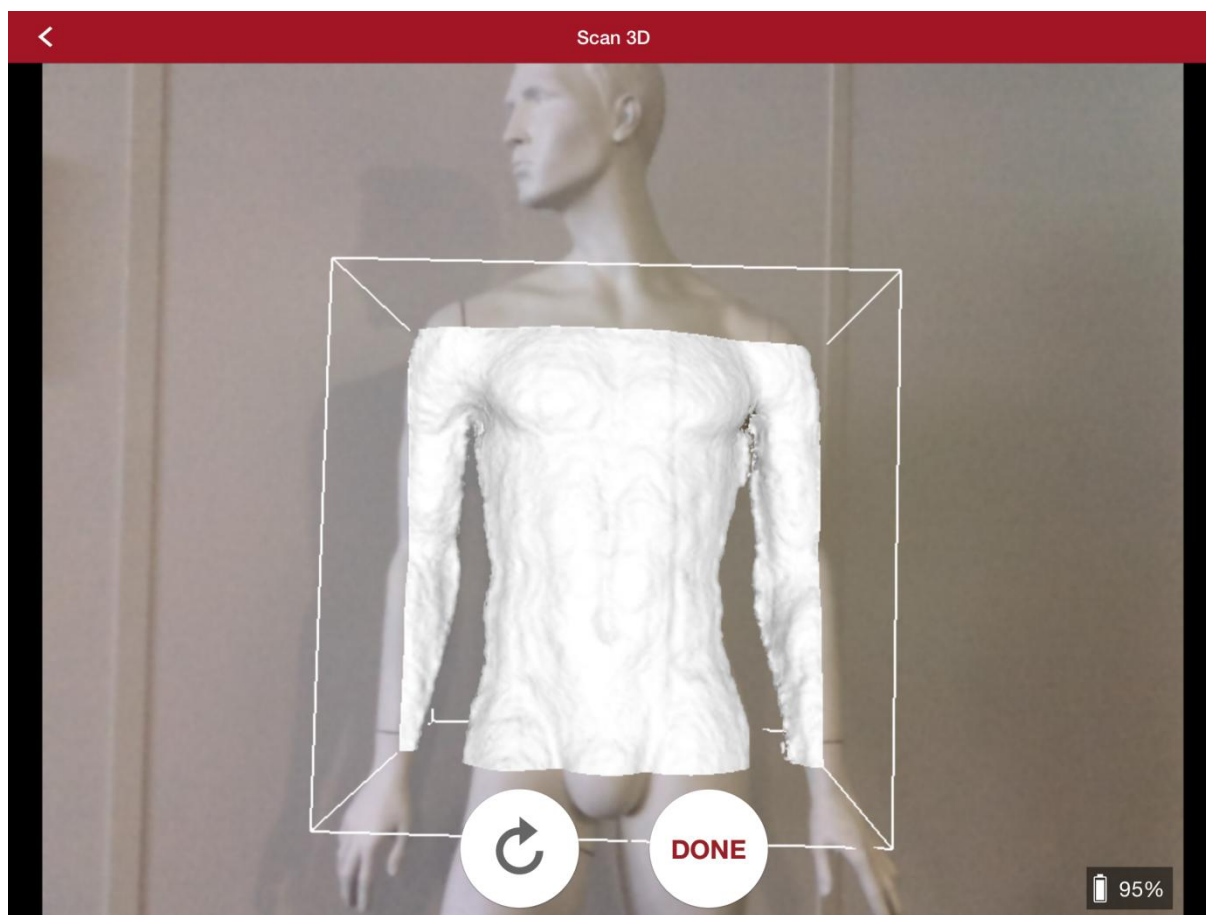

Commencez le scan

Tournez autour du patient pour créer la forme 3D. Approchez vous du patient pour une meilleure précision en respectant les 40cm nécessaires au structure sensor pour scanner.


Conseil : Plus la boîte sera petite, meilleure sera la précision.

La précision du modèle 3D dépend de la taille initiale de la boîte. Plus la boîte sera petite, plus les mesures seront précises. Nous vous conseillons donc d'adapter la boîte au type d'appareillage que vous souhaitez réaliser.



Le structure sensor projette de la lumière infrarouge sur la surface. Pour améliorer les résultats de votre scan :

- Positionnez le structure sensor perpendiculairement au modèle
- Scannez à une faible distance (40cm)

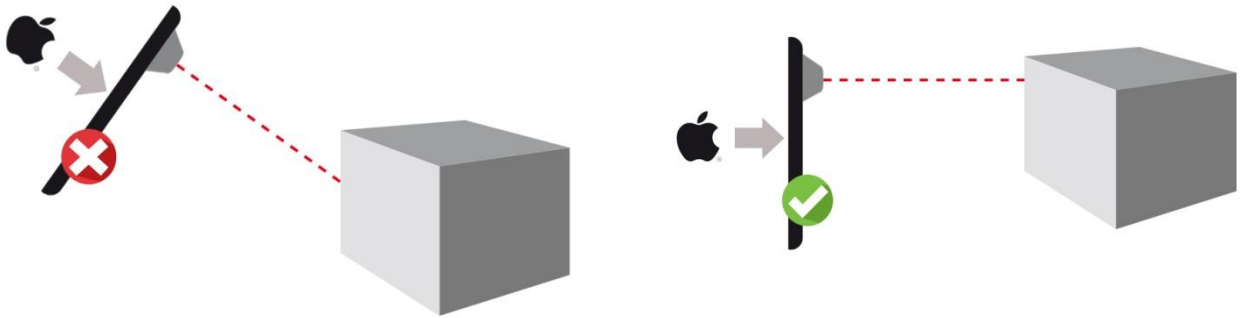


Conseil: Pour optimiser les résultats du scan, positionnez le Structure Sensor perpendiculairement au modèle.



Conseil: Pour optimiser les résultats du scan, positionnez le Structure Sensor à 40cm du modèle.

Cliquez sur “Done” pour terminer le scan.

Le bouton retour en arrière permet de recommencer le scan depuis la définition de la boîte.

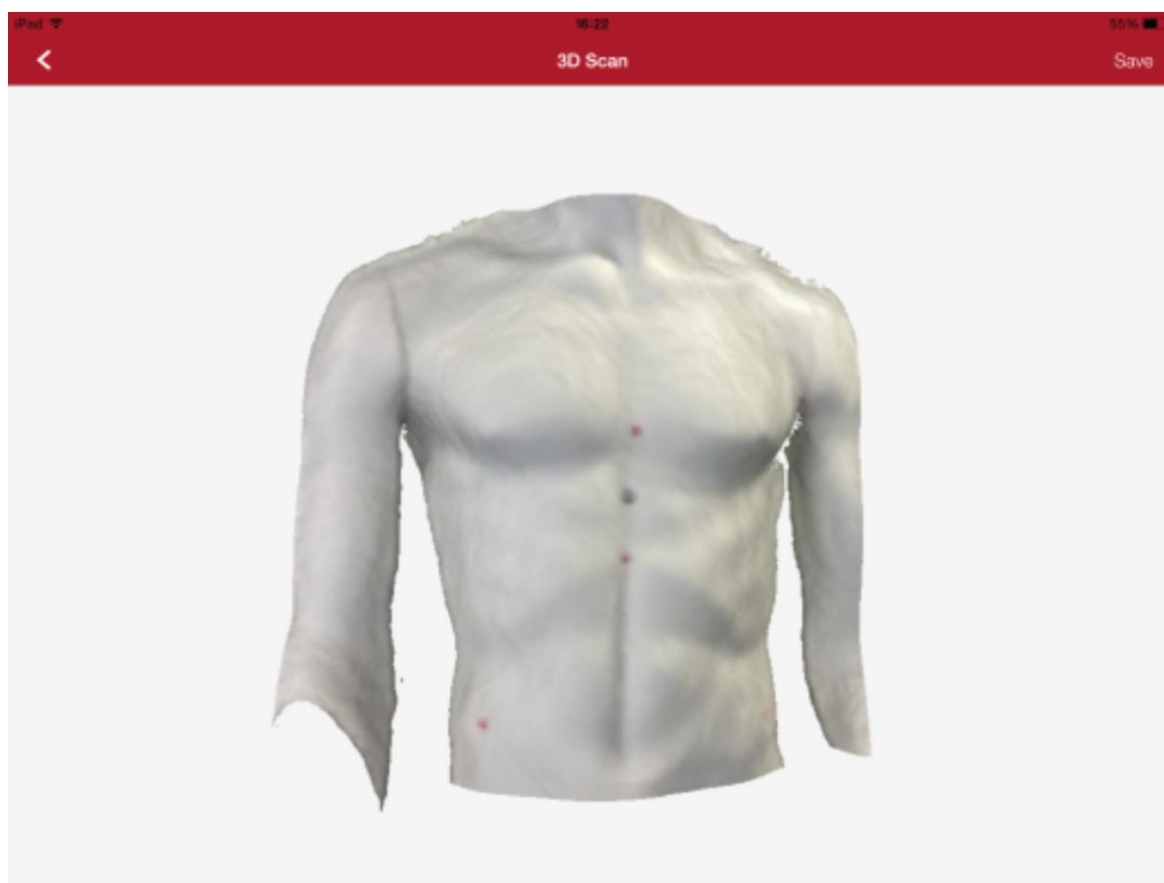


Résultat du scan



Envoyez vos fichiers


Envoyez votre scan par email ou dropbox si nécessaire.

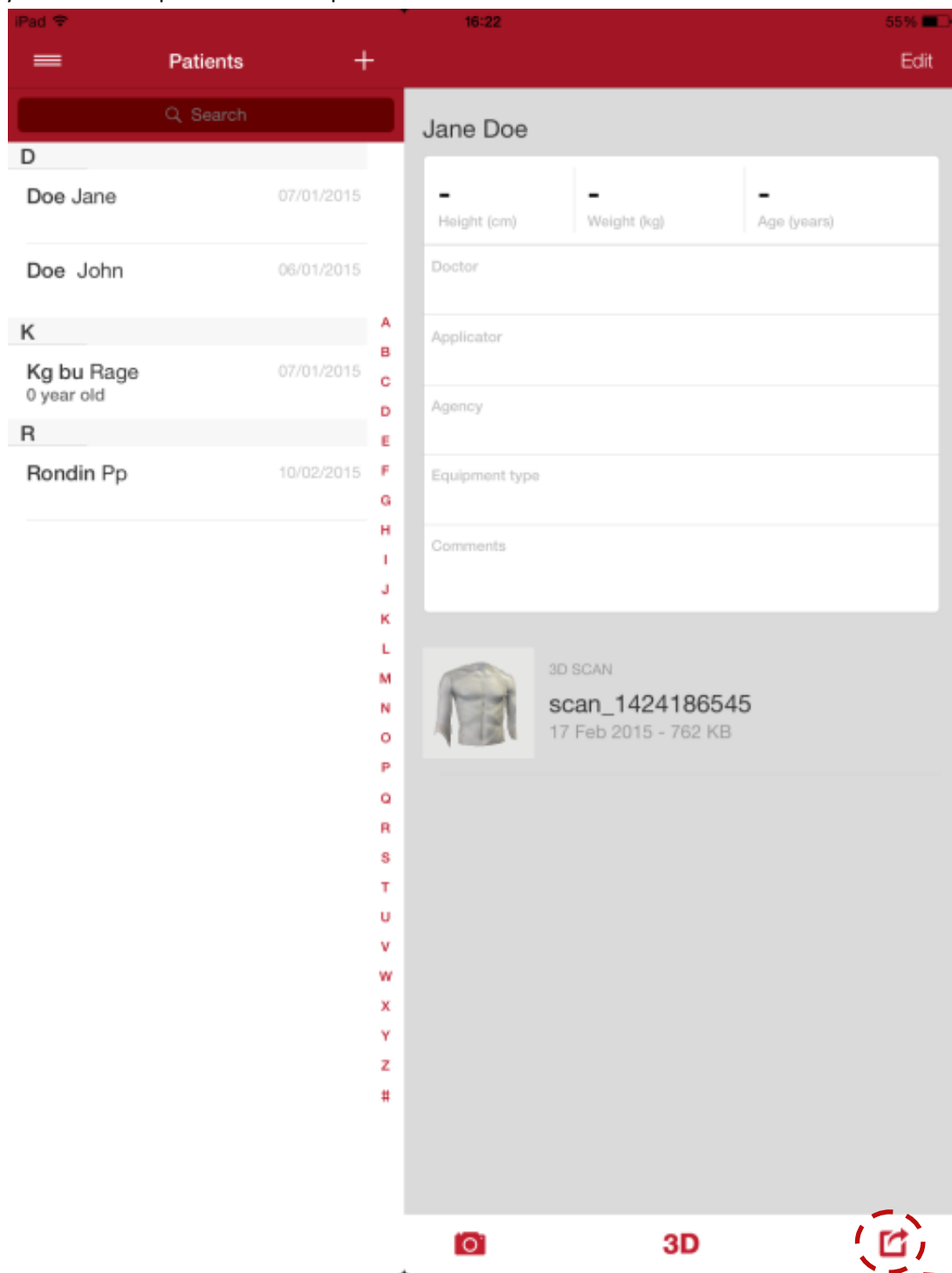

Envoyez vos fichiers

Sélectionnez les fichiers que vous voulez inclure dans votre fichier captevia.



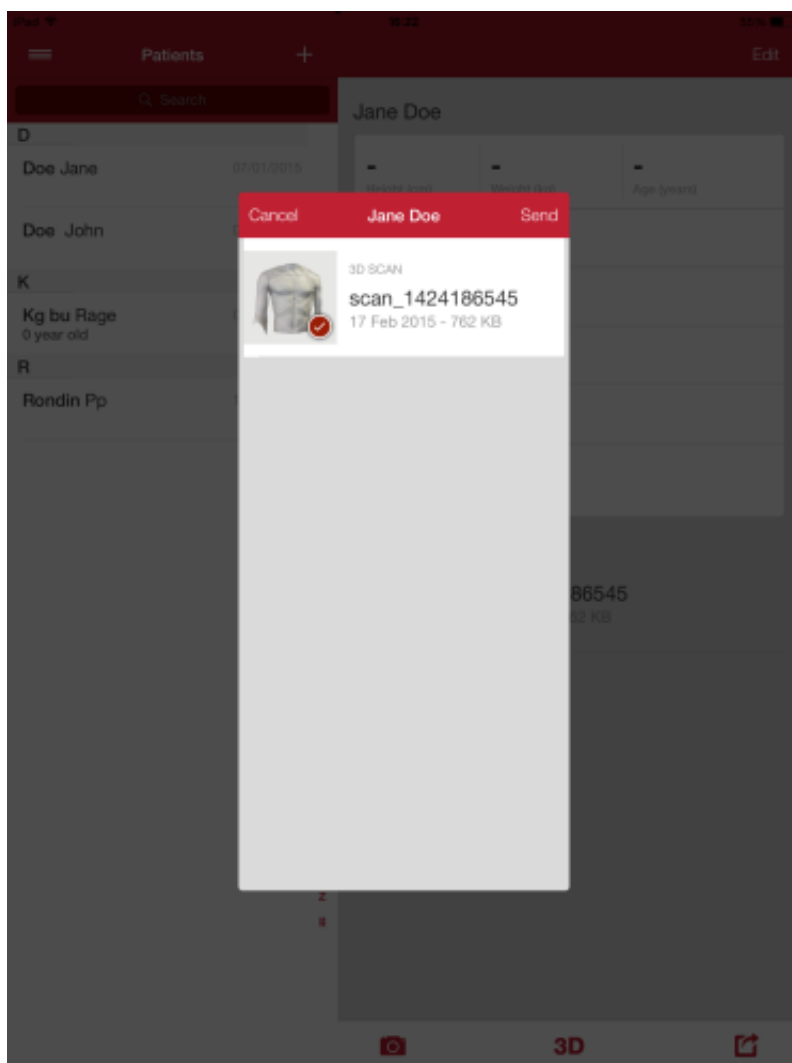

Sélectionnez les fichiers

Ouvrez le fichier dans **RODIN4D neo**
GLOBAL CAD/CAM FOR P&O

Téléchargez le fichier captevia et double cliquez sur l'icône.




Double clic sur le fichier



Rodin4D Neo se lance et ouvre une fenêtre d'aperçu de votre fichier.

Il vous est aussi possible d'ouvrir votre fichier Captevia directement depuis l'interface Rodin (Menu Fichiers ->Ouvrir) à partir de la version 10.0.85.

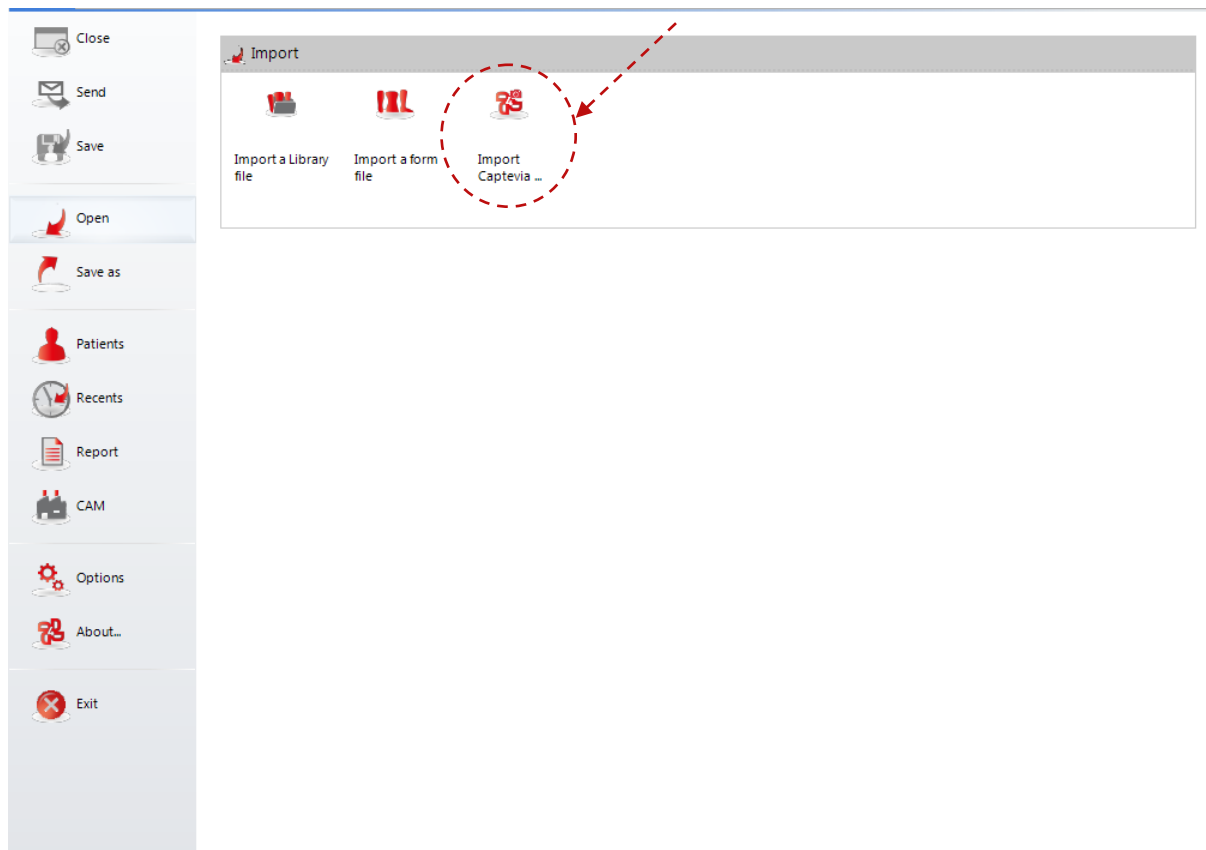

Open your Captevia file directly from Rodin Neo


Vous pouvez créer un nouveau patient, ou copier le fichier dans un dossier patient existant. Lorsque votre choix est fait, fermez la fenêtre et retrouvez le patient dans le gestionnaire de patients.





Le contenu du fichier Captevia apparaît


Dans le gestionnaire de patient, vous pouvez extraire les données contenues dans votre fichier captevia. Sélectionnez le scan souhaité dans la liste Vue 3D, et utilisez le bouton “Extraire le Scan”.

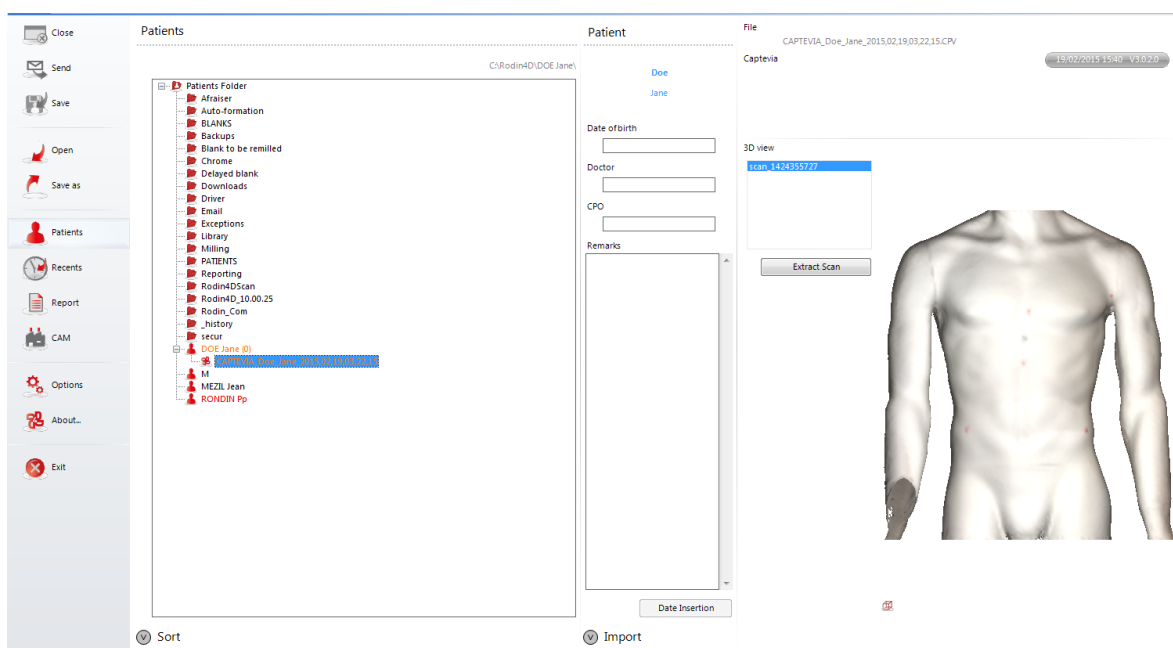

Le fichier apparaît dans votre gestionnaire de patients

Le scan apparaît dans le dossier patient. Vous pouvez créer une forme rodin avec le bouton “Créer une forme” ou nettoyer le fichier. Pour cela, cliquez sur “Nettoyage”.




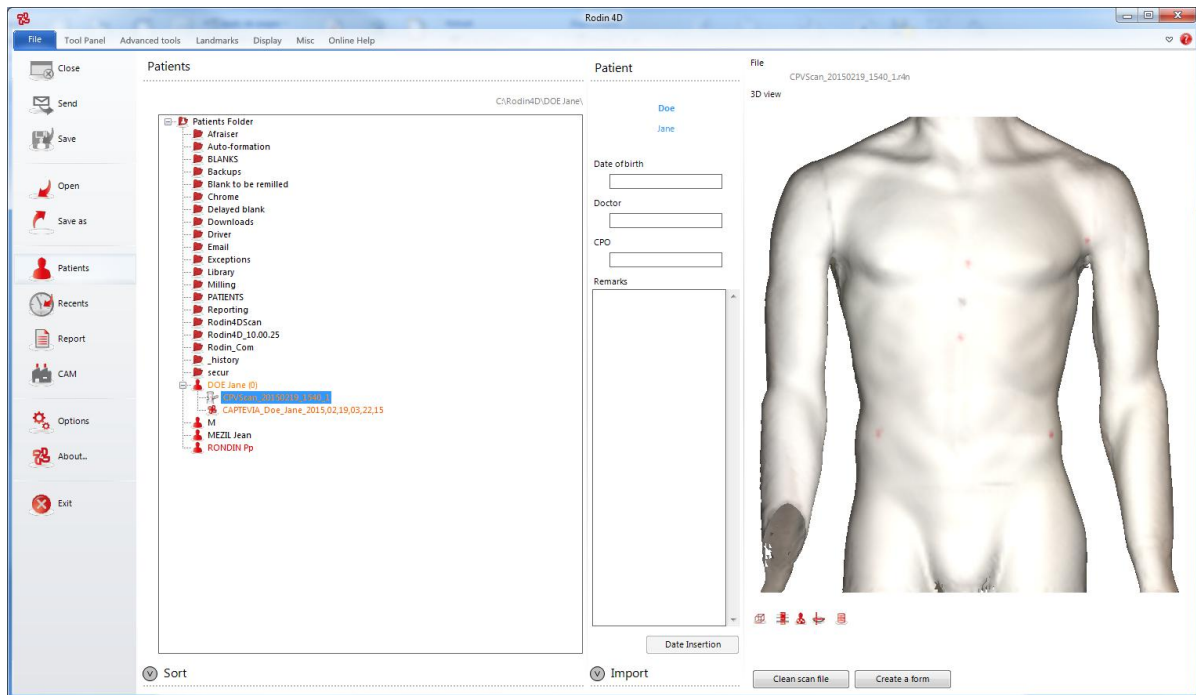

Extraire le scan dans le dossier patient


Une fenêtre de nettoyage apparaît. Suivez les étapes et cliquez sur valider.



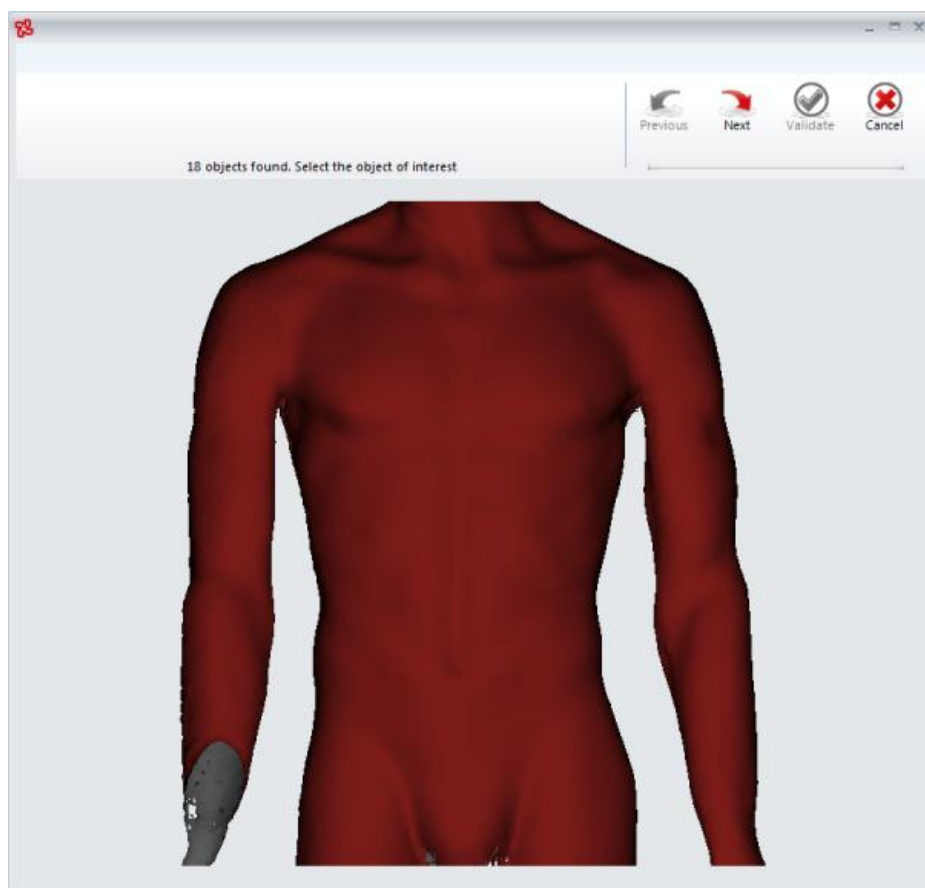

Suivez les étapes de l'assistant de nettoyage.


Vous pouvez remplacer le fichier courant ou créer un nouveau fichier. Pour cela, vous devez choisir le nom du nouveau fichier.

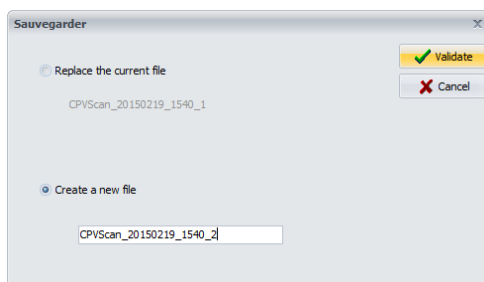

Pour créer un nouveau fichier, entrez le nom de celui-ci

Lorsque l'étape de nettoyage est terminée, vous pouvez créer votre forme rodin avec le bouton "Créer une forme".



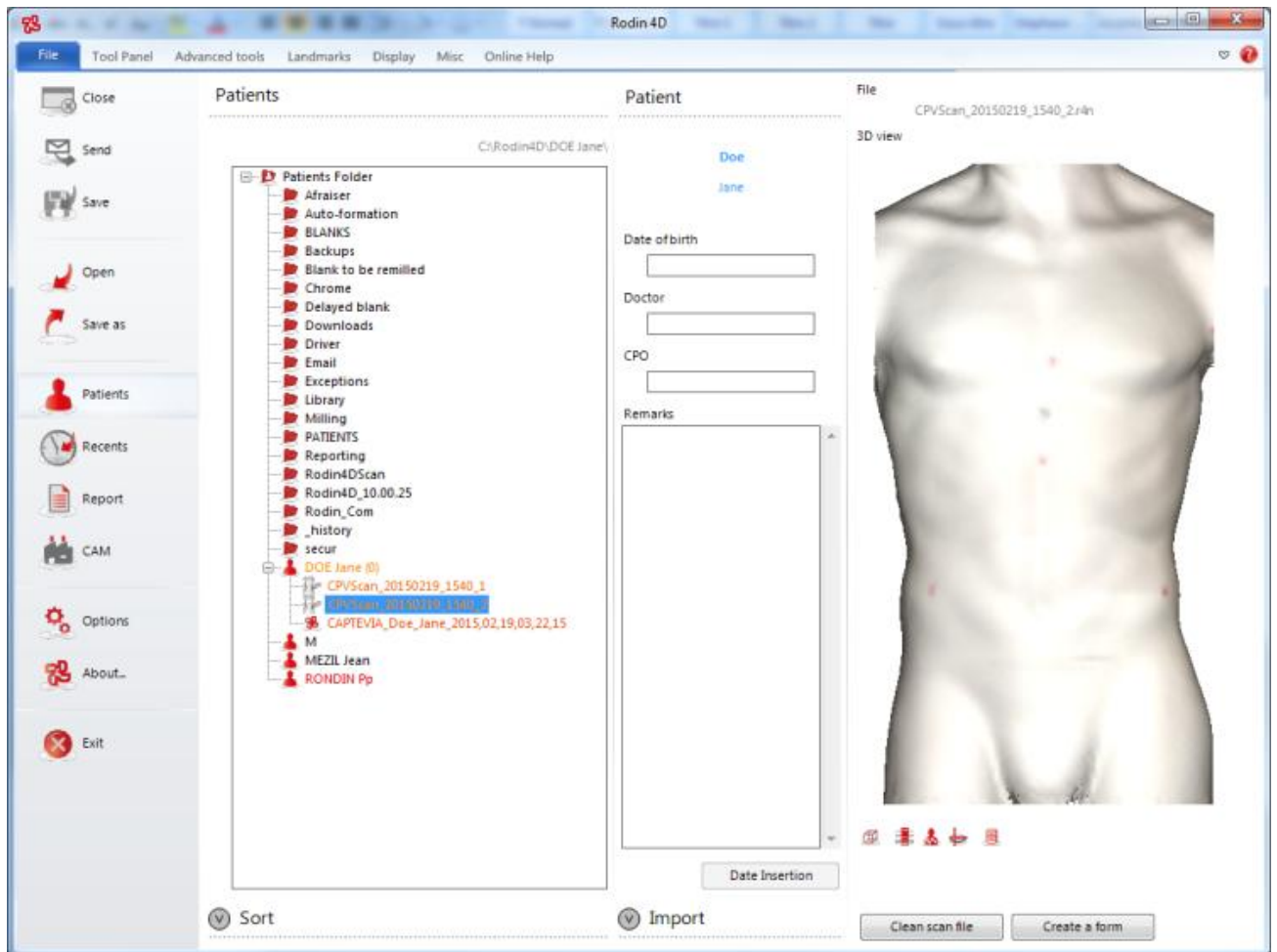

Créez la forme rodin

Vous êtes maintenant prêt à designer votre appareillage!




Español

¿Qué son Structure Sensor y Captevia?

Structure Sensor es un escáner 3D que ofrece una solución de adquisición en 3D portátil.

Para utilizarlo, descárguese la aplicación Captevia V3 (o posterior) de Apple Store.

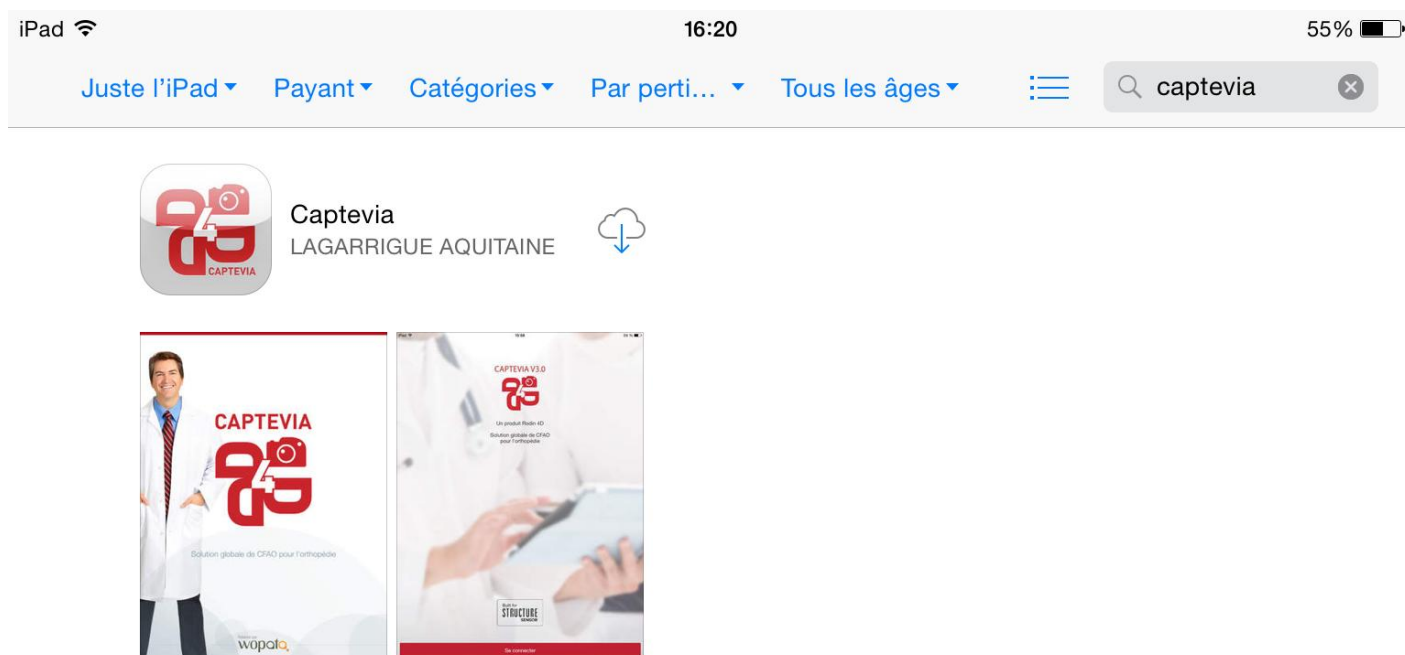

Descargue Captevia V3 de la tienda Apple Store

Compatibilidad: Requiere iOS 7 o posterior.

Suscribirse a Captevia

Antes de nada tiene que crear una cuenta Captevia. Para ello, abra la aplicación y rellene el formulario; indique una dirección de correo electrónico válida.

Su iPad debe estar configurado para enviar mensajes de correo electrónico. Si desea usar la función de envío por Dropbox, solo tiene que descargarse la aplicación Dropbox y crear una cuenta en ella.



Crear un paciente

Para crear un paciente, pulse el botón “+”. Indique los datos pertinentes y termine el proceso de creación.


The screenshot shows the 'Add a patient' form in the Captevia app. The form is overlaid on a 'Patients' list. The form fields include: SURNAME, FIRST NAME, DATE OF BIRTH, HEIGHT (cm), WEIGHT (kg), DOCTOR, APPLICATOR, AGENCY, EQUIPMENT TYPE, and COMMENTS. The 'Add a patient' dialog has 'Cancel', 'Add a patient', and 'Save' buttons at the top. The background shows a list of patients: Doe Jane, Doe John, Kg bu Rage 0 year old, and Rondin Pp. A keyboard is visible at the bottom.

Cree un paciente.



Escanear al paciente


Para escanear al paciente, sírvase del botón "3D".

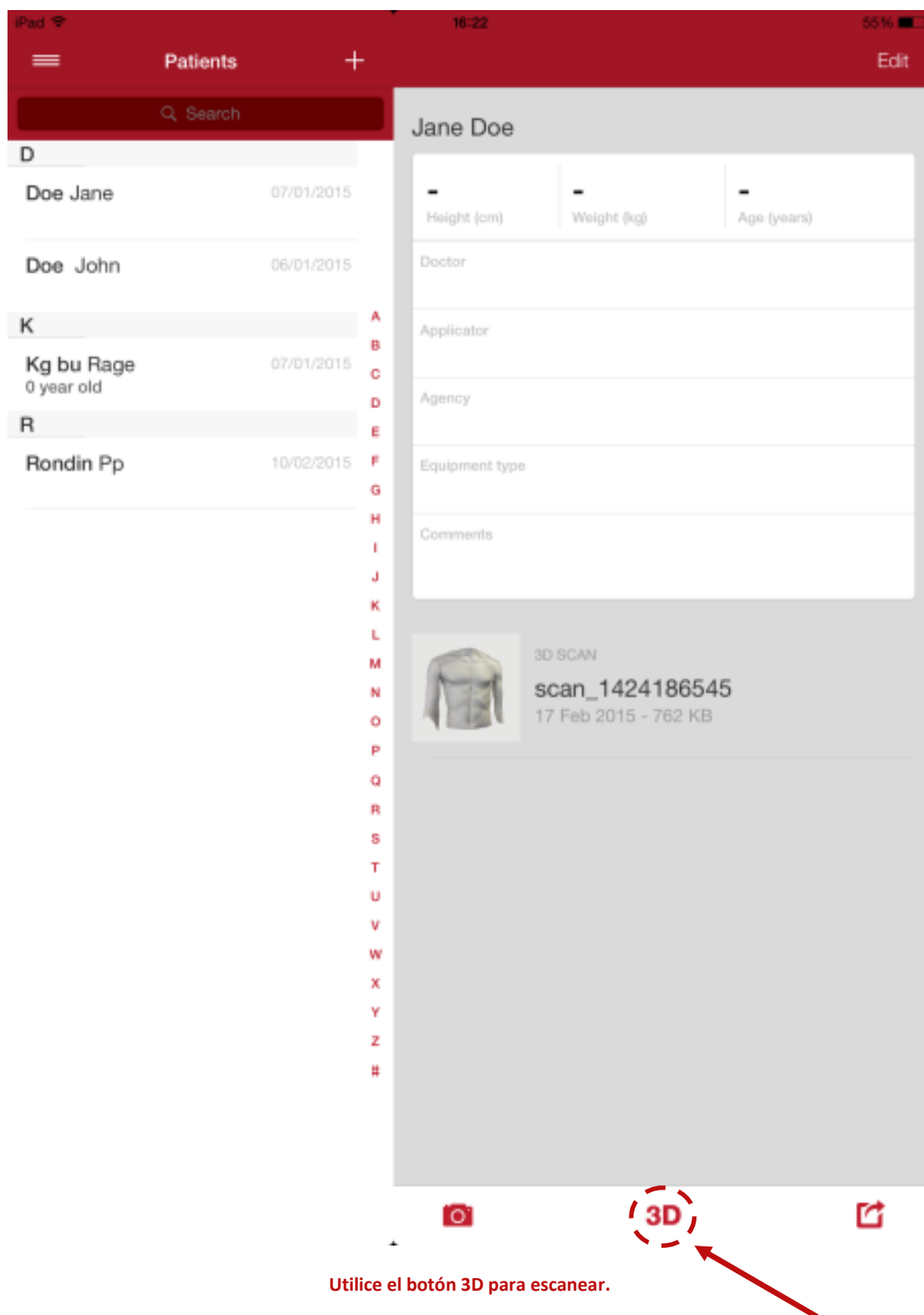


Amplíe o reduzca el cuadro para seleccionar la zona que desee escanear. La parte seleccionada aparecerá en rojo.



Para modificar el tamaño y la posición del cuadro, realice las siguientes acciones:

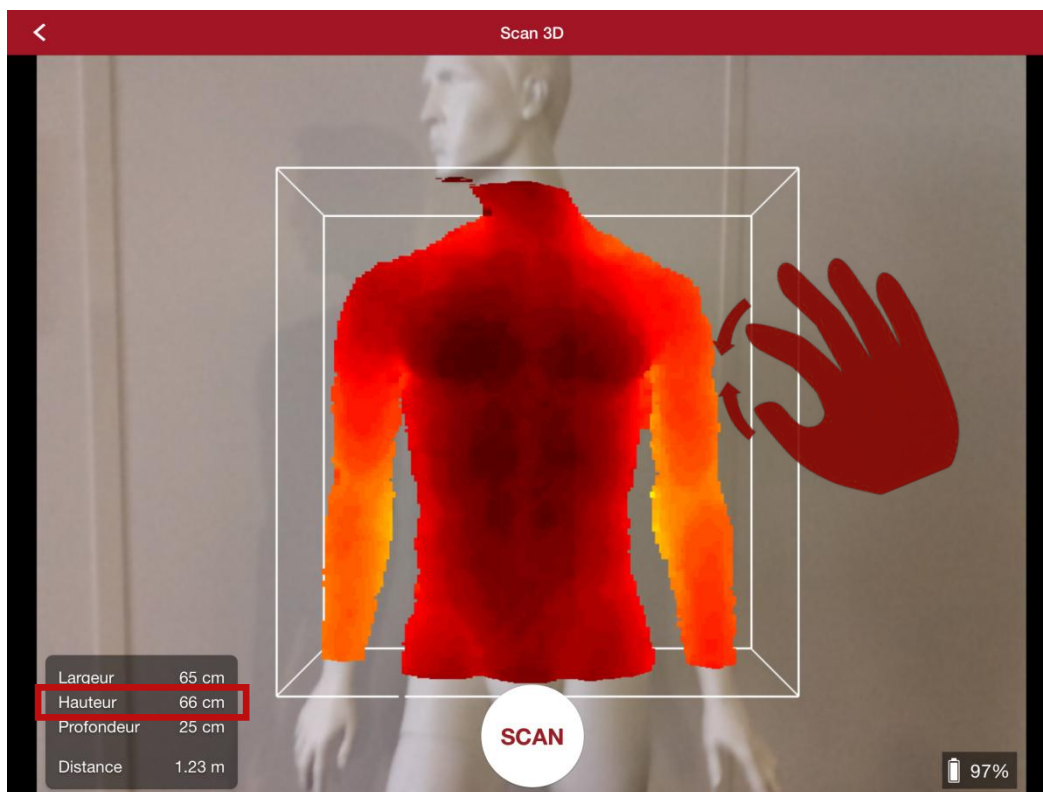


Ampliación-reducción en vertical para modificar la altura del cuadro.

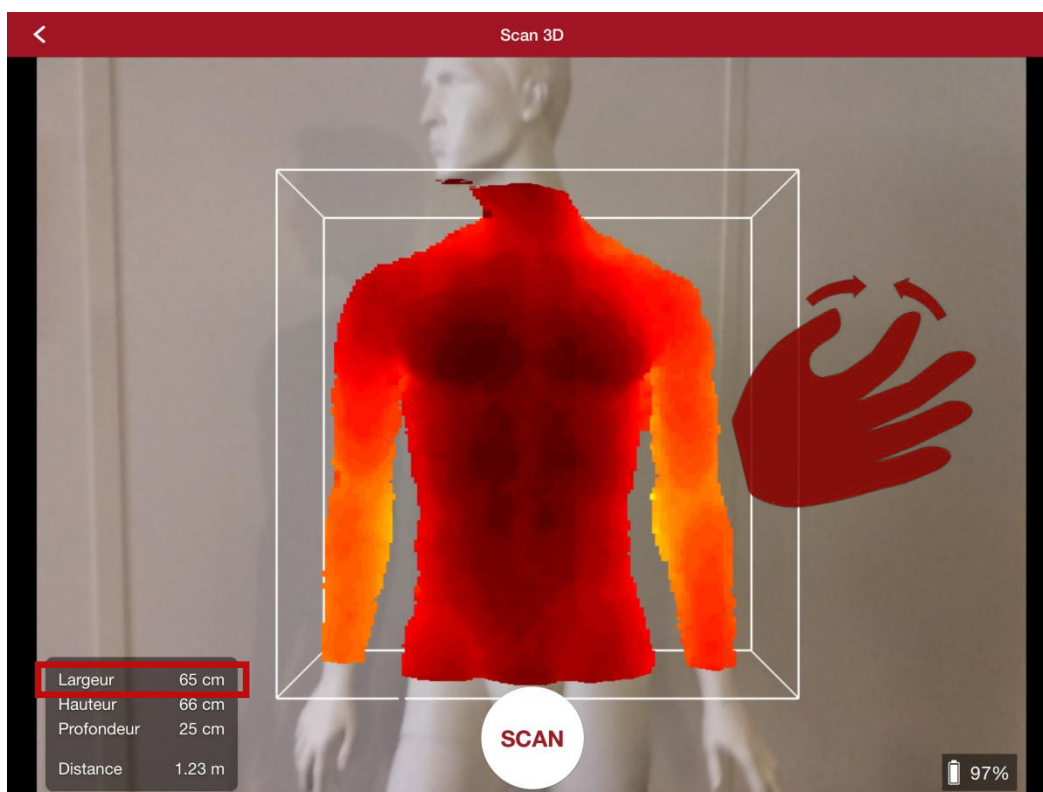


Ampliación-reducción en horizontal para modificar la anchura del cuadro.




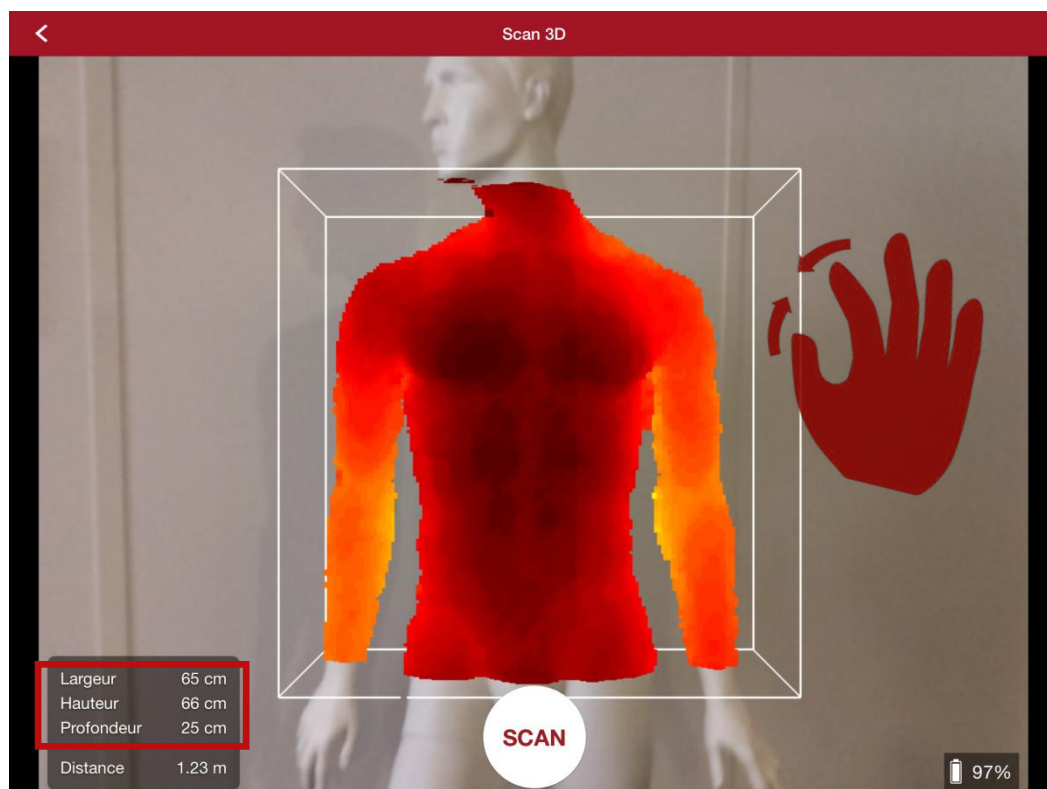

Ampliación-reducción en diagonal para modificar las tres dimensiones del cuadro.

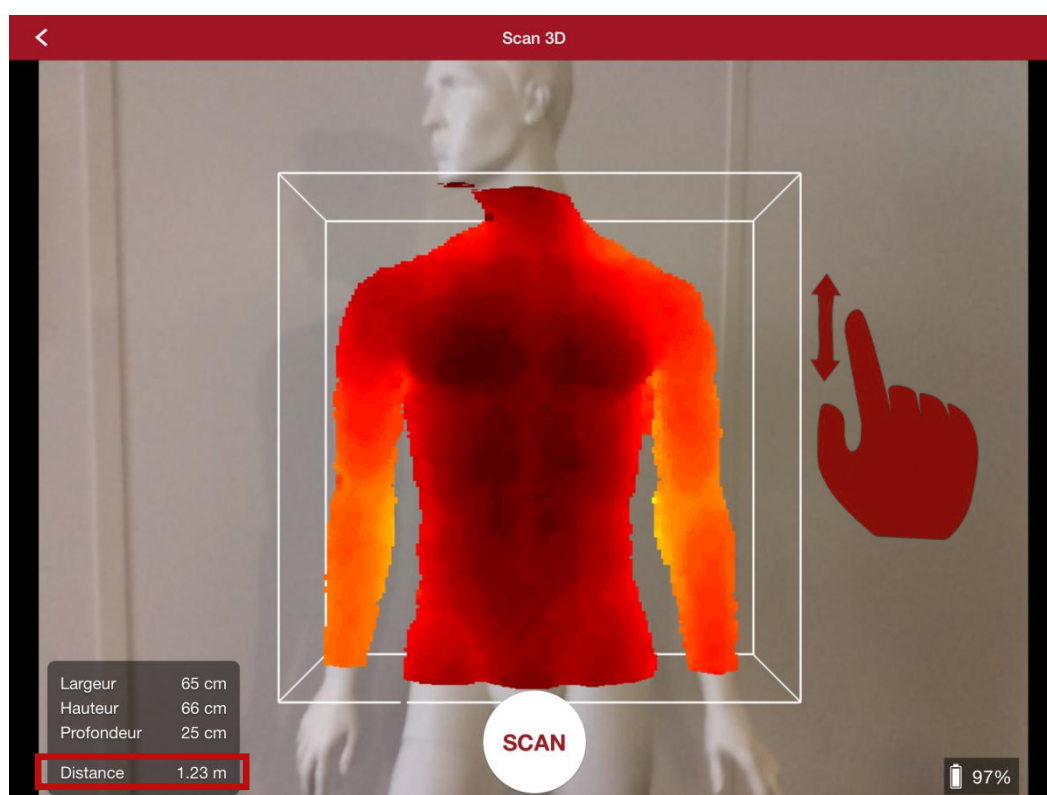


Deslizamiento de arriba a abajo en la partederecha de la pantalla para modificar la posición del cuadro (distancia entre el sensor y el centro del cuadro).

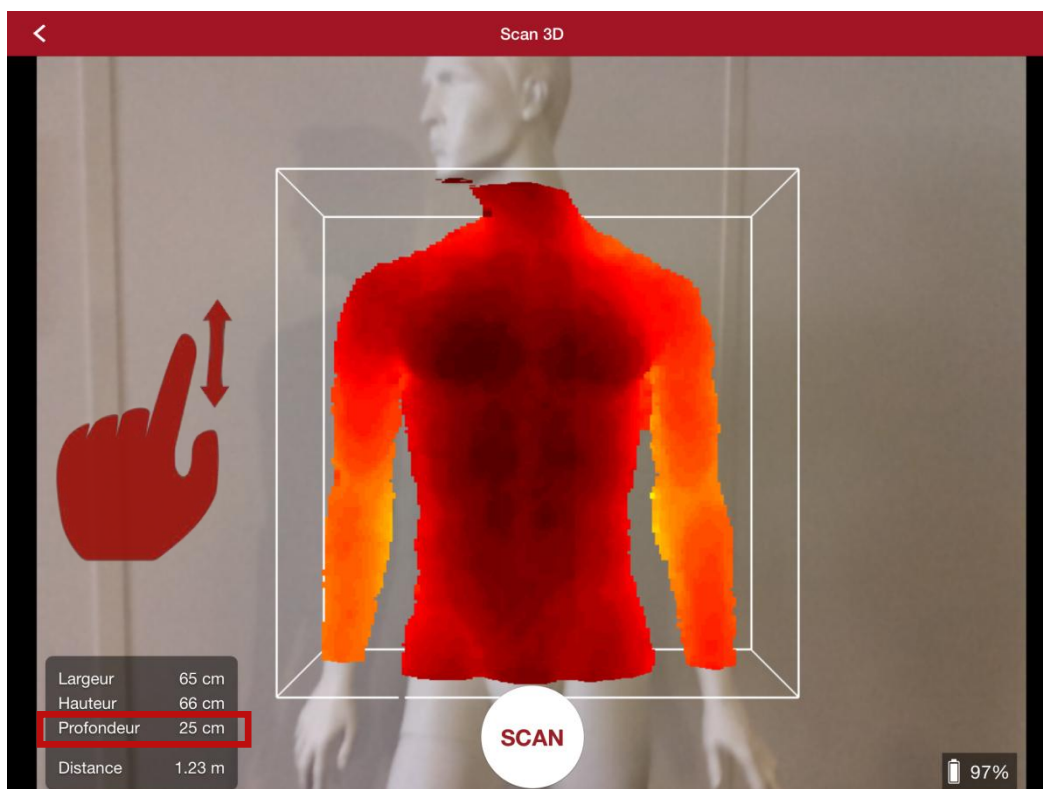

Deslizamiento de arriba a abajo en la parte izquierda de la pantalla para modificar la profundidad del cuadro (al modificarse la posición del centro del cuadro, la distancia también cambia).


Nota: El tamaño y la posición del cuadro aparecen en la parte inferior izquierda de la pantalla.

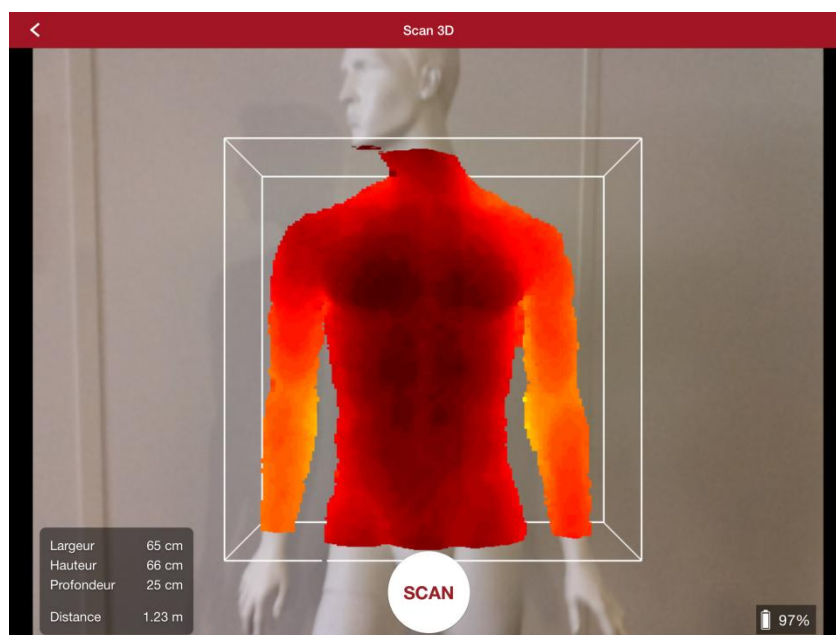

Solo se escanea la parte roja.



Cuando la zona seleccionada sea la adecuada, pulse "Scan" para comenzar el proceso de escaneado. No se escaneará nada que no estuviera en rojo antes de pulsar el botón "Scan".

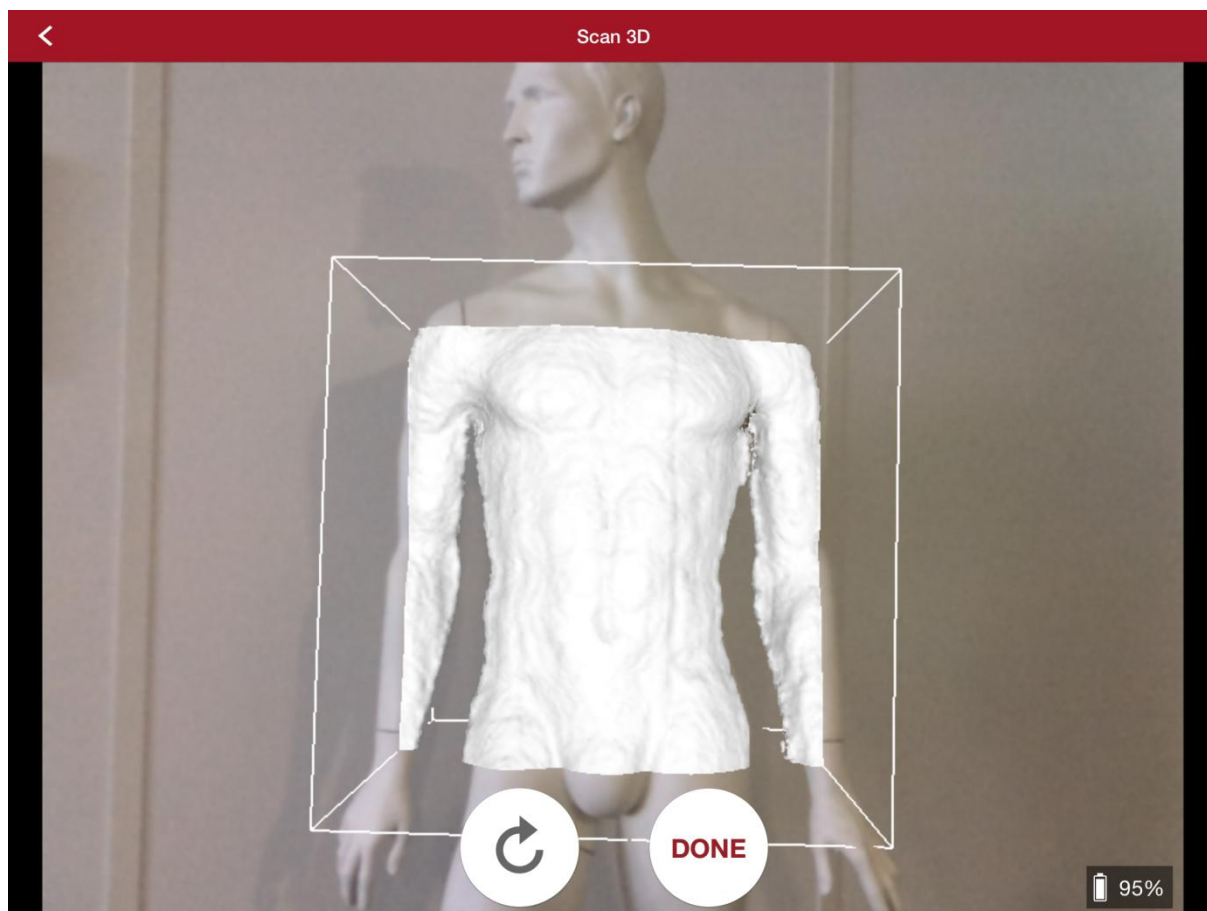

Comience el escaneado.

Gire alrededor del paciente para crear la forma 3D. Acérquese al paciente para mejorar la precisión, respetando siempre la distancia de 40 cm a Structure Sensor necesaria para el escaneado.


Nota: Cuanto más pequeño sea el cuadro, mayor será la precisión.

La precisión del modelo 3D depende del tamaño inicial del cuadro. Cuanto más pequeño sea el cuadro, más precisas serán las mediciones. Por lo tanto, le recomendamos que adapte el cuadro al tipo de aparato que desee realizar.



Structure Sensor proyecta la luz infrarroja sobre la superficie. Para mejorar los resultados del escaneado:

- Coloque Structure Sensor en posición perpendicular al modelo.
- Escanee a una distancia corta (40 cm).

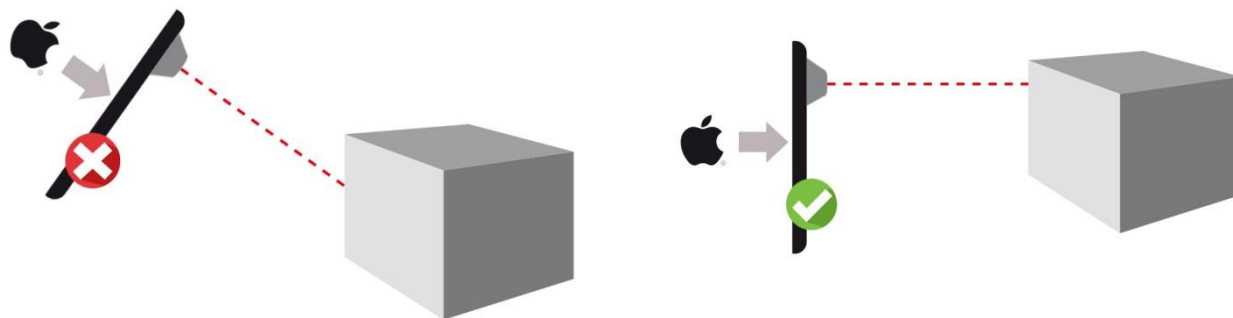

Nota: Para unos resultados de escaneado óptimos, coloque Structure Sensor en posición perpendicular al modelo.




Nota: Para unos resultados de escaneado óptimos, coloque Structure Sensor a una distancia de 40 cm del modelo.

Pulse "Done" para terminar el escaneado.

El botón Volver permite empezar el escaneado de nuevo a partir de la definición del cuadro.



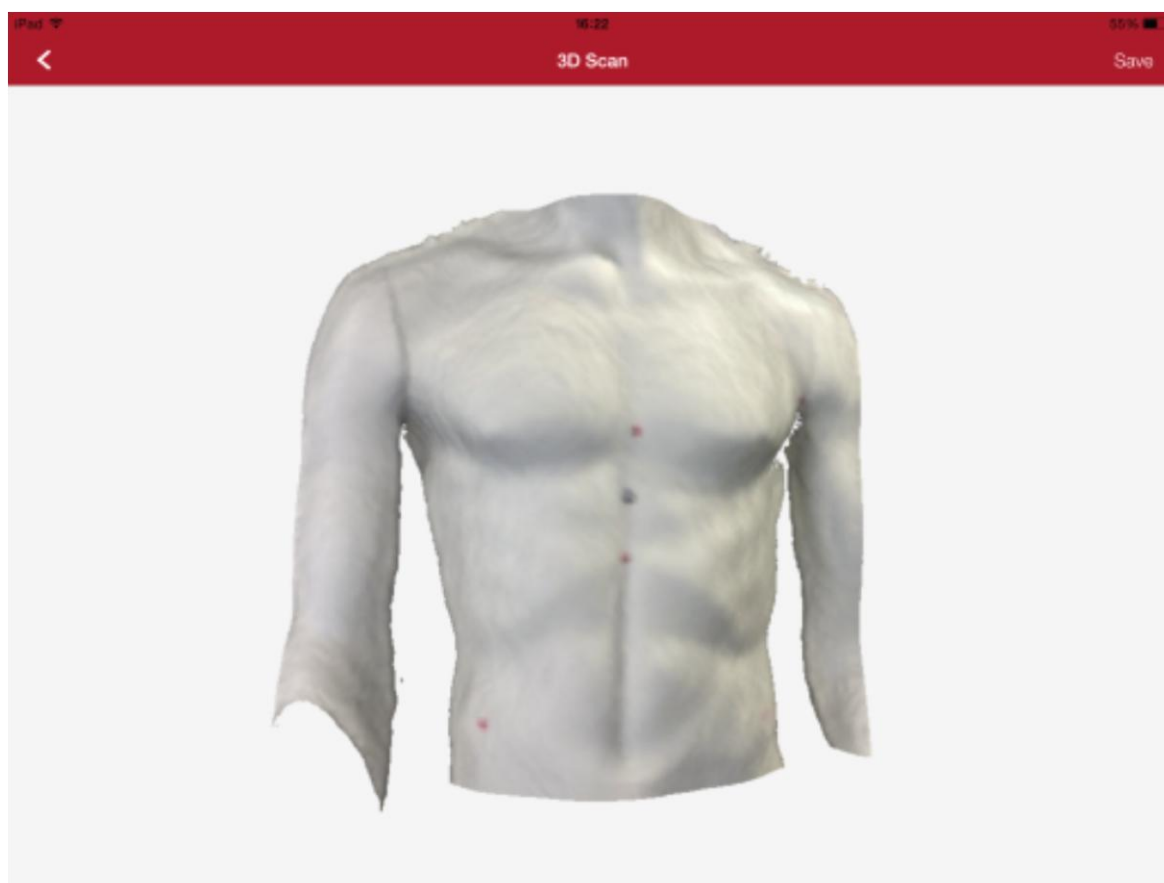


Resultado del escaneado.



Enviar los archivos


Envíe el escáner por correo electrónico o a través de Dropbox, si es necesario.

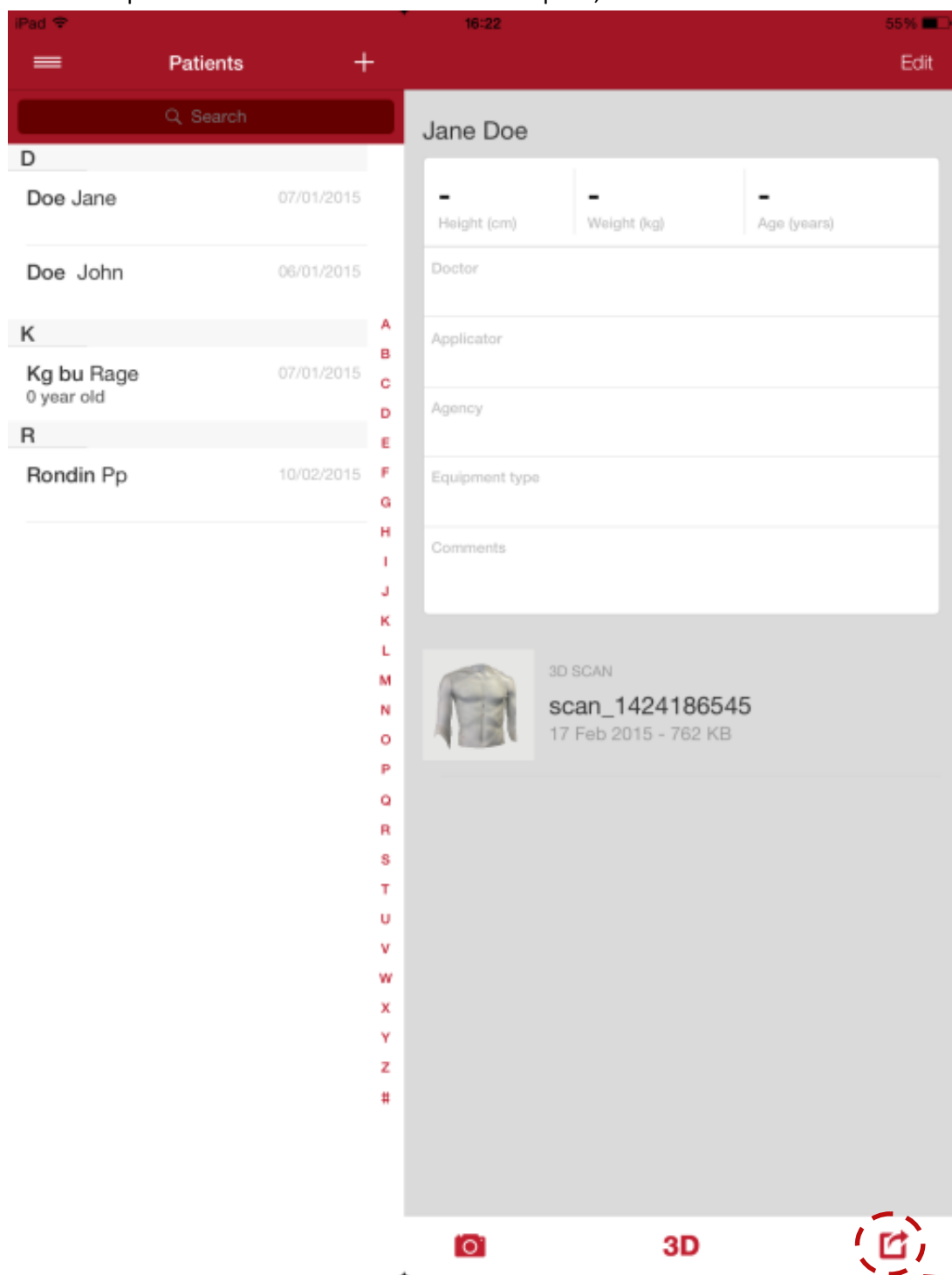

Envíe los archivos.

Seleccione los archivos que desee incluir en el archivo Captevia.



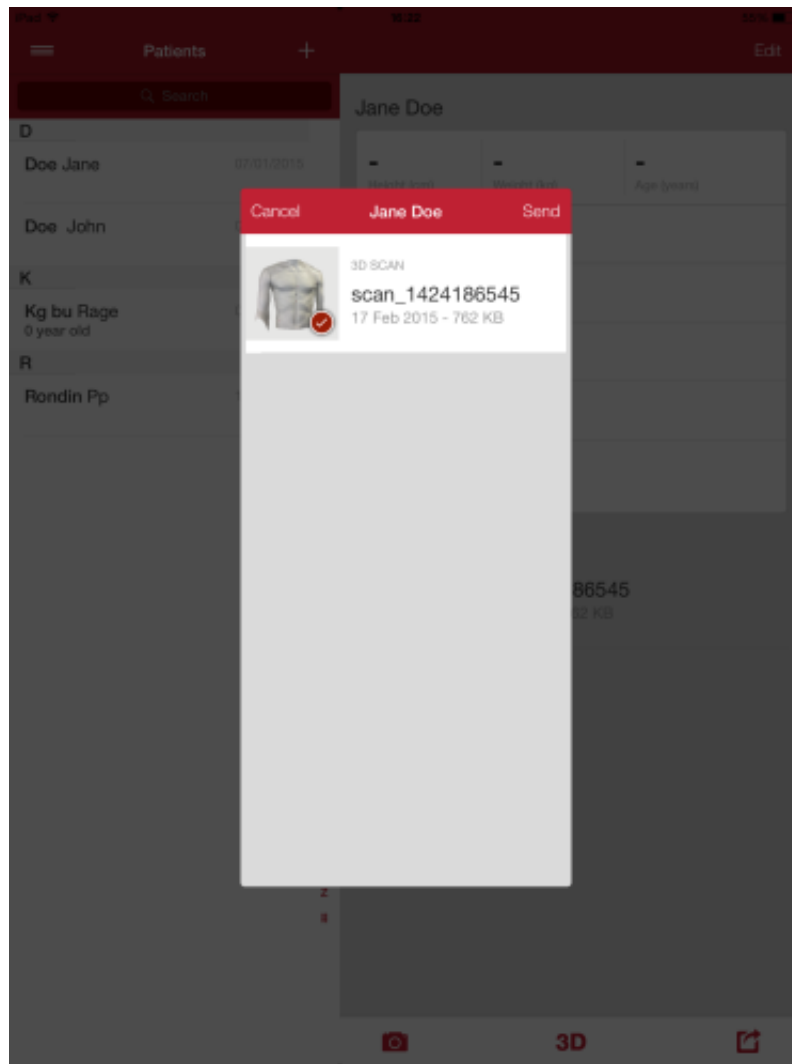

Seleccione los archivos.

Abrir el archivo en **RODIN4D neo**

GLOBAL CAD/CAM FOR P&O

Descargue el archivo Captevia y pulse el icono dos veces.




Pulse el archivo dos veces.



Rodin4D Neo se iniciará y se abrirá una ventana de vista previa del archivo.

También puede abrir el archivo Captevia directamente desde la interfaz de Rodin (menú Archivos -> Abrir), con la versión 10.0.85 o posteriores.

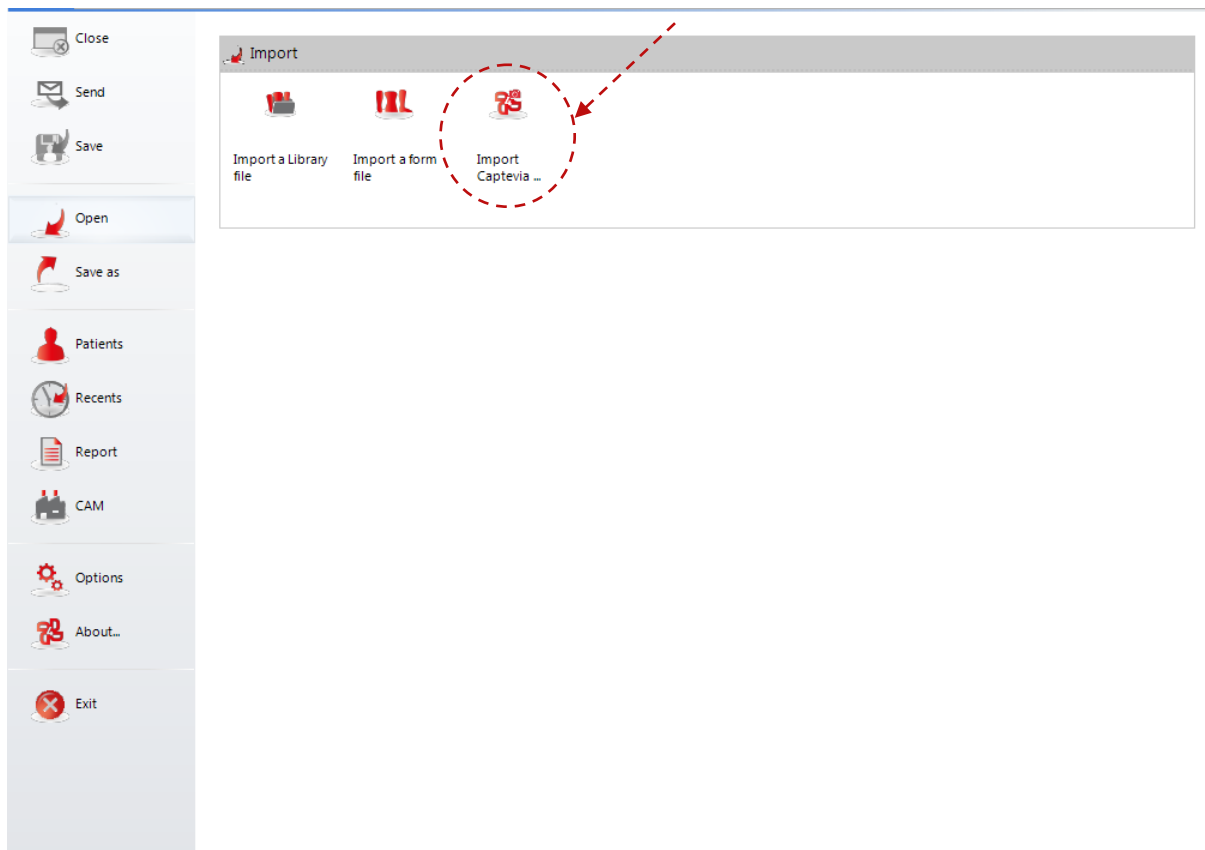

Abra el archivo Captevia directamente desde Rodin Neo.


Puede crear un paciente nuevo o copiar el archivo en una carpeta de paciente existente. Cuando haya terminado, cierre la ventana y busque al paciente en el gestor de pacientes.





Aparecerá el contenido del archivo Captevia.


Puede extraer los datos del archivo Captevia al gestor de pacientes. Seleccione el escáner que desee de la lista Vista 3D y pulse el botón "Extraire le Scan".

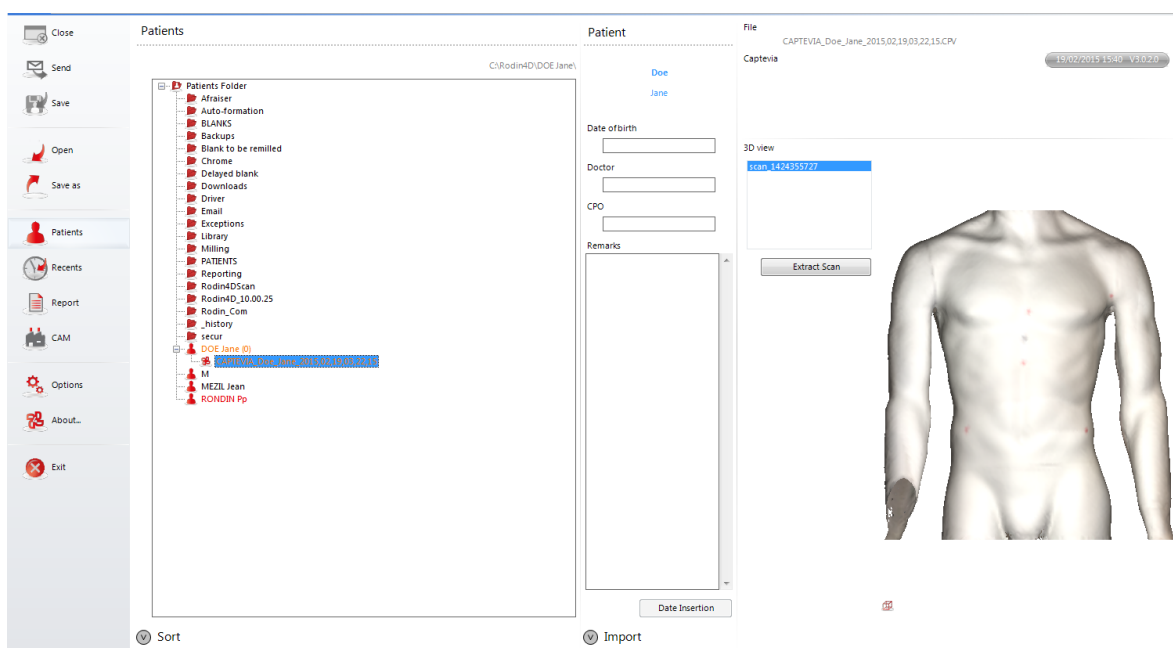

El archivo aparecerá en el gestor de pacientes.

El escáner aparecerá en la carpeta del paciente. Puede crear una forma Rodin con el botón "Cr  er une forme" o limpiar el archivo. Para ello, pulse en el bot  n "Nettoyage".




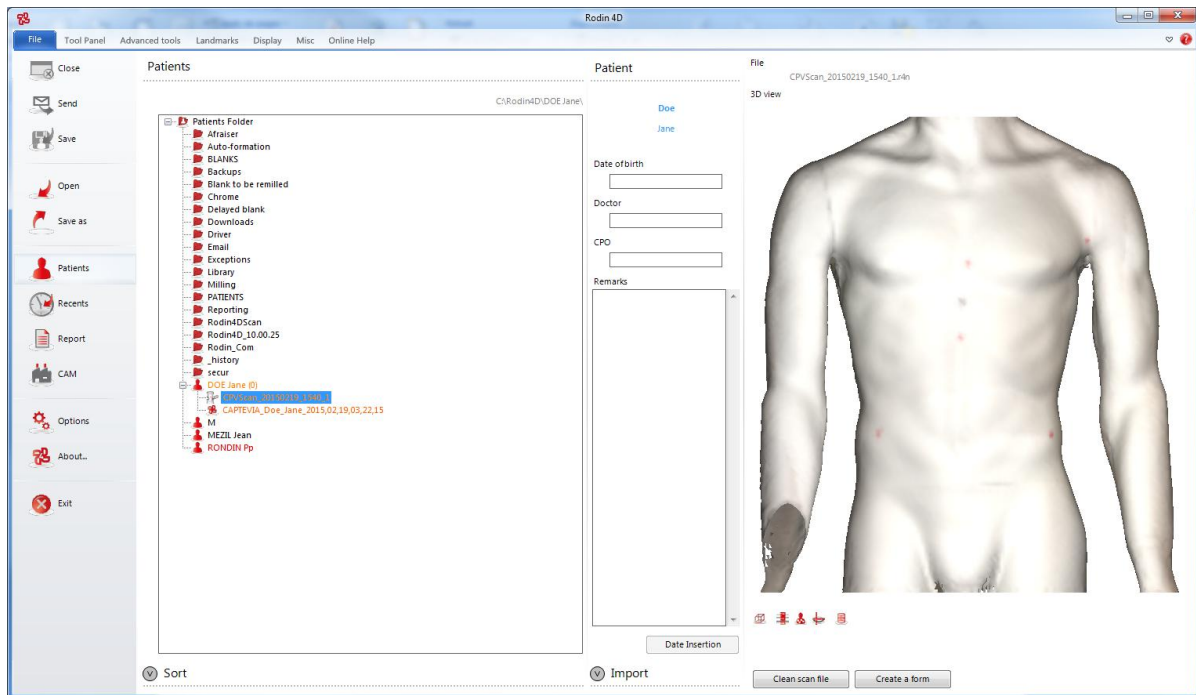

Extraiga el escáner a la carpeta del paciente.


Aparecerá una ventana de limpieza. Siga los pasos indicados y pulse Validar.



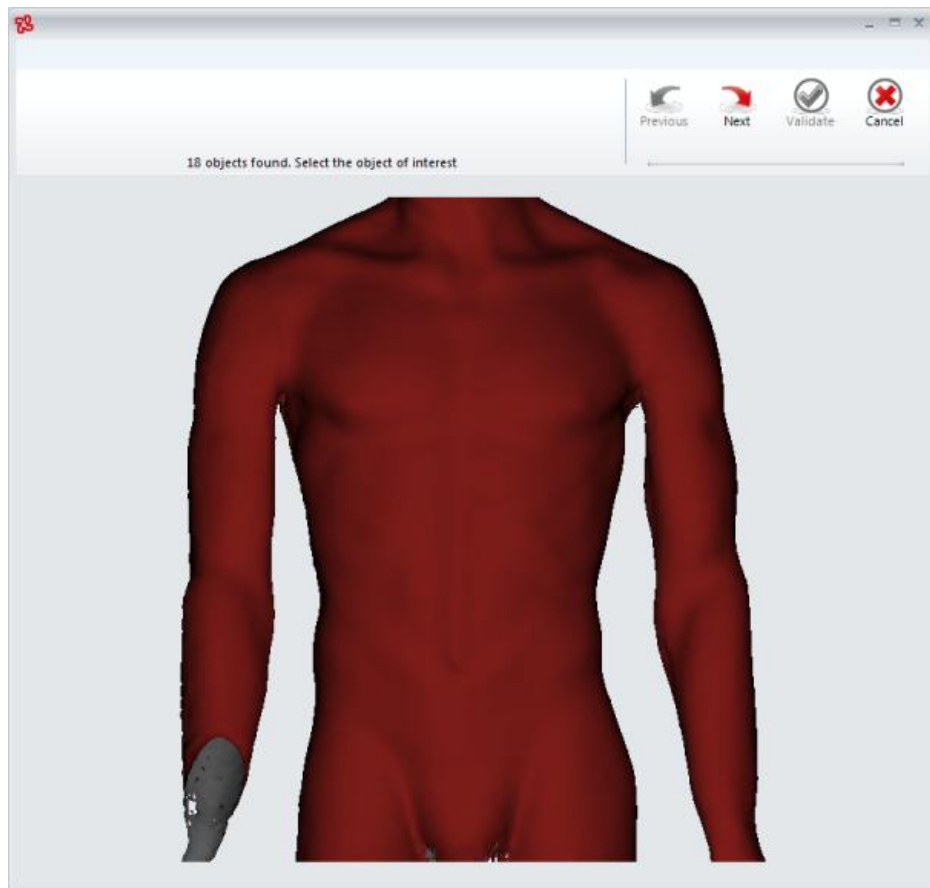

Siga los pasos del asistente de limpieza.


Puede reemplazar el archivo actual o crear uno nuevo. Para ello, elija el nombre del archivo nuevo.

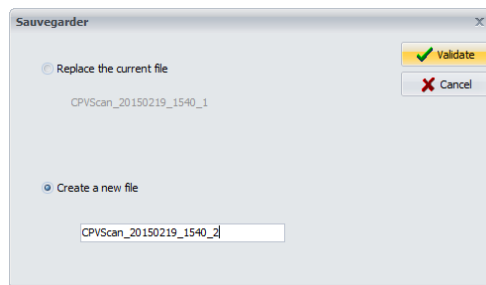

Para crear un archivo nuevo, dele un nombre.

Una vez finalizada la etapa de limpieza, puede crear su forma Rodin con el botón "Cr  er une forme".



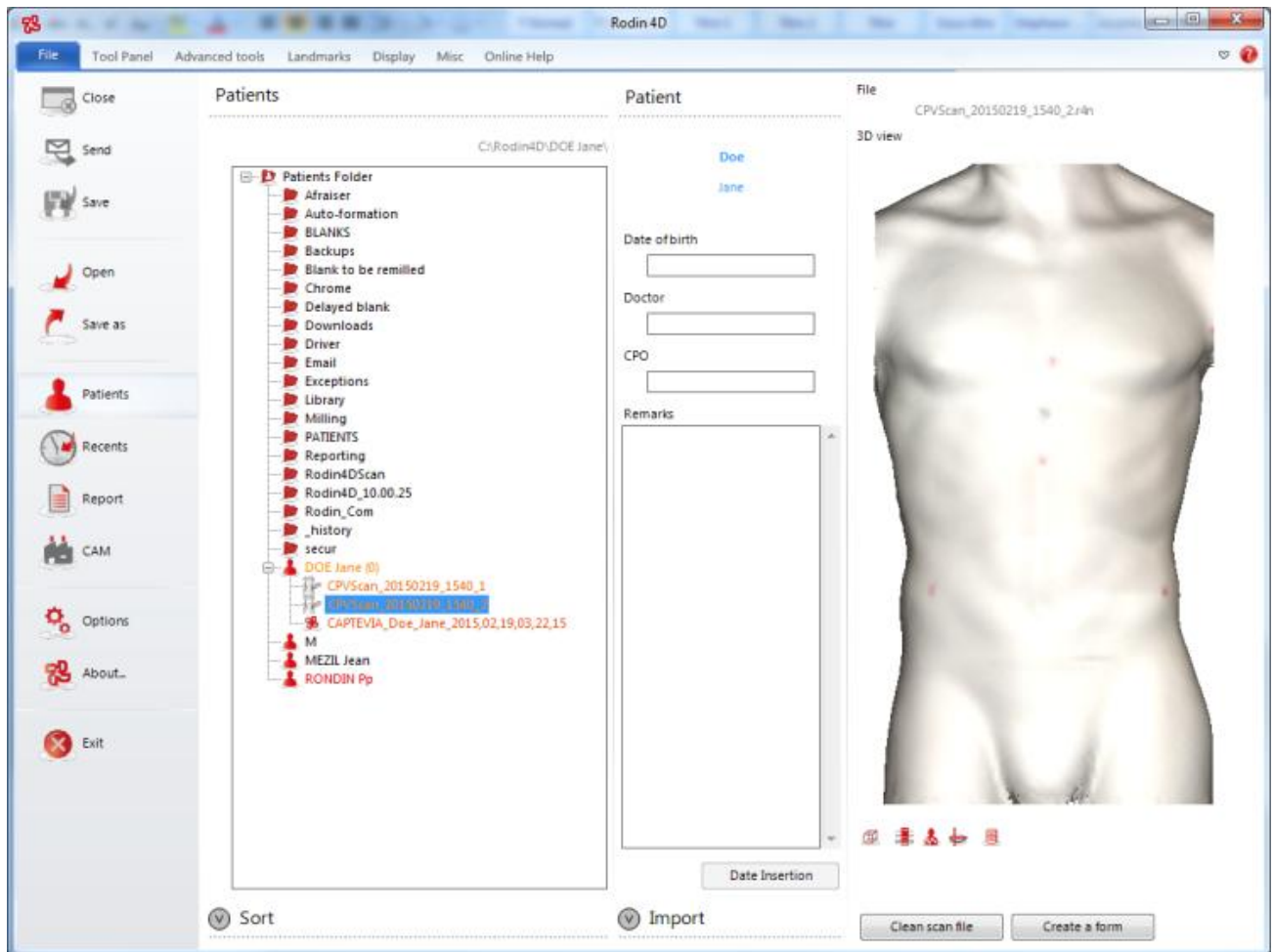

Cree la forma Rodin

Ya está listo para diseñar sus aparatos.




Deutsch

Was sind der Structure-Sensor und Captevia?

Der Structure-Sensor ist ein 3D-Scanner, der eine tragbare Lösung zum 3D-Digitalisieren bietet.

Um ihn verwenden zu können, müssen Sie zunächst die App Captevia V3 (oder später) aus dem Apple Store herunterladen.

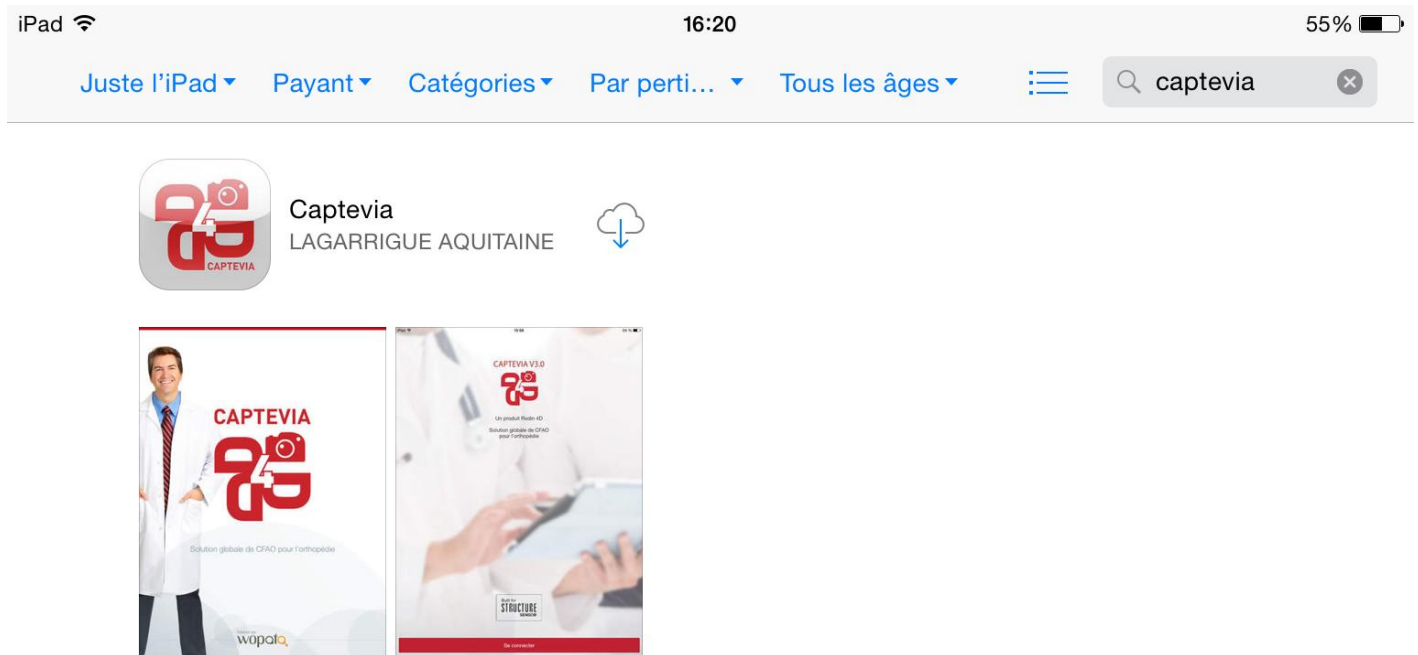

Laden Sie die Captevia V3.1-App aus dem Apple Store herunter

Kompatibilität: Es wird iOS 7 oder neuer benötigt.

Captevia abonnieren

Zunächst richten Sie ein Captevia-Konto ein. Dazu öffnen Sie die Anwendung und füllen das Formular mit einer gültigen E-Mail-Adresse aus.

Ihr iPad muss zum Senden von E-Mail konfiguriert sein. Wenn Sie die Möglichkeit einer Sendung über Dropbox nutzen möchten, brauchen Sie nur die Dropbox-App herunterzuladen und ein Konto für die Anwendung einzurichten.



Anlegen eines Patienten

Mit der Schaltfläche "+" legen Sie einen Patienten an. Um den Vorgang fertigzustellen, müssen Sie noch bestimmte Informationen ausfüllen.


The screenshot shows the 'Add a patient' form in the Captevia app. The form is overlaid on a 'Patients' list. The form fields include: SURNAME, FIRST NAME, DATE OF BIRTH, HEIGHT (cm), WEIGHT (kg), DOCTOR, APPLICATOR, AGENCY, EQUIPMENT TYPE, and COMMENTS. The 'Previous' and 'Next' buttons are visible at the bottom of the form. A keyboard is shown at the bottom of the screen.

Anlegen eines Patienten.



Scannen des Patienten

Um Ihren Patienten zu scannen, verwenden Sie die Schaltfläche „3D“.

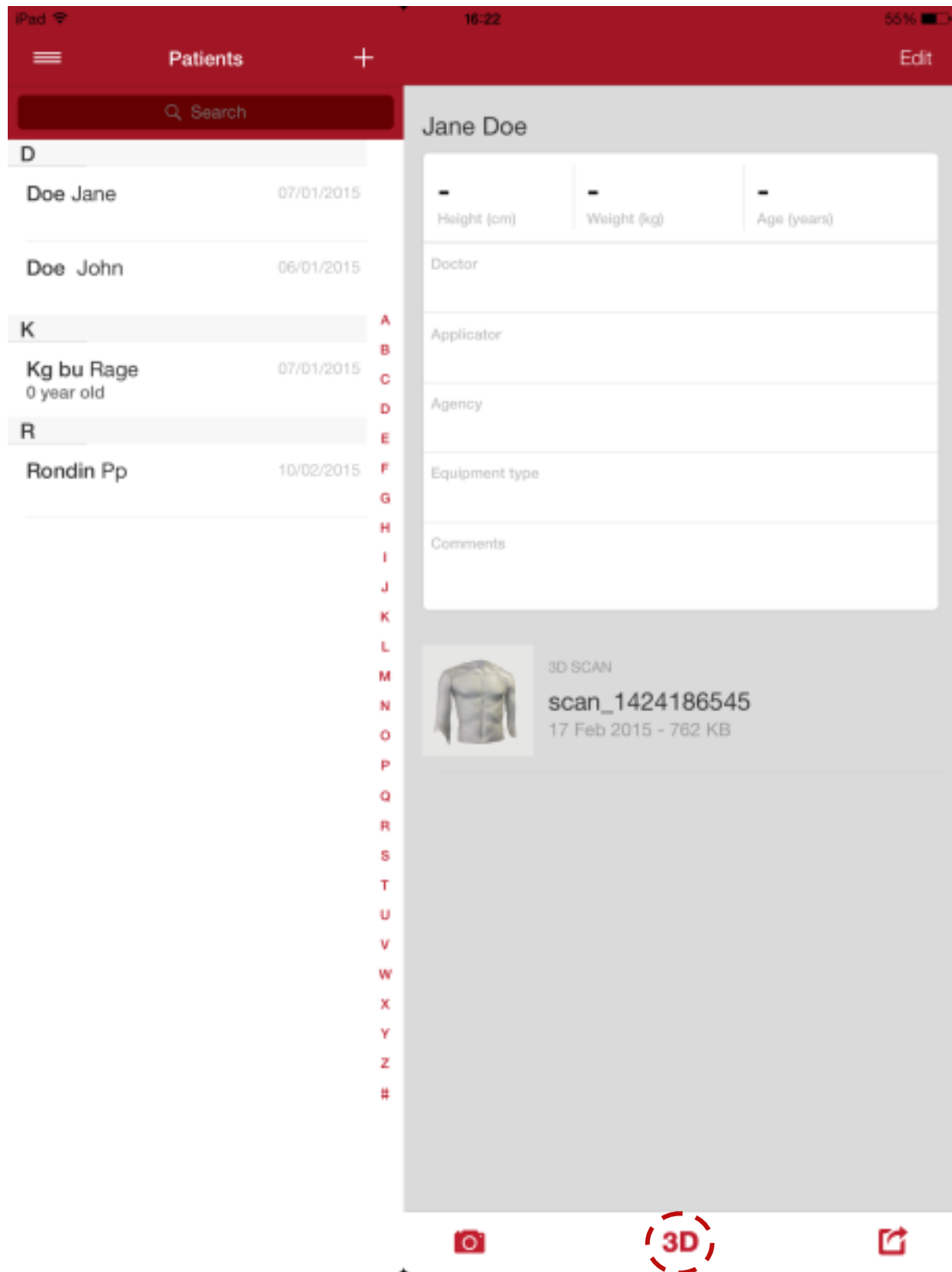


Verwenden Sie die 3D-Schaltfläche zum Scannen.


Wählen Sie die zu scannende Zone, indem Sie den Rahmen entsprechend vergrößern oder verkleinern. Der gewählte Bereich erscheint in rot.



Um die Größe und die Position des Rahmens zu ändern, verwenden Sie folgende Gesten:

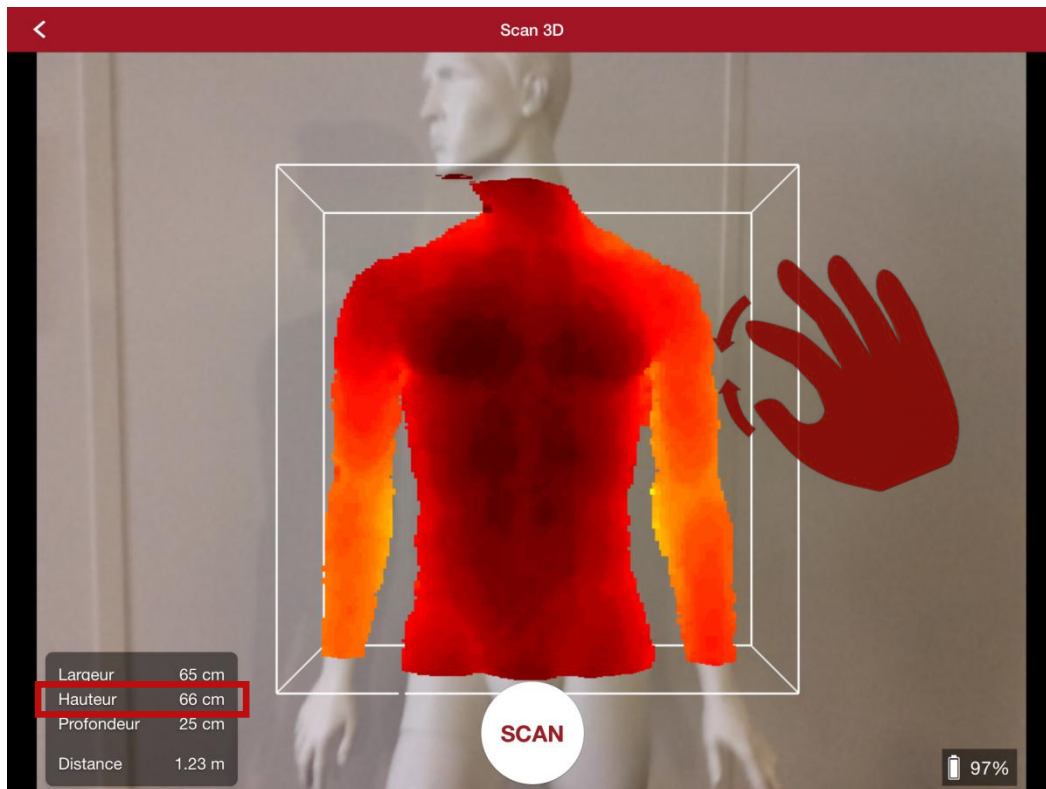


Senkrechtes Ein- und Auszoomen, um die Höhe des Rahmens zu ändern.

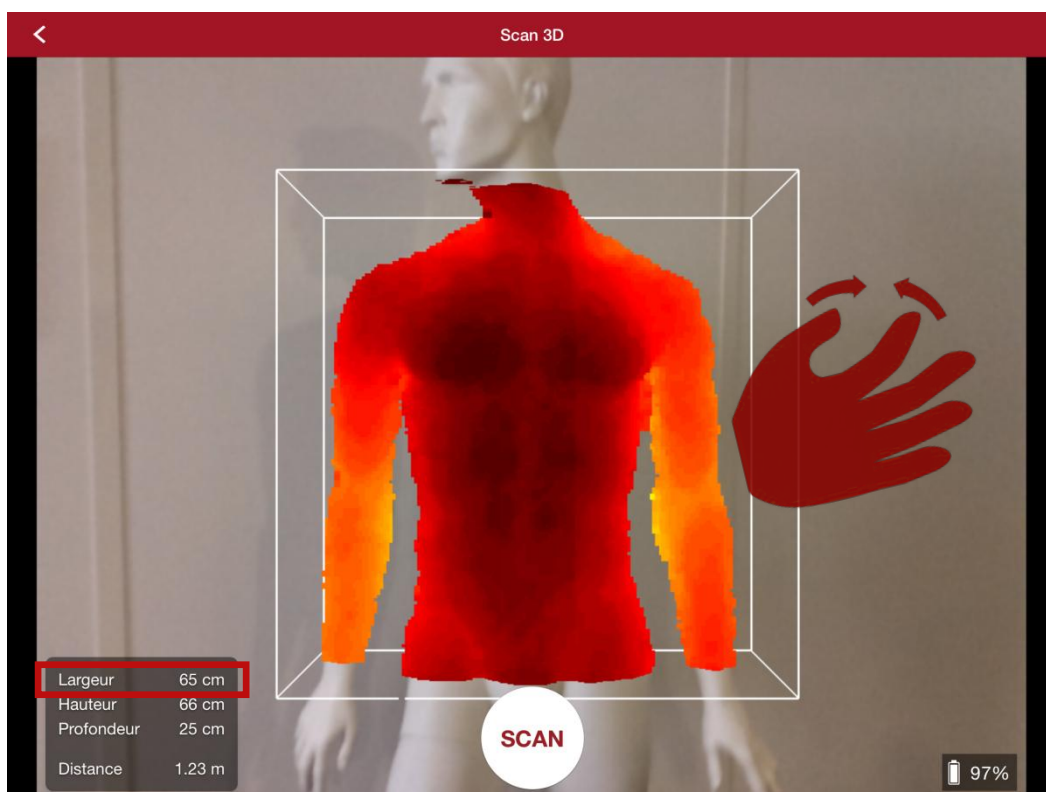


Waagrechtes Ein- und Auszoomen, um die Breite des Rahmens zu ändern



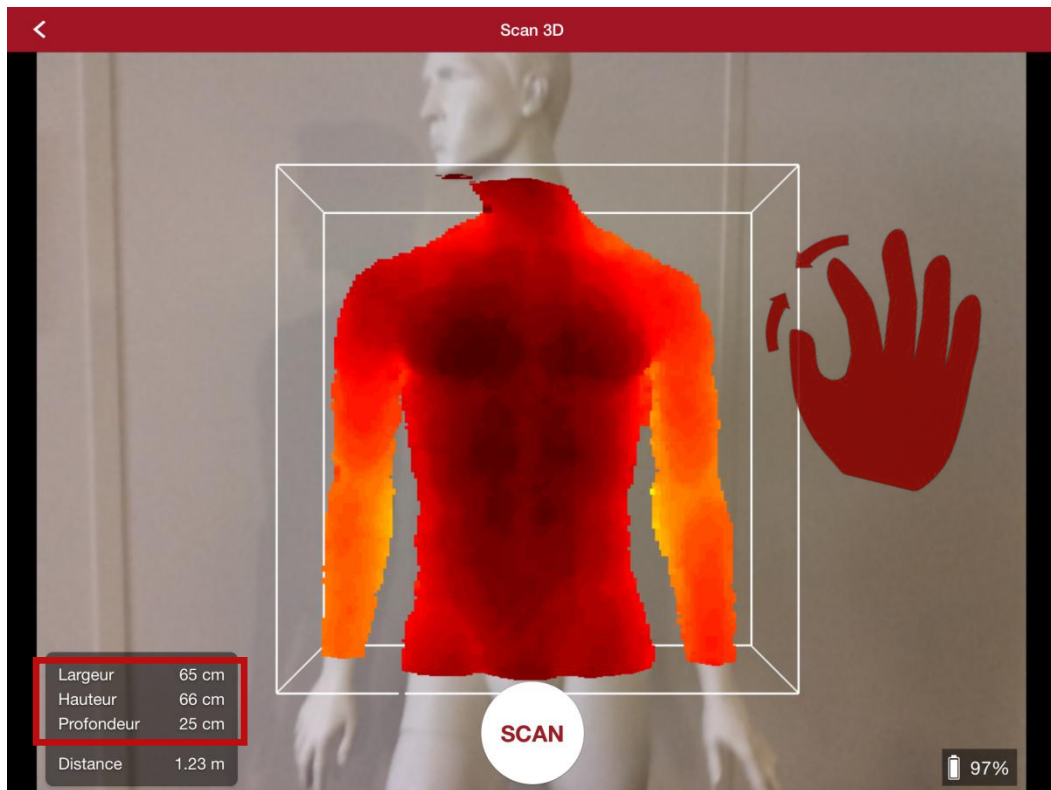


Diagonales Ein- und Auszoomen, um die drei Dimensionen des Rahmens zu ändern

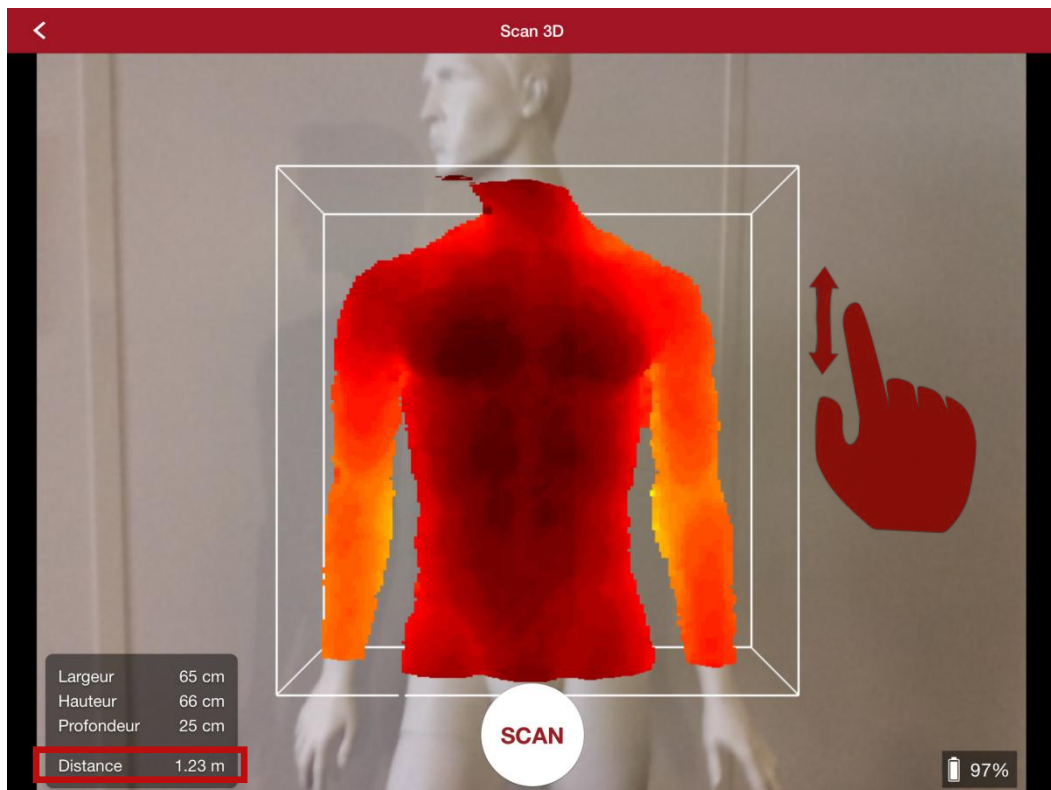


Auf der rechten Bildschirmseite von oben nach unten gleiten, um die Position des Rahmens (Abstand zwischen Sensor und Rahmenmitte) zu ändern



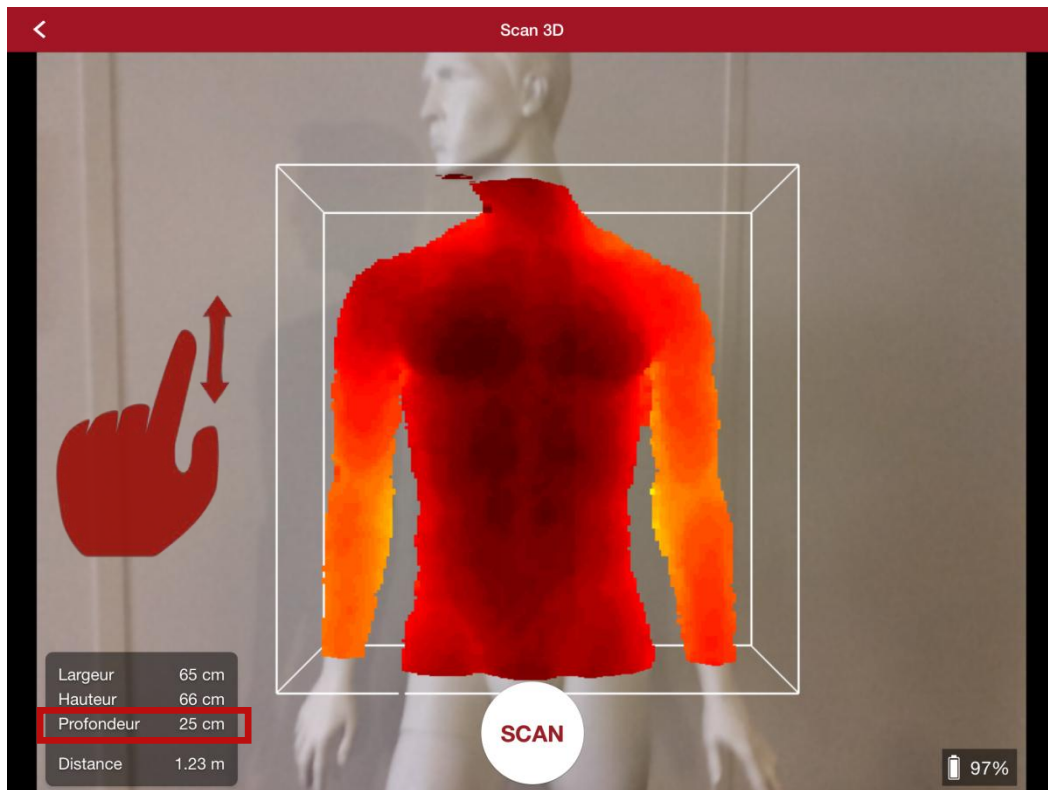

Auf der linken Bildschirmseite von oben nach unten gleiten, um die Tiefe des Rahmens zu ändern (der Abstand wird ebenfalls geändert, da sich die Position der Rahmenmitte ändert).


Hinweis: Größe und Position des Rahmens werden unten links am Bildschirm angezeigt.

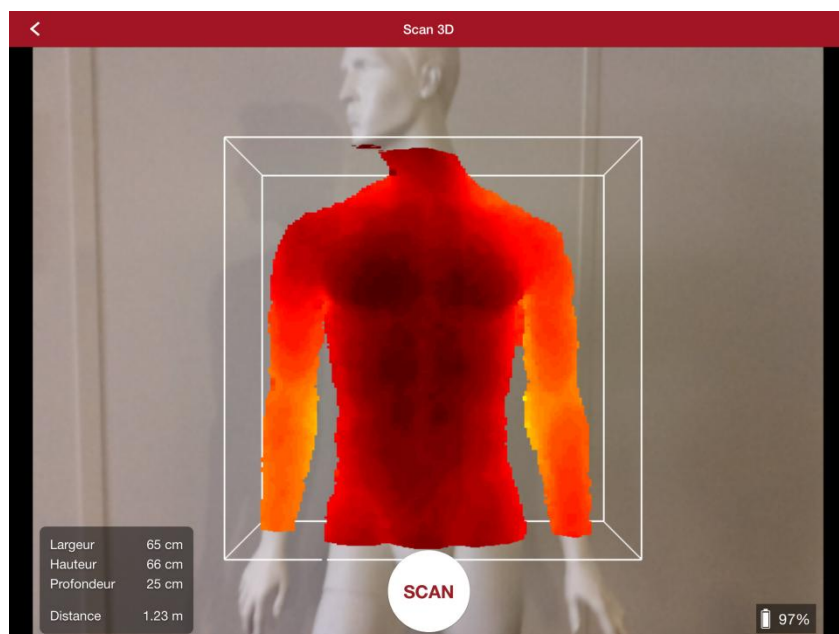

Nur der rote Bereich wird gescannt

Wenn die ausgewählte Zone richtig ist, klicken Sie auf „Scan“, um mit dem Scannen zu beginnen. Alles, was nicht rot war, bevor die Schaltfläche „Scan“ betätigt wurde, wird nicht gescannt.



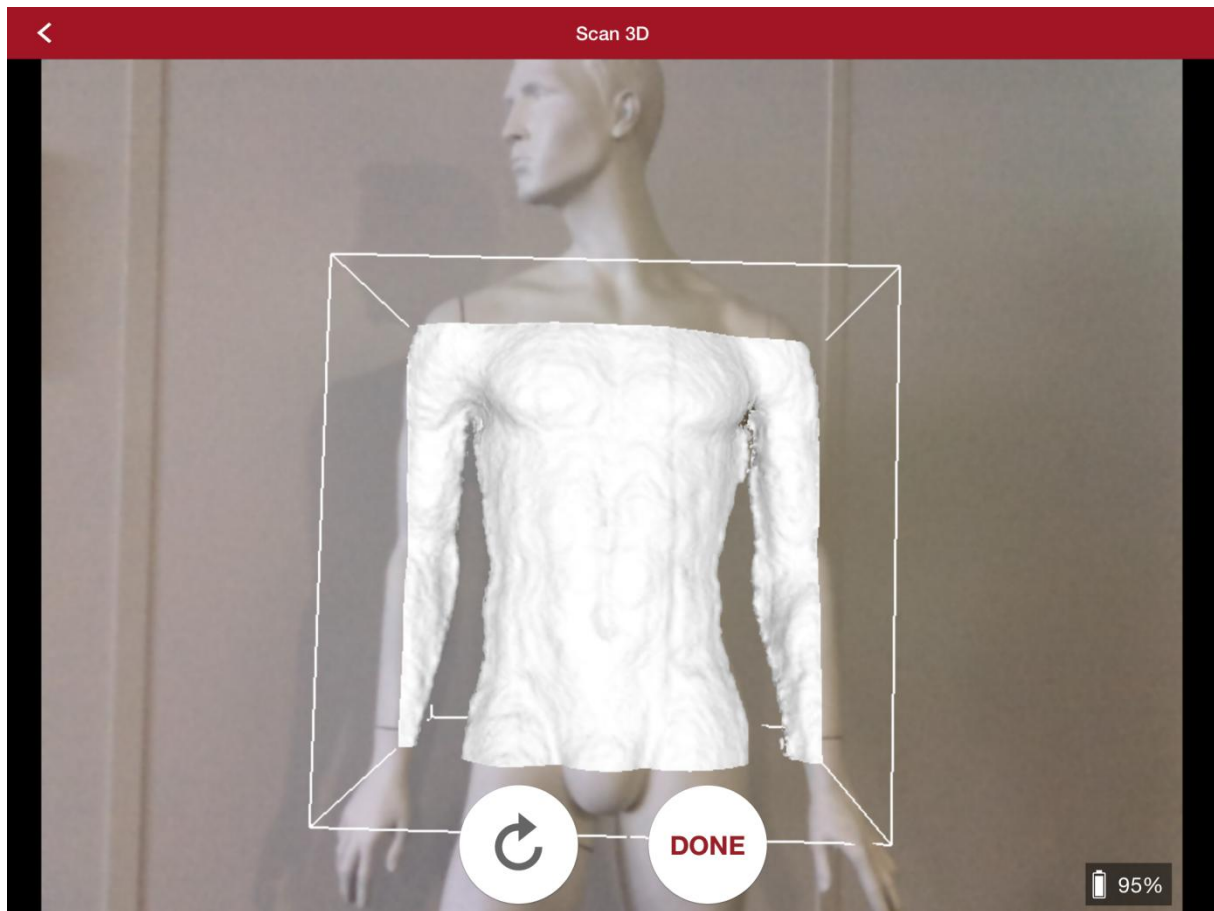

Beginn des Scan-Vorgangs

Gehen Sie um den Patienten herum, um die 3D-Form zu erstellen. Für höhere Präzision gehen Sie näher an den Patienten heran, wobei ein Abstand von 40 cm einzuhalten ist, die der Structure-Sensor zum Scannen benötigt.


Hinweis: Je kleiner der Rahmen, desto größer die Präzision.

Die Präzision des 3D-Modells ist von der anfänglichen Größe des Rahmens abhängig. Je kleiner der Rahmen, desto präziser die Messungen. Es empfiehlt sich somit, den Rahmen an die Art des Modells anzupassen, dass Sie erstellen möchten.



Der Structure-Sensor projiziert Infrarotlicht auf die Oberfläche. Um das Scan-Ergebnis zu verbessern, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Halten Sie den Structure-Sensor lotrecht zum Modell
- Scannen Sie möglichst nahe (40 cm Abstand)

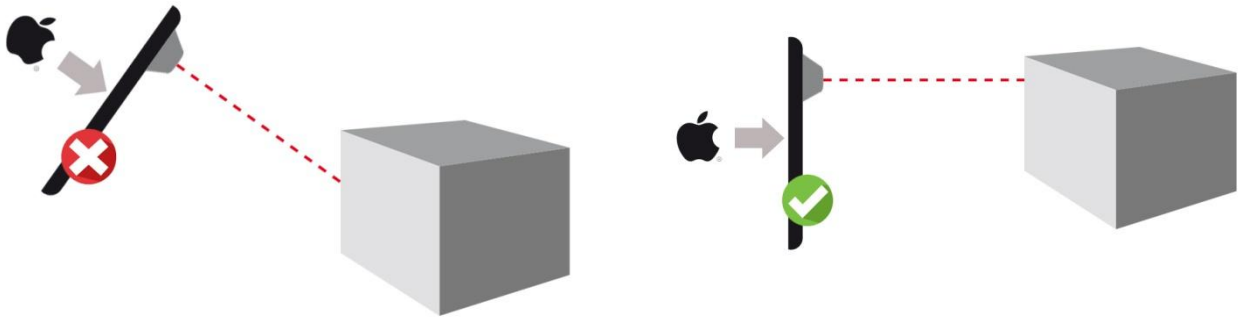

Hinweis: Für optimale Scan-Ergebnisse halten Sie den Structure-Sensor lotrecht zum Modell.




Hinweis: Für optimale Scan-Ergebnisse halten Sie den Structure-Sensor auf etwa 40 cm Abstand vom Modell.

Klicken Sie auf „Done“, um den Vorgang zu beenden.

Über die Schaltfläche „Zurück“ können Sie den Scan-Vorgang von der Definition des Rahmens ab neu beginnen.



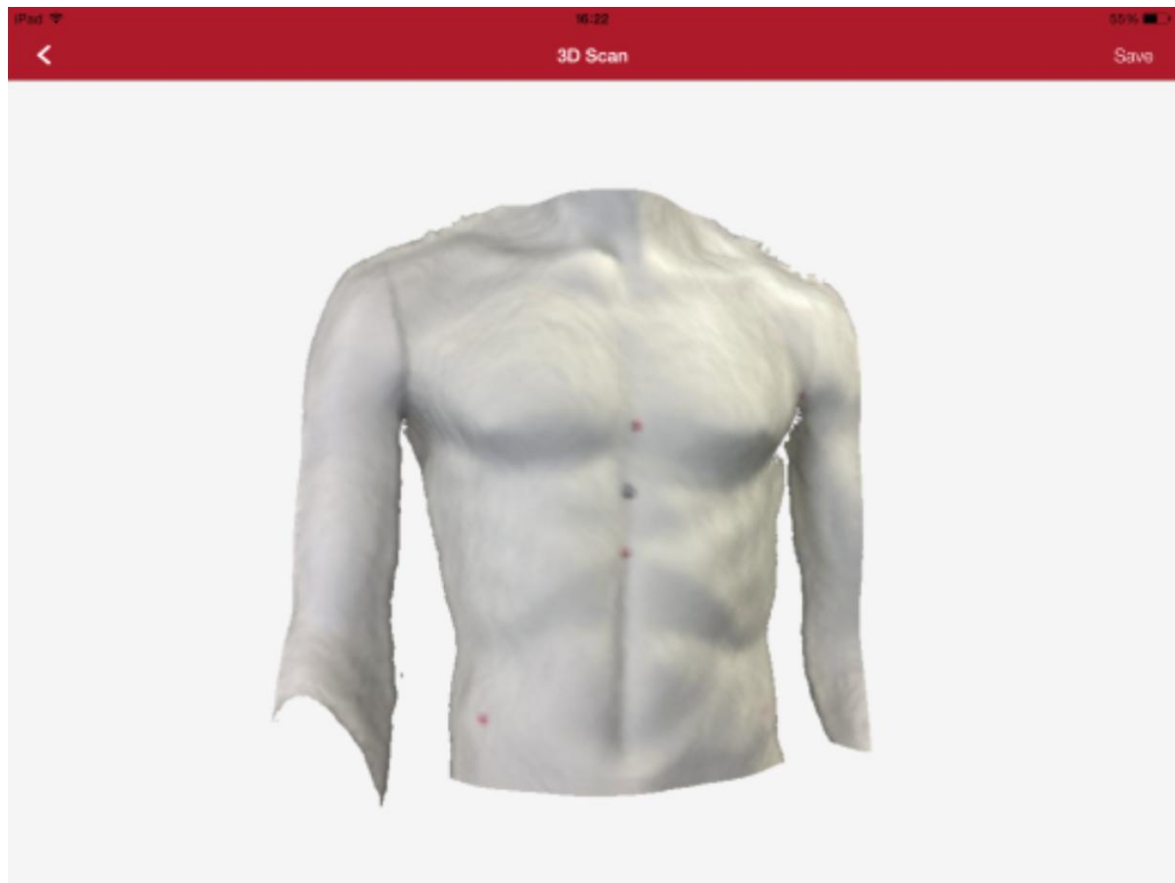


Scan-Ergebnis



Abschicken der Dateien


Schicken Sie ihr Scan-Bild je nach Bedarf per E-Mail oder über Dropbox.

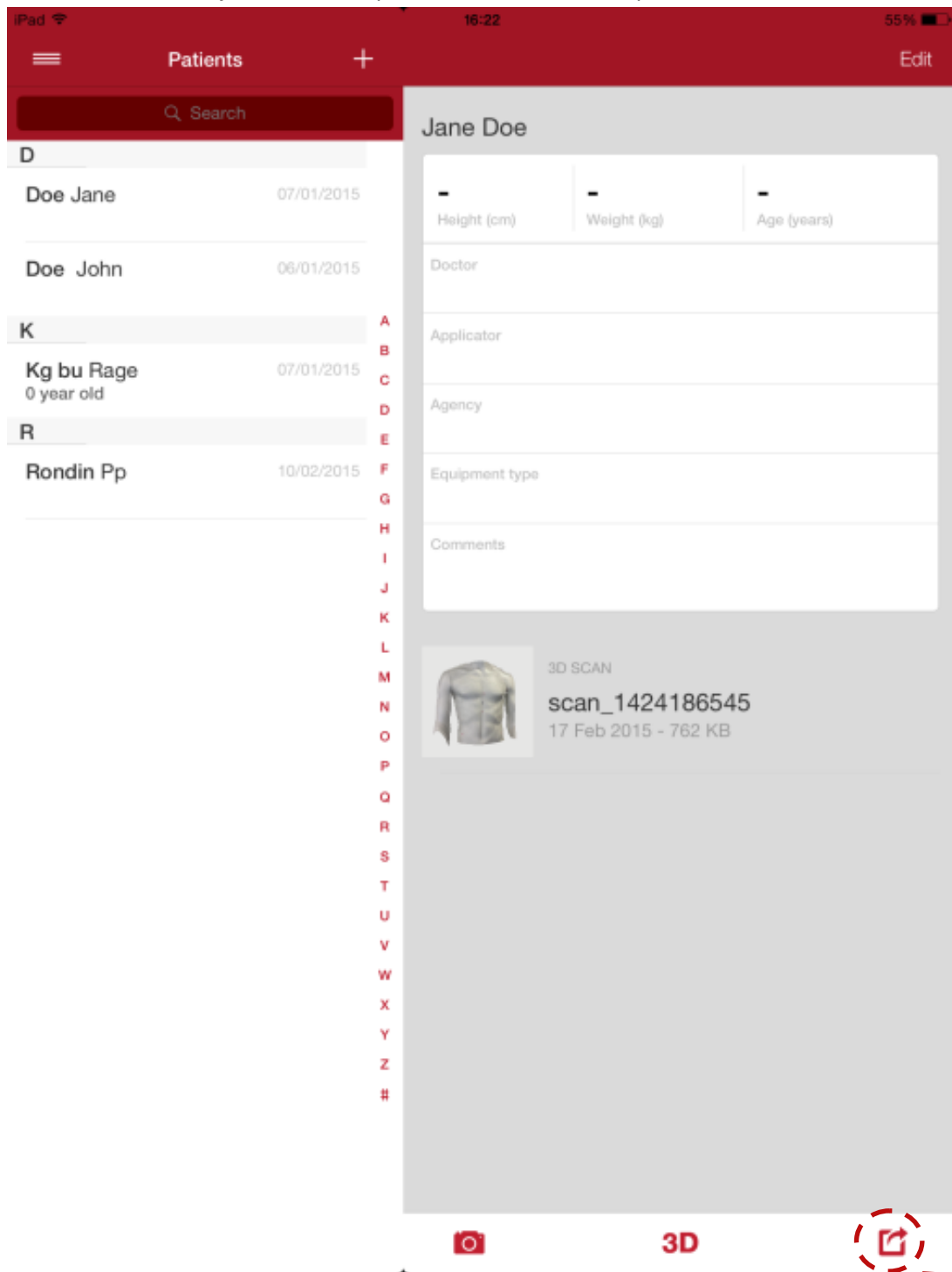

Abschicken der Dateien

Wählen Sie die Dateien, die Sie zu der Captevia-Datei hinzufügen möchten.



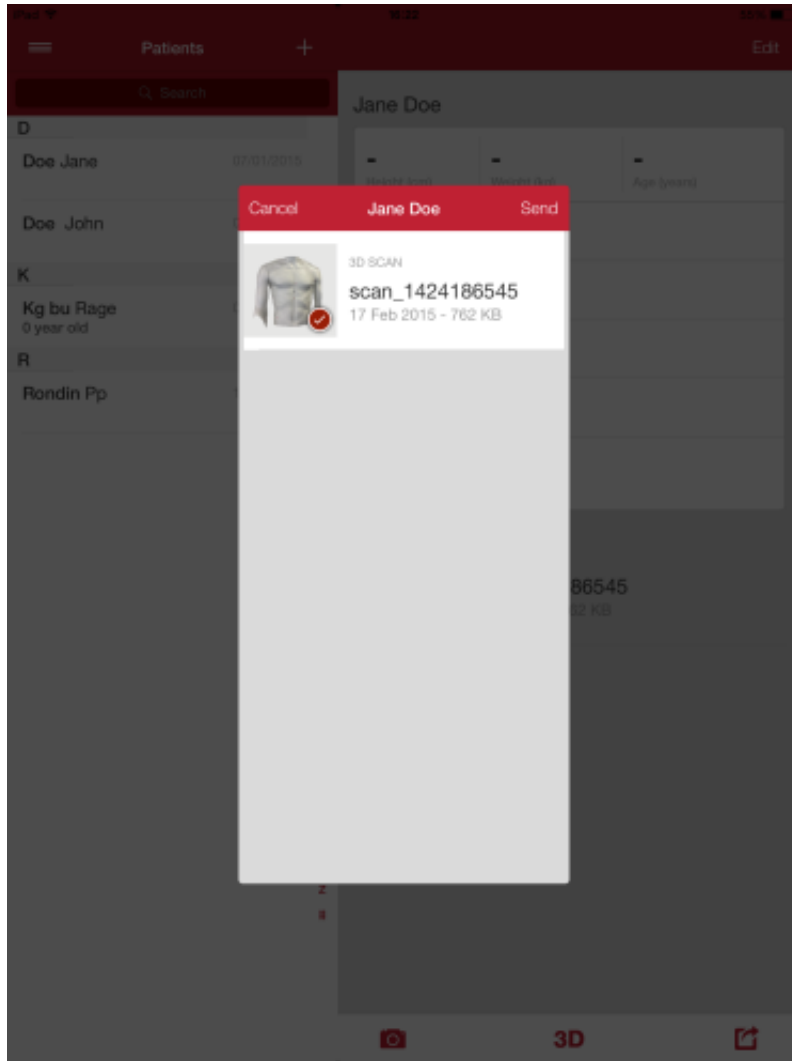

Auswählen der Dateien

Öffnen der Datei bei **RODIN4D neo**
GLOBAL CAD/CAM FOR P&O

Laden Sie die Captevia-Datei herunter und doppelklicken Sie auf das Icon.




Doppelklick auf die Datei



Rodin4D Neo startet und öffnet ein Vorschaufenster der Datei.

Ab Version 10.0.85 kann man die Captevia-Datei auch direkt über die Schnittstelle von Rodin öffnen (Menü Dateien -> Öffnen).

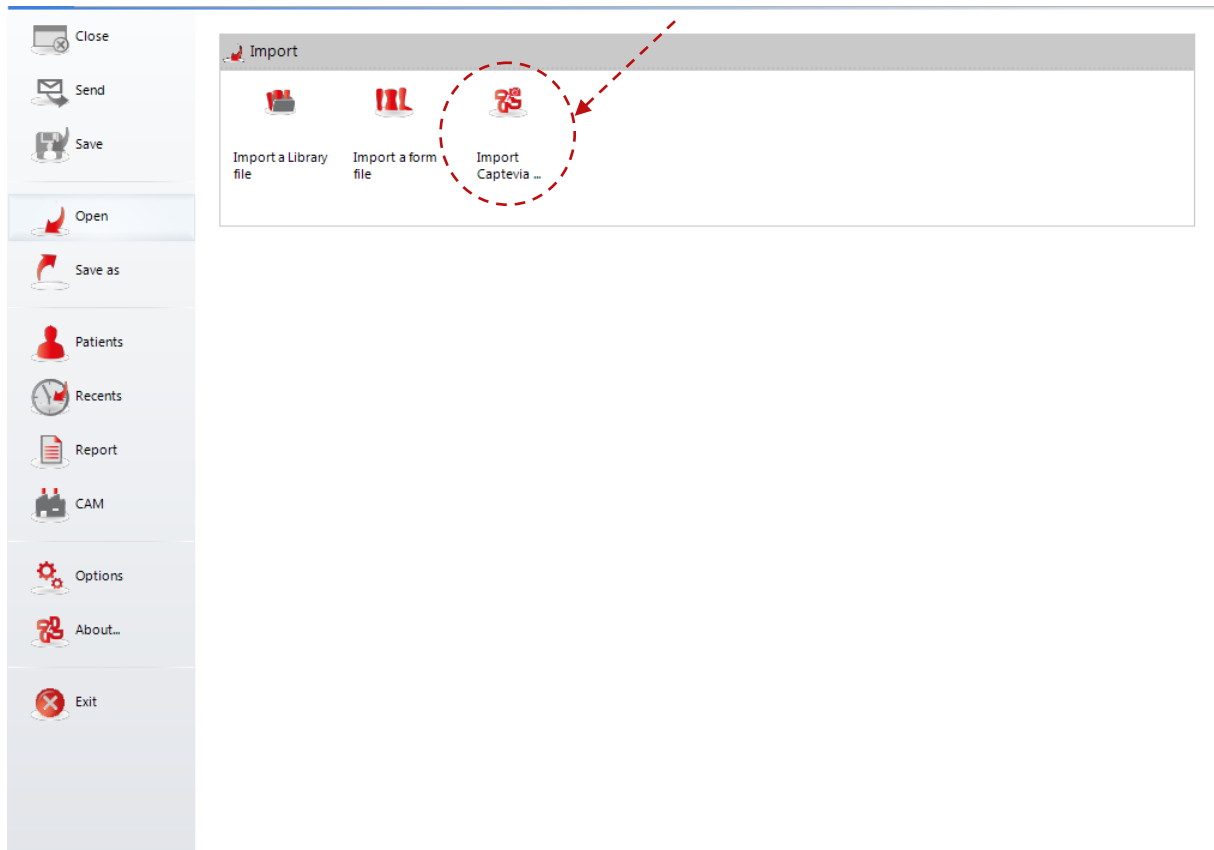

Öffnen Sie die Captevia-Datei direkt bei Rodin Neo


Sie können einen neuen Patienten anlegen oder die Datei in einen vorhandenen Patientenordner kopieren. Nachdem Sie Ihre Wahl getroffen haben, schließen Sie das Fenster. Sie finden den Patienten dann in der Patientenverwaltung wieder.





Der Inhalt der Captevia-Datei erscheint


In der Patientenverwaltung können Sie die Daten entnehmen, die in der Captevia-Datei enthalten sind. Wählen Sie das betreffende Scan-Bild aus der Liste mit 3D-Ansichten und verwenden Sie die Schaltfläche „Scan-Bild entnehmen“.

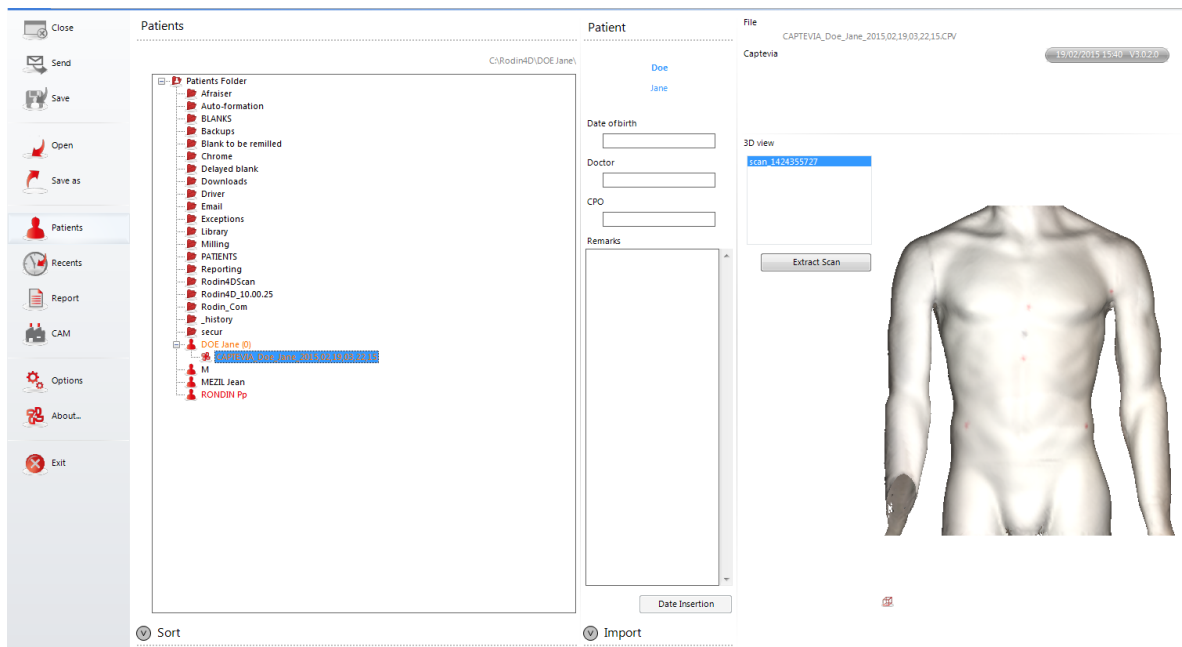

Die Datei erscheint in der Patientenverwaltung

Das Scan-Bild erscheint im Patienten-Ordner. Sie können eine Rodin-Form mit der Schaltfläche „Form anlegen“ erstellen oder die Datei bereinigen. Dazu klicken Sie auf „Säubern“.




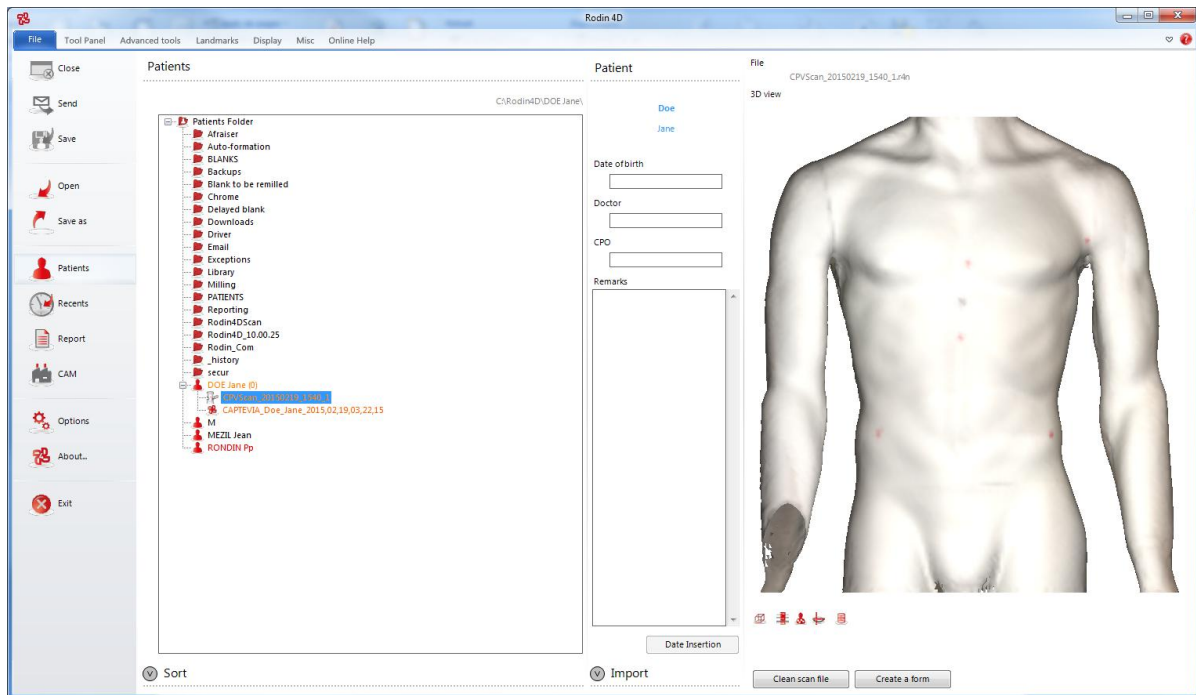

Übernahme des Scan-Bildes in den Patientenordner


Es erscheint ein Bereinigungsfenster. Folgen Sie den Schritten und klicken Sie auf Bestätigen.



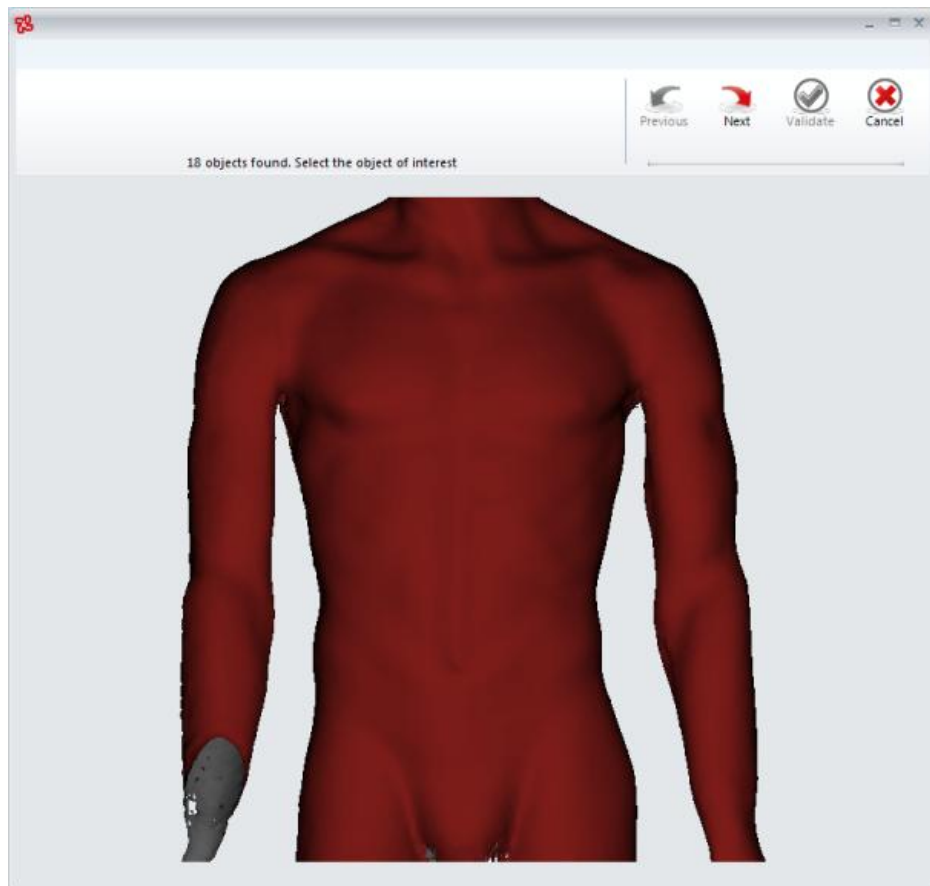

Folgen Sie den Schritten des Bereinigungsassistenten.


Sie können die aktuelle Datei ersetzen oder eine neue Datei anlegen. Dazu müssen Sie einen neuen Dateinamen wählen.

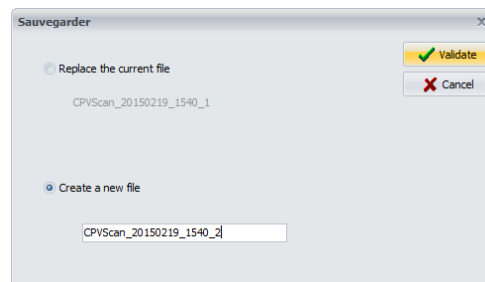

Um eine neue Datei anzulegen, tragen Sie dafür einen Namen ein

Wenn der Bereinigungsschritt beendet ist, können Sie die Rodin-Form anhand der Schaltfläche „Form anlegen“ erstellen.



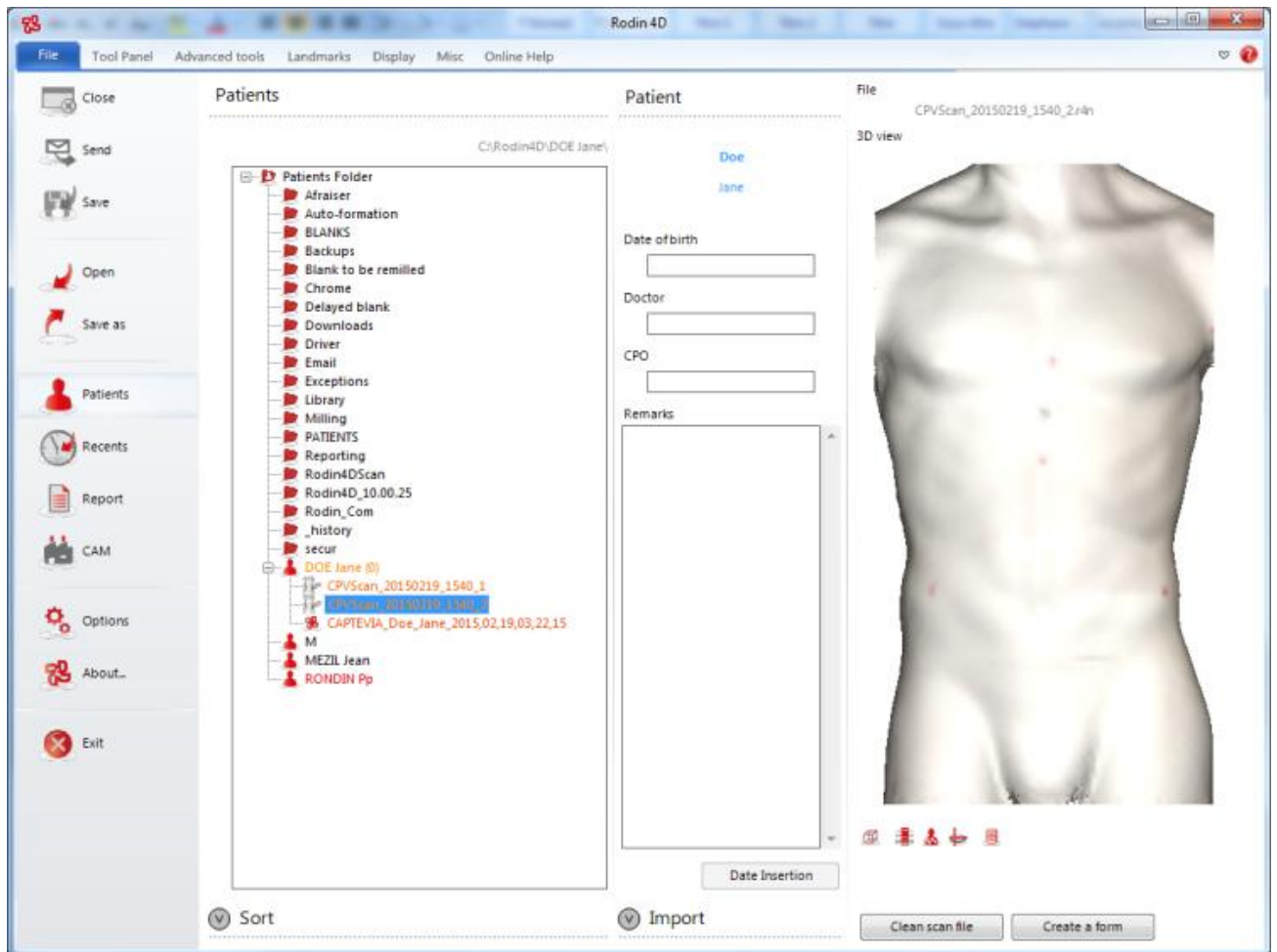

Erstellen der Rodin-Form

Nun können Sie mit dem Design Ihres Modells beginnen!

